

# Fehlerbehebung

Wenn	Probieren Sie folgendes
Die LEDs rot leuchten	Die Batterien sind fast leer. Laden Sie das Vibio mit dem mitgelieferten Ladekabel
Die LEDs nicht leuchten	Der Akku ist leer. Laden Sie das Vibio etwa 1,5 Stunden lang auf.
Das Vibio sich nicht mit dem Smartphone verbindet	<p>Überprüfen Sie zunächst die Bluetooth-Verbindung auf der Startseite der App. Wenn das Vibio-Symbol rot und durchgestrichen ist, versuchen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Bewegen Sie sich in Reichweite.</b> Bringen Sie Ihr Handy näher an das Vibio.</li><li><b>Schalten Sie Bluetooth aus und ein.</b> Wischen Sie, um das Kontrollzentrum zu öffnen / Klicken Sie auf Ihrem Mobiltelefon auf das Schnelleinstellungsfeld und anschließend auf das Bluetooth-Symbol.</li></ol> <p>Wenn es immer noch nicht funktioniert, müssen Sie das Vibio zurücksetzen und erneut mit der App verbinden. Versuchen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Beenden Sie die App.</b> Beachten Sie, dass es nicht ausreicht, diese nur zu schließen.</li><li><b>Trennen Sie Vibio.</b> Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Bluetooth. Tippen Sie auf  /  und stellen Sie dieses Gerät auf "vergessen", um "Vibio" zu trennen. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.</li><li><b>Setzen Sie Vibio zurück.</b> Ziehen Sie am Gurt und halten Sie ihn fest, bis die LED zu flackern beginnt. Lassen Sie ihn los und ziehen Sie ihn erneut, bis die LEDs blau zu pulsieren beginnen.</li><li><b>Richten Sie Vibio ein.</b> Starten Sie die Vibio-App erneut und folgen Sie den Anweisungen.</li></ol>

## Verwendungszweck

Vibrationsalarmgerät für hochgradig Hörgeminderte zur Signalisierung von Weckalarmen, Smartphone Anrufen und SMS in Verbindung mit einer App.

## Energie und Akku

Akkuleistung: 1 x 3.7 V AA Lithium-Ionen  
Leistungsaufnahme: Aktiv mit starker Vibration: < 1000 mA, Leerlauf: < 100 µA  
Betriebszeit: Bis zu 10 Tage / Ladung  
Ladezeit: Bis zu 1,5 Stunden bei 500 mA  
Ladestrom: Bis zu 500 mA, 5 V DC

## Kabel und Anschlüsse

Ladekabellänge: 1 m, 39"  
Kontakte: USB Typ A bis USB Micro-B

## Maße und Gewicht

Größe: 27 x 94 x 94 mm, Gewicht: 153 g

## Frequenz und Reichweite

Bluetooth-Frequenz: 2402 – 2480 MHz  
Ausgangsleistung: Max 2.5mW (4dBm)  
Reichweite: Bis zu 30 m, 33 m, freies Feld.  
Konnektivität: Bluetooth 4.2

## Regulatorische Anforderungen

Entspricht CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE,  
Der Grüne Punkt

## Wartung und Reinigung

Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, Sprays, Alkohol oder Scheuermittel.

## Sicherheits- und Garantiebedingungen

Erhalten Sie von Ihrem Händler.

## Umweltanforderungen

Nur für den Innengebrauch  
Temperatur: 0° – 35° C, 32° – 95° F  
Relative Luftfeuchtigkeit: 5% – 95%

## Kompatibilität

iOS11 / Android 4.4 und höher,  
iPhone 5s und neuer /  
Moderne Android-Geräte

## Wiederverwendbar

Ohne weitere Maßnahmen für den Wiedereinsatz geeignet. Anleitung für Sehbehinderte & Blinde stehen derzeit nicht zur Verfügung.

BE1221\_019MAN002




DEUTSCH

## Sie benötigen

- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS 8 / Android 4.4 oder höher
- Einen USB-Netzadapter

## Lieferumfang

- 1 Ladekabel
- 2 Vibrationskissen

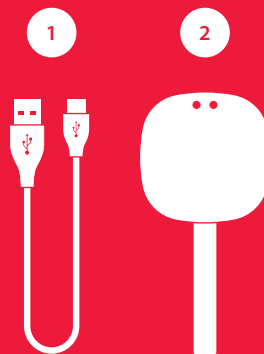


Vibio, BE1221

## Farben der LEDs

- **Weiß:** Alarm aktiviert oder Vibio kommuniziert mit Ihrem Smartphone
- **Blau:** Vibio ist bereit zur Verbindung (Pairing)
- **Grün:** Vibio wird geladen
- **Gelb:** Anruf oder Nachricht geht ein
- **Rot:** Akkuladestand niedrig

1 x ziehen: Schlummerfunktion  
2 x ziehen: Schaltet den Alarm ab

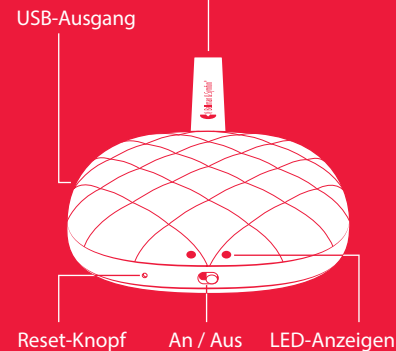


## Vibio vorbereiten

### 1 Laden Sie Vibio

Schließen Sie das Ladekabel an Ihr Vibio an und stecken Sie den Stecker in einen USB-Steckdosen-Adapter oder eine USB-Computerbuchse.

### 2 Schalten Sie Vibio ein

Schieben Sie den Ein- / Ausschalter nach rechts und behalten Sie das Vibio in der Nähe Ihres Smartphones.

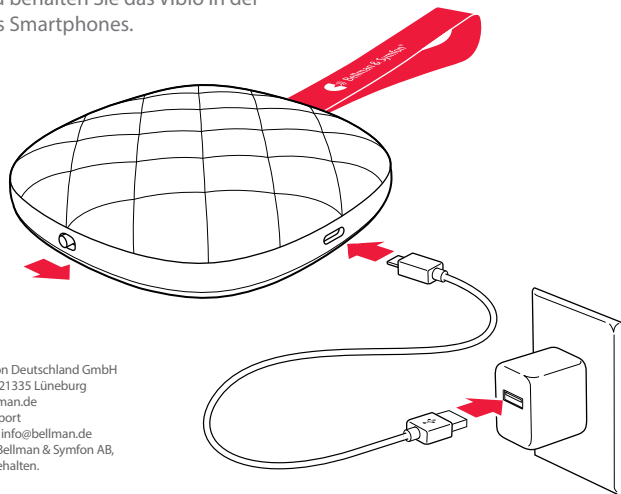

Bellman & Symfon Deutschland GmbH  
Uelzener Str. 14, 21335 Lüneburg  
E-Mail [info@bellman.de](mailto:info@bellman.de)  
Technischer Support  
0800 74 333 38 / [info@bellman.de](mailto:info@bellman.de)  
© and TM 2019, Bellman & Symfon AB,  
alle Rechte vorbehalten.

### 3 App Installation



Laden Sie die **Vibio** App aus dem App Store® oder von Google Play™ herunter und folgen Sie einfach den Anweisungen.



## App benutzen

### Alarime verwalten

- Hinzufügen.** Tippen Sie auf die Plus-Taste, um einen neuen Alarm zu erstellen.
- Bearbeiten.** Tippen Sie auf das Stift-Symbol, um einen Alarm zu bearbeiten.
- Löschen.** Tippen Sie auf die Minus-Schaltfläche, um einen Alarm zu löschen.
- AN / AUS.** Tippen Sie auf die Schaltfläche EIN oder AUS, um einen Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren.

### Vibio Status

- Verbindung.** Das Vibio-Symbol zeigt den Verbindungsstatus an.
- Akku.** Das Akku-Symbol zeigt den aktuellen Akkuladestand.

### Weiteres

- Hilfe.** Tippen Sie auf Menü > Hilfe, um mehr über die App zu erfahren.

