

Troubleshooting

Indien Probeer dit

De LED's rood knipperen Het batterijniveau is laag. Laad de Vibio op met behulp van de meegeleverde kabel.

De LED's niet branden De batterijen zijn leeg. Laad de Vibio ongeveer 1,5 uur op.

Vibio geen verbinding maakt met mijn mobiele telefoon Start door de Bluetooth-verbinding op het startscherm van de app te controleren. Als het Vibio-pictogram rood is en is doorgehaald, probeert u het volgende:

- 1 Verplaats binnen bereik.** Verplaats uw mobiele telefoon dichterbij de Vibio.
- 2 Schakel Bluetooth uit en weer in.** Veeg om het deelvenster Bedieningspaneel / Snelle instellingen op uw mobiel te openen en tik op het Bluetooth-pictogram.

Als het nog steeds niet werkt, dient u de Vibio-bedshaker en de app handmatig opnieuw in te stellen en opnieuw aan te sluiten. Probeer het volgende:

- 1 Sluit de app geforceerd.** Graag uw aandacht dat het niet genoeg is om de app alleen te sluiten.
- 2 Koppel de Vibio los.** Ga naar Instellingen > Bluetooth. Tik op ⓘ / ⚙️ en vergeet dit apparaat om "Vibio" los te koppelen. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.
- 3 Reset de Vibio.** Trek aan de riem en houd hem vast tot de LED begint te fllikeren. Laat los en trek het opnieuw totdat de LED's blauw beginnen op te lichten.
- 4 Stel Vibio in.** Start de Vibio-app opnieuw en volg de instructies.

Beoogd gebruik

Persoonlijk trilalarmapparaat voor gebruik met een mobiele-telefoon applicatie om wakker te worden.

Stroom en batterij

Batterijvermogen: 1 x 3.7 V AA lithium-ion
Stroomverbruik: Actief met sterke trillingen: <1000 mA, Inactief: <100 µA
Gebruiksduur: Tot 10 dagen / per laadbeurt
Opladtid: Tot 1,5 uur bij 500mA
Laadstroom: Tot 500 mA, 5V DC

Werkt met:

iOS11 / Android 4.4 en hoger
iPhone 5s en hoger
Moderne Android-apparaten

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 27 x 94 x 94 mm, 1.1 x 3.7 x 3.7"
Gewicht: 153 g, 5.4 oz.

Kabels en verbindingen

Kabellengte: 1 m, 39"
Aansluitcontacten: USB-type A naar USB Micro-B

Onderhoud en reiniging

Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, alcohol of schuurmiddelen.

Wettelijke vereisten

Voldoet aan CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt

Milieueisen

Alleen voor gebruik binnenshuis
Temperatuur: 0° - 35° C, 32° - 95° F
Relatieve vochtigheid: 5% - 95%

Veiligheids- en garantievoorwaarden

Zie aparte folder
Bellman & Symfon
Södra Långebergsgatan 30, 436 32 Askim,
Zweden. Telefoon +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
© en TM 2019, Bellman & Symfon AB,
alle rechten voorbehouden.

BET221_019AAN002




NEDERLANDS

Wat je nodig hebt

- Een mobiele telefoon of tablet met iOS11 / Android 4.4 of hoger.
- Een USB-stroomadapter

In de verpakking

- 1 Oplaadkabel
- 2 Vibio bed shaker

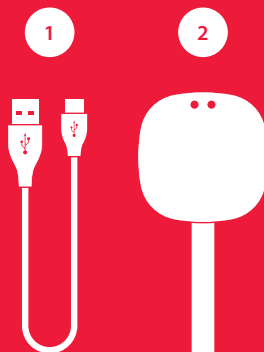

Vibio, BE1221

De knipperende lampjes bekijken

- **Wit** betekent dat de Vibio wordt geactiveerd door een alarm of met je telefoon communiceert.
- **Blauw** betekent dat de Vibio klaar is om te koppelen.
- **Groen** betekent dat de Vibio wordt opgeladen.
- **Geel** betekent dat je een oproep of bericht ontvangt.
- **Rood** betekent dat de batterij bijna leeg is.




Vibio installeren

1 Opladen

Verbind de laadkabel met de Vibio en sluit de connector aan op een USB adapter of een USB-computeruitgang.

2 Aanzetten

Schuif de Aan / Uit-schakelaar naar rechts en houd de Vibio in de buurt van je mobiel.

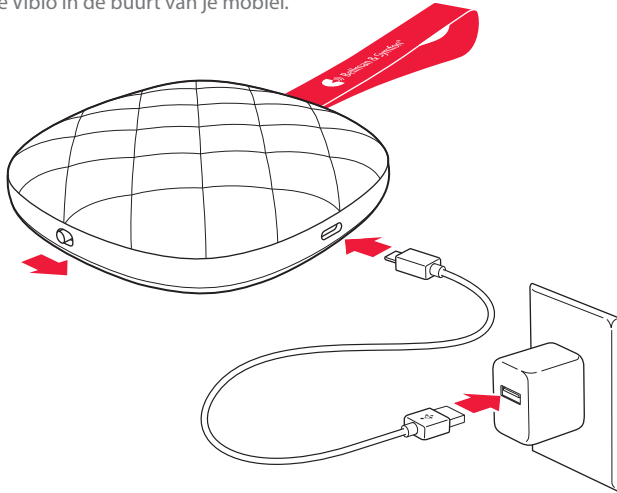

3 De app Visit installeren



Download de **Vibio** app vanuit de App Store® of Google Play™ en volg de installatie-instructies.



De APP gebruiken

Alarmbeheer



Toevoegen. Tik op de plusknop om een nieuw alarm toe te voegen.



Bewerken. Tik op de potloodknop om een alarm te bewerken.



Verwijderen. Tik op de min-knop om een alarm te verwijderen.



Aan/uit. Tik op de aan/uit knop om een alarm in of uit te schakelen.

Vibio monitoren



Verbinding. Het Vibio-pictogram toont de verbindingstatus.



Accu. Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

Meer leren



Help. Tik op Menu > Help voor meer informatie over de app.

