

Felsökning

Om	Gör så här
Lysdioderna blinkar rött	Batterinivån är låg. Ladda Vidio med den medföljande laddningskabeln.
Lysdioderna är släckta	Batteriet har tagit slut. Ladda vibio i ca 1,5 timme.
Vibio kan inte ansluta till min mobil	Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen på appens hemskärm. Om Vibiosymbolen är röd och överstruken, prova att: 1 Flytta inom räckvidd. Flytta din mobil närmare Vibio. 2 Slå På/Av Bluetooth. Slep för att öppna Kontrollcenter / det kompakta inställningsfältet och tryck på Bluetooth-symbolen. Om det fortfarande inte fungerar, kan du behöva återställa Vibio: 1 Avsluta appen. Notera att det inte räcker att stänga appen. 2 Koppla ifrån Vibio. Gå till Inställningar > Bluetooth. Tryck på ⓘ / ⓘ och "Glöm den här enheten" för att ta bort Vibio. Säkerställ att Bluetooth är på. 3 Återställ Vibio. Dra och håll i snoozebandet tills lysdioderna börjar flimra. Släpp och dra igen tills lysdioderna börjar pulsera. 4 Anslut Vibio. Öppna Vibio-appen och följ anvisningarna.

Avsedd användning

Sängvibrator med anslutning till mobilapp, avsedd att användas som väckarklocka.

Ström och batteri

Batteridrift: 1 x 3.7V AA Litium-jon
Strömförbrukning: Aktiv med stark vibration: < 1000 mA, Viloläge: < 100 µA
Drifttid: Upp till 10 dagar per laddning
Laddningstid: >1,5 timmar @ 500mA
Laddningsström: Upp till 500 mA, 5V DC

Kompatibilitet

iOS 11 / Android 4.4 och senare,
iPhone 5S och senare,
Moderna Android-mobiler

Storlek och vikt

Storlek: 27 x 94 x 94 cm
Vikt: 153 g

Frekvens och räckvidd

Bluetooth® frekvens: 2402 – 2480 MHz
Uteffekt: Max 2.5mW (4dBm)
Räckvidd: Upp till 30 m, fritt fält.
Kommunikation: Bluetooth® 4.2

Kablar och anslutningar

Kabellängd: 1 m
Kontakter: USB typ A till USB Micro-B

Underhåll och rengöring

Underhållsfri. Rengör endast med torr trasa. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Regulatoriska krav

Uppfyller CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE,
Der Grüne punkt

Omgivning

Endast för inomhusbruk
Temperatur: 0° – 35° C
Relativ luftfuktighet: 5% – 95%

Säkerhets- och garantivillkor

Se separat bilaga

Bellman & Symfon Europe AB
Södra Långebergsgatan 30, 436 32
Askim, Sverige, Tel: 031 68 28 20
E-post: info@bellman.com

© och TM 2019 Bellman & Symfon AB.
Alla rättigheter förbehållna.

BE1221_019MAN001-SE




SVENSKA

Detta behöver du

- En mobiltelefon med iOS 11, Android 4.4 eller senare.
- En USB-nätadapter

I förpackningen


- 1 Laddningskabel
- 2 Vibio sängvibrator

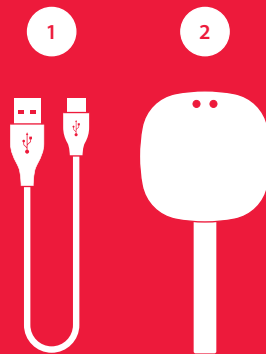

Vibio, BE1221

Tolka lysdioderna

- **Vitt** betyder att Vibio är aktiverad eller kommunicerar med din mobil.
- **Blått** betyder att Vibio är klar att anslutas.
- **Grönt** betyder att Vibio laddas.
- **Gult** betyder att du får ett samtal eller meddelande.
- **Rött** betyder att batterinivån är låg.

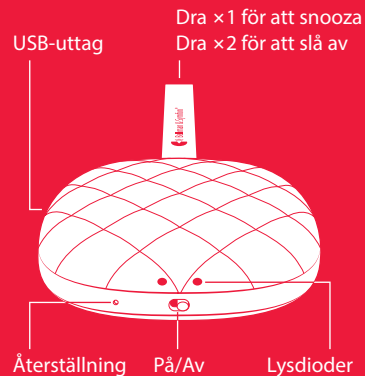

Installera Vibio

1 Ladda Vibio

Anslut laddningskabeln till Vibio och en USB-nätadapter för att ladda den.


2 Slå på Vibio

Starta Vibio med På/Av-knappen och se till att den är inom mobilens räckvidd.

3 Installera appen





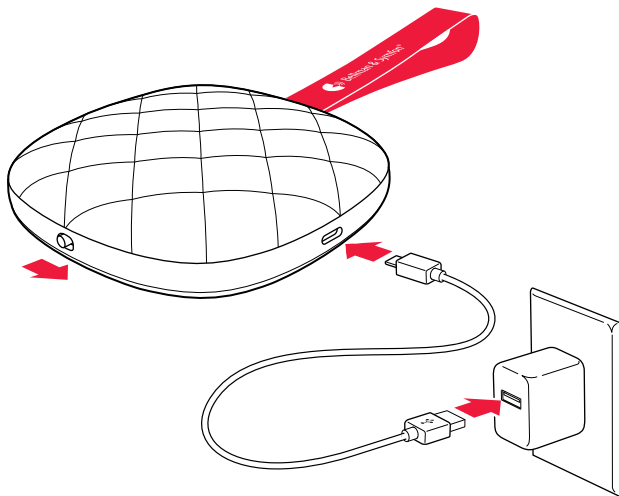

Ladda ner **Vibio**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.





Använda appen


Hantera alarm

-  **Nytt alarm.** Tryck på Plus-knappen för att skapa ett alarm.
-  **Redigera.** Tryck på pennsymbolen för att redigera ett alarm.
-  **Radera.** Tryck på minus-knappen för att ta bort ett alarm.
-  **På/Av.** Tryck på På/Av-knappen för att aktivera eller inaktivera ett alarm.

Kontrollera anslutning

-  **Anslutning.** Vibiosymbolen visar om Vibio är ansluten till mobilen.
-  **Batteri.** Battersymbolen visar aktuell batterinivå för Vibio.

Mer information

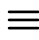-  **Hjälp.** Tryck på Meny > Hjälp för att lära dig mer om appen.

