
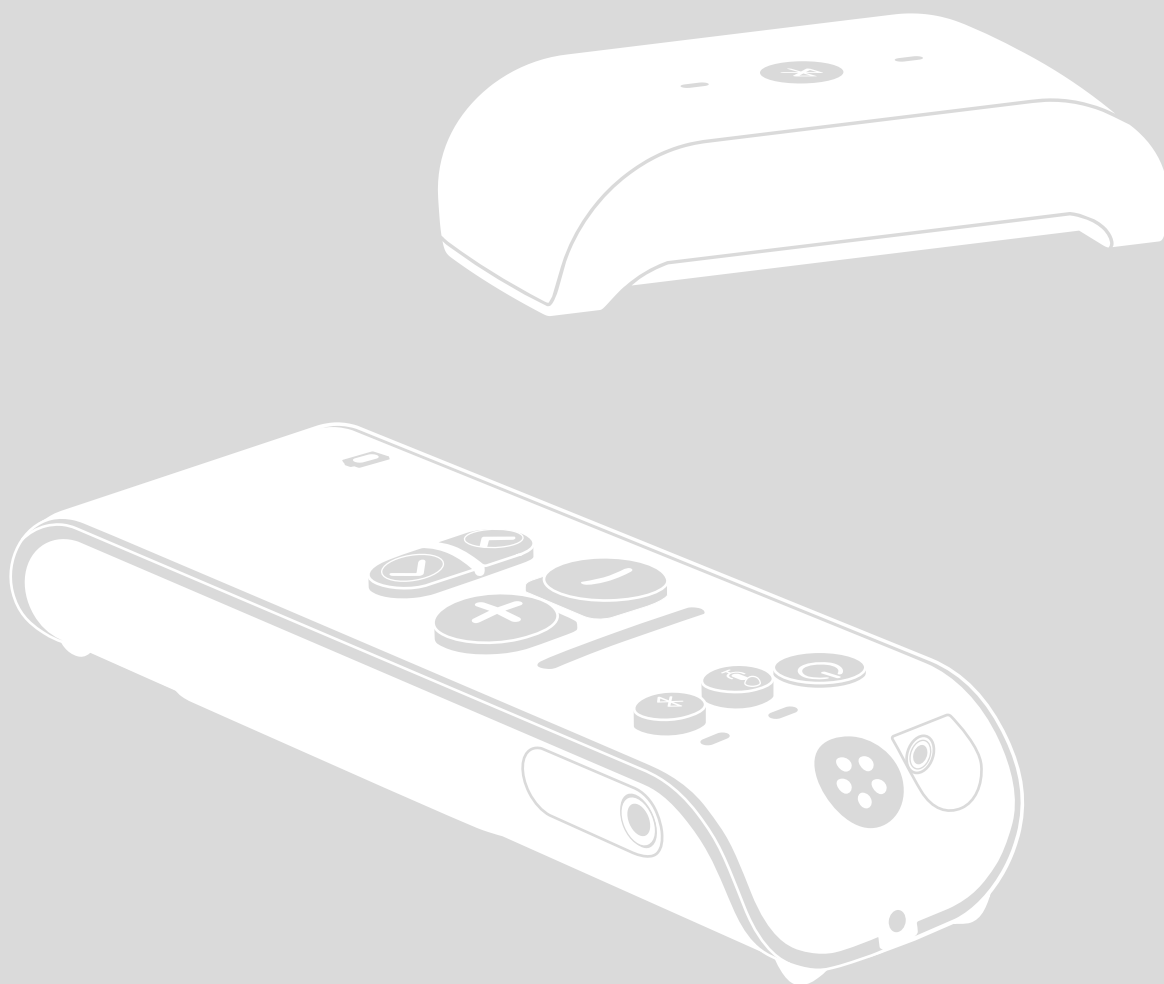


BE8054

简体中文

BE2021 Maxi Pro 个人交流器（专业版）

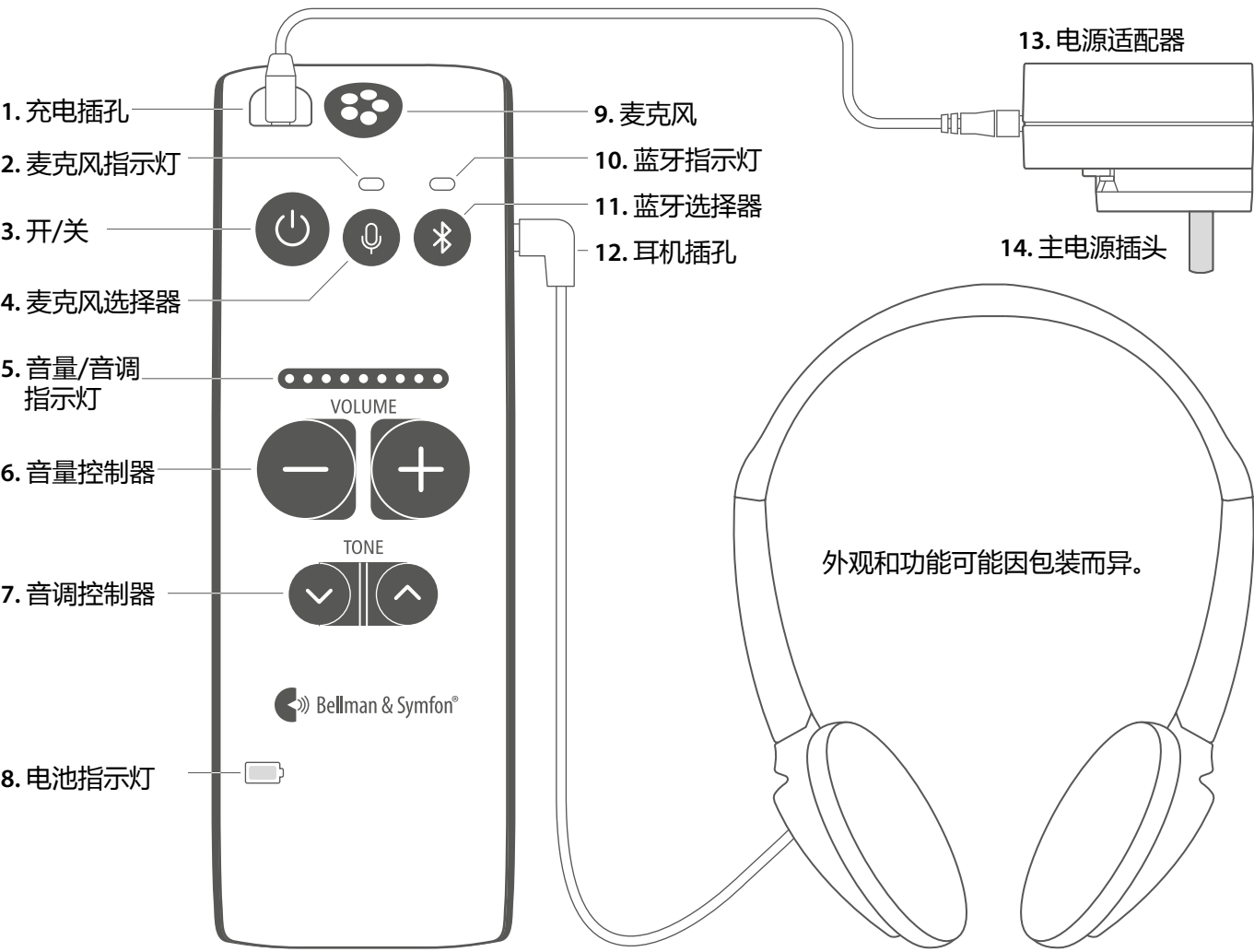

关于 Maxi Pro

Maxi Pro 是一款数字型语音扩大器，可洪亮、清晰地放大人语声。当你在餐厅就餐、使用手机和收看电视时，可以使用 Maxi Pro 增强语音效果。

开始操作

第 1 步：对 Maxi Pro 充电

- 1 将充电线连接至电源适配器 (13) 和 Maxi Pro 的黄色充电插孔 (1) 处。
- 2 将主电源插头 (14) 连接至电源适配器 (13)，检查其是否正确锁定，然后将其连接至电源插座。
- 3 充电时，电池指示灯 (8) 闪烁绿色。大约 3 小时后持续亮起绿灯，这表明 Maxi Pro 已完全充好电。

第 2 步：连接 Maxi Pro

将附带的头戴式耳机、入耳式耳塞或环颈圈连接至 Maxi Pro 的绿色耳机插孔 (12) 处。

第 3 步：启动 Maxi Pro

按下 开/关 按钮 (3) 大约 1 秒钟启动 Maxi Pro。麦克风指示灯 (2) 亮起绿灯，音量/音调指示灯 (5) 显示当前音量 3 秒钟。
如要关闭 Maxi Pro，请按住 开/关 按钮 (3) 大约 3 秒钟，直至所有指示灯熄灭。

使用 Maxi Pro 增强语音

Maxi Pro 配有一台可增强语音效果的内置全向麦克风 (9)。可将 Maxi Pro 放置在讲话人附近的桌面上，手持或者使用夹子将其夹在衣服上。

调节音量

使用音量控制器 (6) 上的 **+** 增加音量，**-** 减小音量。可分 9 个级别调节麦克风音量，分 15 个级别调节电视机与手机音量。声级在音量/音调指示灯 (5) 上显示。

注：每次打开 Maxi Pro 时，将音量调低，以免出现令人不适的音量。

调节音调

按下音调控制器 (7) 上的 **^** 提高高音，按下 **v** 降低高音。可分 5 个级别调节高音，音调在音量/音调指示灯 (5) 上显示。

注：增加高音使得 S，F 和 T 发音听起来更加明显，更容易辨认。

使用 Maxi Pro 与手机连接

配对

- 1 通过按下麦克风按键 (4) 来确保 Maxi 工作在麦克风模式。
- 2 按住 Maxi Pro 蓝牙选择器 (11)，直至蓝牙指示 (10) 器闪烁蓝灯。
- 3 确保手机上的蓝牙开启。打开蓝牙菜单，并在列表中选择 “Maxi Pro”。
- 4 蓝牙指示灯将持续显示蓝色，这表明配对成功。

注：您的手机与 Maxi Pro 断开连接时，您需要重复 3，4 步骤。

接听电话

- 1 当手机铃声响起时，Maxi Pro 指示灯 (10) 将闪烁蓝色。其他所有声音将保持静音，您将会听到耳机内的响铃信号。
- 2 如要 接听 电话，按下 Maxi Pro 的蓝牙 选择器 (11) 或者使用耳机上的遥控装置。此时，您将会在耳机内更好地听到来电声音，您的声音将由 Maxi Pro 麦克风或耳机上的远程麦克风拾取。
- 3 如要挂断，再次按下 Maxi Pro 蓝牙选择器。

注：如要拒绝来电，按住 Maxi Pro 蓝牙选择器 3 秒。

打电话

当你用电话通话时，你会从耳机里面听到被放大的对方的声音，你的声音将会被 Maxi 麦克风拾取。

播放音乐

在您的手机上播放音乐，然后按下 Maxi Bluetooth 选择器 (11)，直到听到音乐声音。

使用耳机的麦克风

当您使用耳机通话时，将从耳机的远程麦克风拾取声音。

使用 Maxi Pro 收听电视

要听电视上播放的声音，你需要一个 Maxi Pro TV streamer，请看另外一份 TV streamer 使用说明书。

收听电视机声音

打开电视机，选择一档节目，然后按下 Maxi Bluetooth 选择器 (11) 直到听到电视播放声音。

注：如果在观看节目时有电话呼入，则电视机的声音将会静音，这样您可以清晰听到来电者的声音。挂断电话时，电视机的声音将自动恢复。

自动重连


Maxi 将会在它在有效连接范围内自动重连到你的 TV streamer，所以你可以带着 Maxi 去拜访家人和朋友而免去重新配对的麻烦。

电池与充电

Maxi Pro 配备最长可持续 70 小时的内置充电电池。当电池指示灯 (8) 开始闪烁红灯时，应及时为电池充电，请见对 Maxi Pro 充电。

连接夹子

如要连接夹子，将夹子顶靠背盖，然后用力按压直至其锁定。如要拆下夹子，将圆形手柄从滑块中拉出。

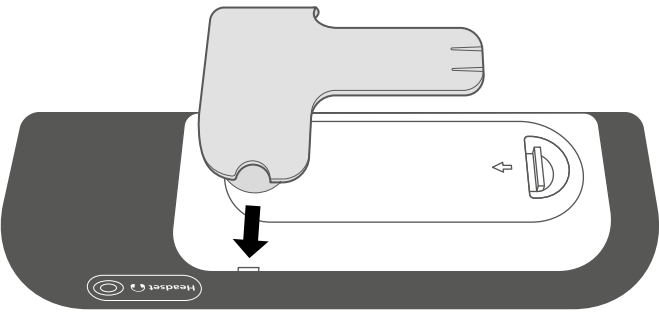

故障排除

可通过执行下方建议快速解决大多数问题。

问题	解决方法
无法通过蓝牙与设备配对。	按下麦克风选择器 (4)，确保您的 Maxi 为麦克风模式。请见 配对 章节中所述的步骤重新尝试配对。
按下开关键没有反应。	电池电量耗尽。对 Maxi Pro 充电，请见对 Maxi Pro 充电。
Maxi Pro 电池指示灯闪烁红灯。	电池电量低。对 Maxi Pro 充电，请见对 Maxi Pro 充电。
在开机状态下，耳机没有声音。	- 首先，确保音量达到要求的水平。然后检查耳机插头是否正确连接到 Maxi 耳机插孔 (12)。 - 按下 Maxi Pro 音量控制器 (6) 上的 + 提高音量 - 将耳机连接至另外一台设备（例如：智能手机），然后检查是否听到任何声音。否则，可能需要更换耳机。 - 如果选择蓝牙模式，应确保 电视伴侣 或手机在范围内、已配对并播放声音。
耳机无法听到手机的声音。	确保手机上的蓝牙开启，并且与 Maxi Pro 配对，请见使用 Maxi Pro 与手机连接章节中的配对。
耳机未听到电视机的声音。	确保电视伴侣在范围内并且与 Maxi Pro 配对，请见使用 Maxi Pro 收听电视章节中的配对。
Maxi 的音量即使调到最大了，还是很小声。	试着增大电视或者手机的输出音量。
耳机上听到尖锐噪声。	- 降低音量或者增加 Maxi Pro 与耳机之间距离。 - 将 Maxi Pro 内置麦克风 (9) 对准其他方向。
Maxi 没有反应/死机。	- 按下 On/Off（开/关）按钮 (3) 大约 10 秒钟关闭 Maxi。 - 按下 On/Off（开/关）按钮大约 1 秒钟再次启动 Maxi。

保养与维护

使用产品

注：Maxi Pro 能够产生很大的声压，请小心使用，请逐渐增大音量到一个比较舒适的声音。在高声压情况下，容易损坏你的听力。

确保一些小部件远离儿童不能接触到的地方。

请在 0-35 摄氏度的干燥环境中使用本产品。

清洁

使用一块柔软的无绒布清洁产品。避免机器受潮。请勿使用化学物品清洁。

保养与质保

如果产品出现损坏迹象或者无法正常工作，请遵循本手册中的使用说明。如果产品依旧无法正常运行，请联系您当地的经销商，了解保养与质保信息。

BE2022 Maxi Pro 电视伴侣




关于电视伴侣

Maxi Pro 与电视伴侣完美配合,通过蓝牙接收到全立体声，可使您以适合自己且不会影响他人的音量收听电视。（单独售卖）

包装清单

除了电视伴侣之外，还包含下列物品：

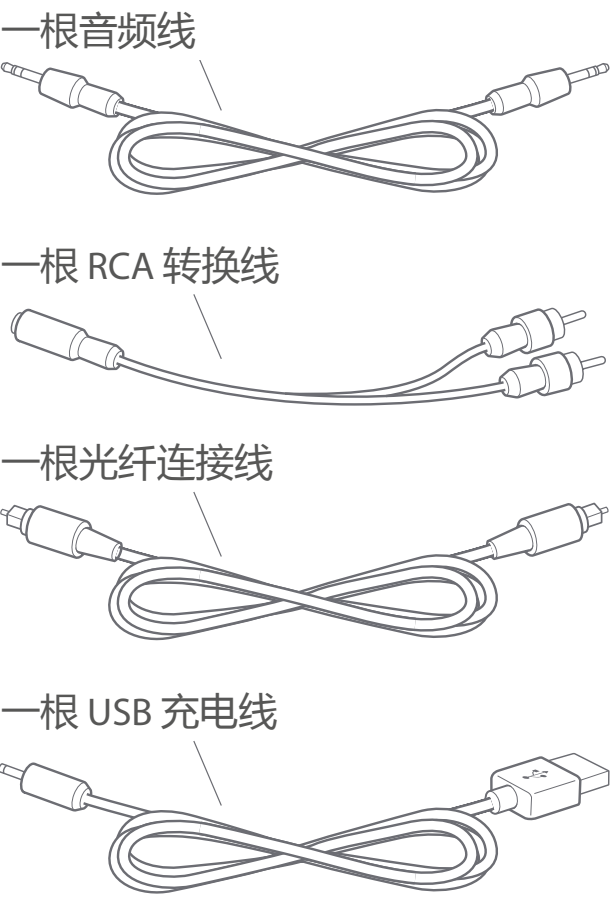


启动所需物件

为了设置电视伴侣您还需要：

一台带有 RCA, 耳机或光纤音频端口的电视机

一台 Maxi Pro 个人辅听器（专业版）

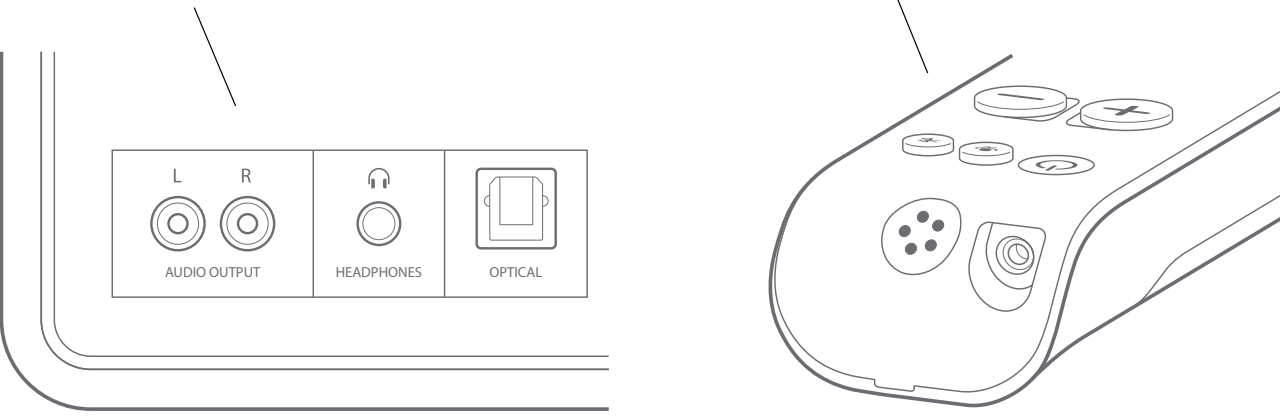

设置电视伴侣


第 1 步：连接音频

有许多方法可将 电视伴侣 连接至电视机。这取决于电视机配备的音频端口类型。

使用电视机的 RCA 输出

- 1 将音频线的一端连接至位于 电视伴侣 背部的音频输入。
- 2 将另一端连接至 RCA 转换线上。
- 3 RCA 插头连接至电视机上的音频输出。


注：您也可将音频线直接连接至电视机上的耳机输出。请注意，这有可能将某些型号电视机上的扬声器静音。

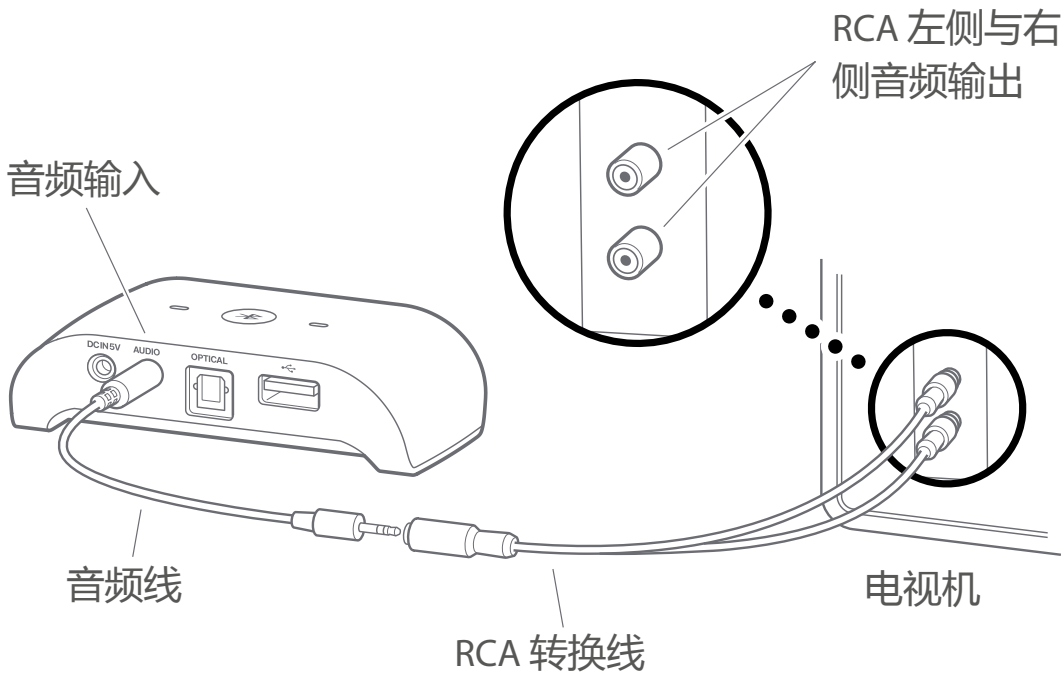

使用电视机的光纤输出

如果电视机上配备光纤输出，则可使用光纤连接线将 电视伴侣 连接至电视机。以下为连接方法：


- 1 将光纤连接线的一端连接至位于电视伴侣背部的光纤输入口。
- 2 将另一端连接至电视机上的光纤输出。

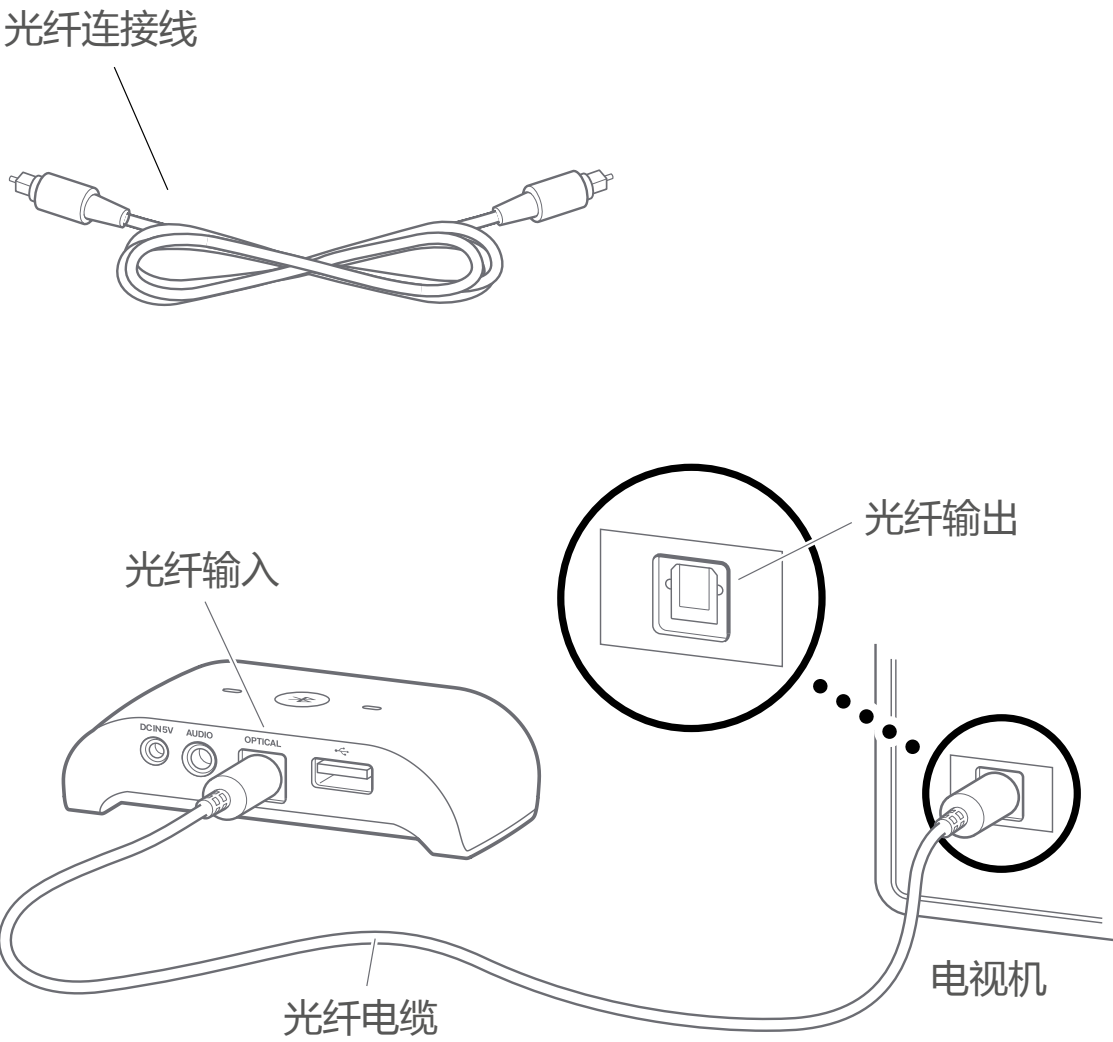

第 2 步：连接电源线

- 1 将电源线的圆形插头连接到电视伴侣的后面对应的电源输入。
- 2 将电源线 USB 端连接到 Maxi Pro 电源适配器。
- 3 将适配器插头安装到电源适配器并将其连接到电源插座上，电视伴侣的电源指示灯就会亮起绿灯。

注：您也可以通过将电源线 USB 端连接到电视 USB 端口来为其供电。但是，这可能会在重连期间听不到电视声音。

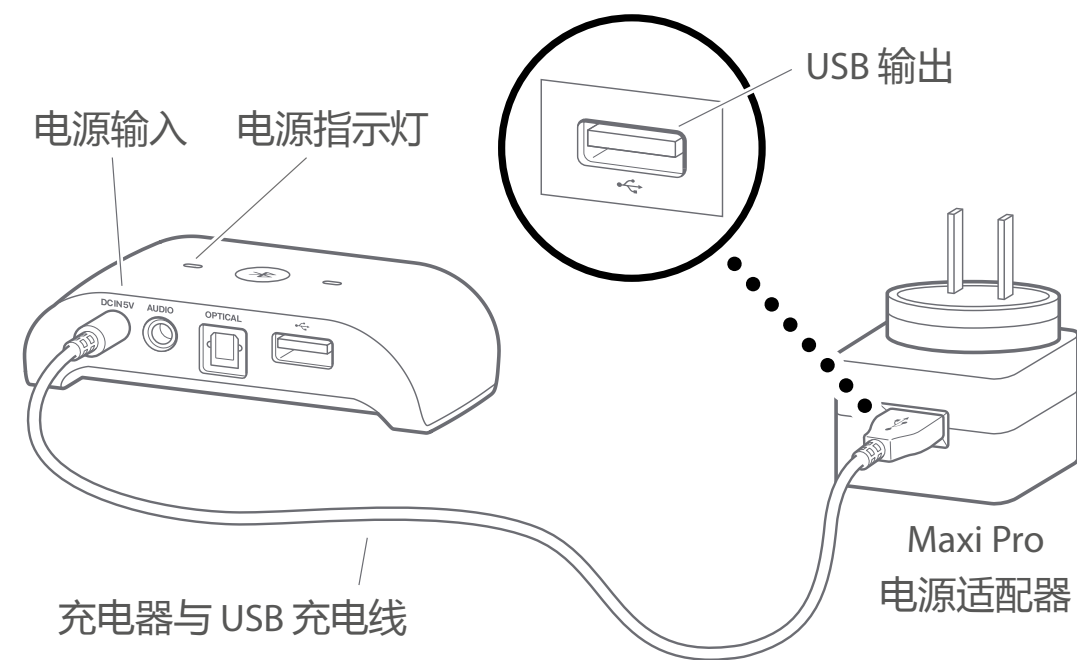

第 3 步：配对

注：如果购买来的 TV streamer 和 Maxi Pro 是在同一个包装盒内，则不需要再去配对。

- 1 在 TV streamer 端：按住蓝牙按键直到蓝色指示灯闪烁。
- 2 在 Maxi Pro 端：按下麦克风按键，然后按住蓝牙按键直到蓝色指示灯闪烁。
- 3 两盏蓝牙指示灯均将持续显示蓝色，这表明配对成功。

使用电视伴侣


只要您的电视伴侣连接着电源，它将会一直处于开机状态，当您回到蓝牙连接范围时将自动重连到您的 Maxi Pro。连接设备后，蓝牙指示灯都将亮起蓝灯。

注：如果您通过电视为您的电视伴侣充电，当您打开电视时，它将会自动开机并在 10 秒内重连到您的 Maxi Pro。

对 Maxi Pro 充电

您可使用电视伴侣对 Maxi Pro 进行充电：

- 1 将 Maxi Pro 充电线的 USB 端连接至位于电视伴侣背部的 USB 充电输出。
- 2 将另一端连接至以黄色标记的 Maxi Pro 充电器插孔。
- 3 充电时，Maxi Pro 电池指示灯闪烁绿色。在大约 3 小时后，将持续亮起绿灯，这表明已完全充好电。

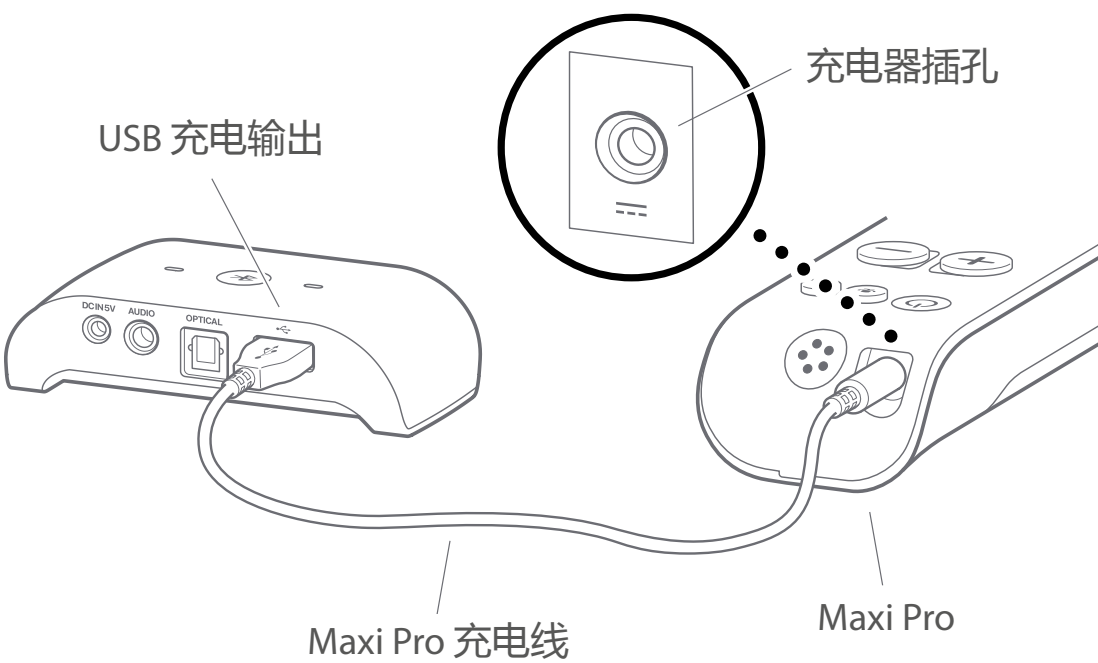

故障排除

可通过执行下方建议快速解决使用过程中出现的大多数问题。

问题	解决方法
按下蓝牙按键无反应。	• 确保 电视伴侣 已与电源连接，请见连接电源线。
戴上耳机未听到电视机的声音。	• 确保 Maxi Pro 在蓝牙连接范围内，并且与 电视伴侣 配对，请见配对。
当音频线连上耳机时，电视声音消失。	• 这是一些型号电视机的特点。 • 改用电视机上的 RCA 或光学输出，请见连接音频。

保养与维护

在温度始终介于 0° 和 35° C 之间的干燥环境中操作本产品。

使用一块柔软的无绒布清洁产品。避免开口进水。请勿使用玻璃清洁剂、家用清洁剂、气雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。

如果产品出现损坏迹象或者无法正常工作，请遵循本手册中的使用说明。如果产品依旧无法正常运行，请联系您当地的经销商，了解保养与质保信息。

DESIGN FOR EARS™

欧洲总部

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30,
436 32 Askim
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail info@bellman.com

亚太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区环市东路 339 号
广东国际大厦主楼 1401-06 室
邮编 : 510095
电话 : 020 8318 2950
传真 : 020 8333 5528
邮箱 : info.cn@bellman.com

© 2020 Bellman & Symfon AB, 保留所有权利。Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 的商标已为 Bellman & Symfon 注册。



微信公众号



Bellman官网