




BE1221-P02 Vibio Bed Shaker

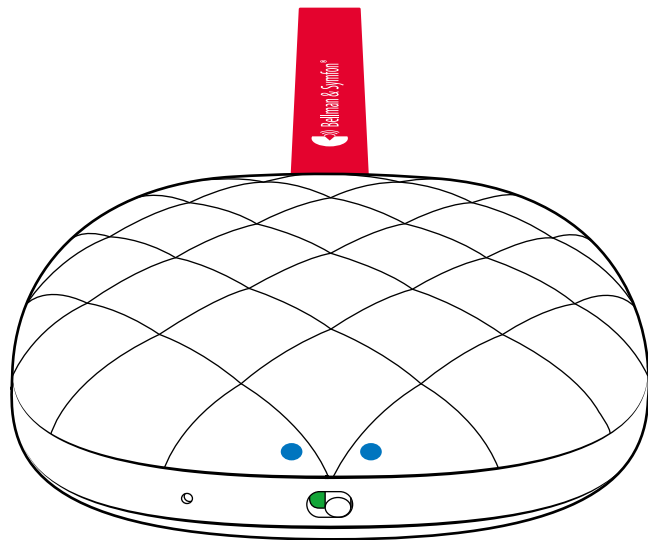

BE1221-P02 Vibio Bed Shaker

4	User manual
14	Bedienungsanleitung
24	Brugervejledning
34	Manual del usuario
44	Käyttöopas
54	Mode d'emploi
64	Manuale d'uso
74	Gebruikshandleiding
84	Brukermanual
94	Instrukcja obsługi
104	Bruksanvisning
114	Používateľská príručka

EN

DE

DK

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

SE

SK

Läs detta först

Den här broschyren innehåller anvisningar om hur du använder och underhåller din nya Vibio sängvibrator. Läs igenom den här broschyren noggrant, inklusive avsnittet

Varningar. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta din audionom.

Om BE1221-P02 Vibio sängvibrator

Avsett syfte

Det avsedda syftet med sängvibratoren Vibio är att väcka och varna döva och hörselskadade personer för ett inställt larm.

Funktionsprincip

Vibio sängvibrator placeras vanligtvis under kudden eller madrassen och larmet ställs in i Vibios applikation för mobiltelefoner. När larmet går vibrerar sängvibratoren under kudden eller madrassen för att väcka användaren. När larmet har ställts in fungerar sängvibratoren självständigt.

Avsedd användargrupp

Den avsedda användargruppen består av personer i alla åldrar med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet som behöver ljud-, syn- eller känsel förstärkning.

Avsedd användare

Den avsedda användaren är en person med mild till svår hörselnedsättning eller dövhet.



Enheten kommer inte att återställa normal hörsel och kommer inte att förhindra eller förbättra en hörselnedsättning eller dövhet som beror på organiska tillstånd.


Välkommen!

Det här behöver du

- En mobiltelefon med iOS 15, Android 8 eller senare.
- En USB-nätadapter

I förpackningen


- 1 Laddningskabel
- 2 Vibio sängvibrator

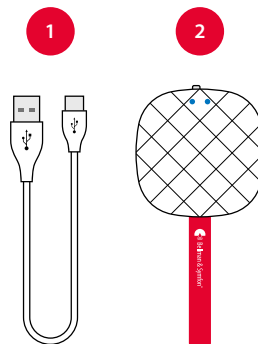

BE1221-P02 Vibio sängvibrator

Så tolkar du lysdioderna

- Vitt betyder att Vibio är aktiverad eller kommunicerar med din mobil.
- Blått betyder att Vibio är klar att anslutas.
- Grönt betyder att Vibio laddas.
- Gult betyder att du får ett samtal eller meddelande.
- Rött betyder att batterinivån är låg.

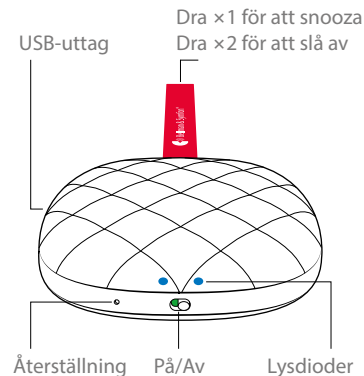


Installera Vibio

1 Ladda Vibio

Anslut laddningskabeln till Vibio och en USB-nätadapter eller en dator för att ladda den.

2 Slå på Vibio

Starta Vibio med På/Av-knappen och se till att den är inom mobilens räckvidd.

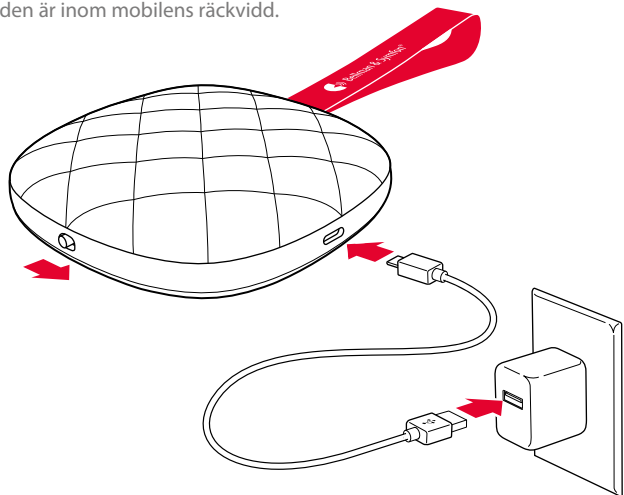

3 Installera appen



Ladda ner **Vibio**-appen från App Store® eller Google Play™ och följ anvisningarna för att komma igång.



Använda appen

Hantera alarm



Nytt alarm. Tryck på Plus-knappen för att skapa ett alarm.



Redigera. Tryck på pennsymbolen för att redigera ett alarm.



Radera. Tryck på minus-knappen för att ta bort ett alarm.



På/Av. Tryck på På/Av-knappen för att aktivera eller inaktivera ett alarm.

Kontrollera anslutning



Anslutning. Vibiosymbolen visar om Vibio är ansluten till mobilen.




Batteri. Batterisymbolen visar aktuell batterinivå för Vibio.

Mer information



Hjälp. Tryck på Meny > Hjälp för att lära dig mer om appen.

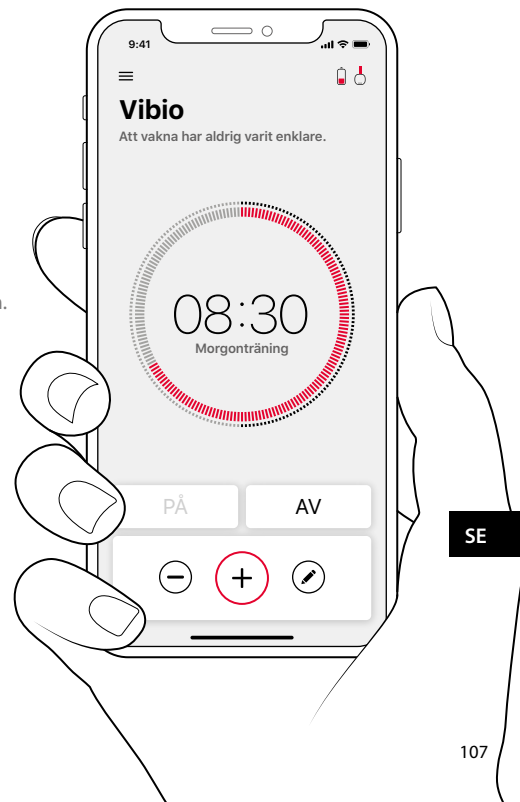

Allmänna varningar

Detta avsnitt innehåller viktig information om säkerhet, hantering och användning. Behåll denna broschyr för framtida bruk. Om du bara installerar enheten måste denna broschyr ges till hushållsägaren.



Varningar för farliga ämnen

- Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till brand, elektriska stötar eller andra personskador eller skador på enheten eller annan egendom.
- Förvara enheten oåtkomligt för barn under 3 år.
- Tänk på att larm och notiser kan utebli om batterierna tar slut.
- Använd eller förvara inte enheten i närheten av värmekällor, t.ex. öppen eld, element, ugnar eller andra enheter som alstrar värme.
- Använd endast strömadaptrar och batterityper som anges i denna broschyr.
- Skydda kablarna från alla potentiella skadekällor.
- Enheten får inte demonteras; det finns risk för elektriska stötar. Om enheten manipuleras eller demonteras upphör garantin att gälla.
- Denna enhet är endast avsedd för inomhusbruk. Enheten får inte utsättas för fukt.
- Skydda enheten mot stötar under förvaring och transport.
- Lämna endast in en skadad eller felaktig produkt till kvalificerad service.



Information om produktsäkerhet

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till skador på enheten och att garantin upphör att gälla.
- Batterierna får inte utsättas för eld eller direkt solljus.
- Tappa inte enheten. Om du tappar den på en hård yta kan den skadas.
- Använd inte enheten i områden där elektronisk utrustning är förbjuden.
- Om en allvarlig incident inträffar i samband med denna enhet ska du kontakta tillverkaren och relevant myndighet.
- Om du stöter på andra problem med din enhet ska du kontakta inköpsstället, ditt lokala Bellman & Symfon-kontor eller tillverkaren. Besök bellman.com för kontaktinformation.
- Uppladdningsbara batterier ska laddas helt innan enheten används för första gången. Ladda endast batterierna i en temperatur mellan 0°- 35° C.
- Laddningsbara batterier får endast bytas av Bellman & Symfon eller av en auktoriserad serviceverkstad. Det finns risk för explosion om batterierna inte byts ut på rätt sätt.
- Denna enhet får inte användas på flygplan utan särskilt tillstånd från flygpersonalen.

Alternativ för konfiguration

Denna sängvibrator kan användas med följande modeller av mobiltelefoner och operativsystem:

- iPhone 6S och senare eller moderna Android-enheter
- iOS15 eller Android 8 och senare.

Driftförhållanden

Använd enheten i en torr miljö inom de temperatur- och fuktighetsgränser som anges i denna broschyr. Om produkten blir våt eller utsätts för fukt ska den inte längre betraktas som tillförlitlig och ska därför bytas ut.

Rengöring

Koppla bort alla kablar innan du rengör din enhet. Använd en mjuk, luddfri trasa. Undvik att få in fukt i öppningarna. Använd inte hushållsrengöringsmedel, aerosolsprayer, lösningsmedel, alkohol, ammoniak, slipmedel eller tryckluft.

Service och support

Om produkten verkar vara skadad eller inte fungerar som den ska ska du följa anvisningarna i bruksanvisningen och denna broschyr. Om produkten fortfarande inte fungerar som avsett kontaktar du din lokala audionom för information om service och garanti.

Garantivillkor

Bellman & Symfon garanterar att denna produkt (exklusive batteriet) under två (2) år från inköpsdatum mot eventuella defekter som beror på felaktigt material eller utförande. Denna garanti gäller endast under normala användnings- och serviceförhållanden och omfattar inte skador till följd av olyckshändelse, försummelse, felaktig användning, obehörig demontering eller kontaminering, oavsett orsak.

Denna garanti omfattar inte oförutsedda skador eller följdskador. Garantin omfattar inte heller naturkatastrofer som brand, översvämning, orkaner och tornados. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av oförutsedda skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge en underförstådd garanti gäller, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig. Denna garanti är ett tillägg till dina lagstadgade rättigheter som konsument. Ovanstående garanti får inte ändras annat än skriftligen och undertecknat av båda parter.

Symbolförklaring



Anger att enheten är en medicinteknisk enhet.



Anger en bärare som innehåller information om unik identifiering av enheten.



Anger att produkten inte får kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.



Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinteknisk enhet kan identifieras.



Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska enheten kan identifieras.



Anger tillverkaren av den medicintekniska enheten.



Denna symbol anger att användaren bör läsa bruksanvisningen.



Denna symbol anger att försiktighet är nödvändig vid användning av enheten eller kontrollenheten i närheten av där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att operatören är medveten om eller vidtar åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser.



Att identifiera en plats där information kan hittas, särskilt i en nödsituation.



Anger de temperaturgränser som den medicintekniska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.



Anger det luftfuktighetsintervall som den medicintekniska enheten kan exponeras för på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer

Om	Gör så här
Lysdioderna blinkar rött	Batterinivån är låg. Ladda Vibio med den medföljande laddningskabeln.
Lysdioderna är släckta	Batteriet har tagit slut. Ladda vibio i ca 1,5 timme.
Vibio kan inte ansluta till min mobil	Börja med att kontrollera Bluetooth-anslutningen på appens hemskärm. Om Vibiosymbolen är röd och överstruken, prova att: 1 Flytta inom räckvidd. Flytta din mobil närmare Vibio. 2 Slå På/Av Bluetooth. Svep för att öppna Kontrollcenter / det kompakta inställningsfältet och tryck på Bluetooth-symbolen. Om det fortfarande inte fungerar, kan du behöva återställa Vibio: 1 Avsluta appen. Notera att det inte räcker att stänga appen. 2 Koppla ifrån Vibio. Gå till Inställningar > Bluetooth. Tryck på ⓘ / ⓘ och "Glöm den här enheten" för att ta bort Vibio. Säkerställ att Bluetooth är på. 3 Återställ Vibio. Dra och håll i snoozebandet tills lysdioderna börjar flimra. Släpp och dra igen tills lysdioderna börjar pulsera. 4 Anslut Vibio. Öppna Vibio-appen och följ anvisningarna.

Överensstämmelse

Härmed försäkrar Bellman & Symfon att denna produkt i Europa överensstämmer med de väsentliga kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 och direktivet om radioutrustning 2014/53/EU. Den fullständiga texten till försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Bellman & Symfons webbplats bellman.com.

Tekniska specifikationer

Mått	27 × 94 × 94 mm
Vikt	153 g
Ström och batteri	Batterikapacitet: 1 × 3.7 V AA Litiumjon Strömförbrukning: < 1000 mA, vilande: < 100 µA Drifttid: Upp till 40 dagar per laddning Laddningstid: Upp till 1,5 timmar @ 500mA Laddningsström: Upp till 500 mA, 5V DC
Kablar och anslutningar	Sladdlängd: 1 m Kontakter: USB-typ A till USB Micro-B
Kompatibilitet	iOS15 / Android 8 och senare iPhone 6s och senare / moderna Android-enheter
Frekvens och räckvidd	■ Bluetooth® frekvens: 2402 MHz ■ Uteffekt: Max 2,5 mW (4dBm) ■ Täckning: Upp till 30 m, fritt fält ■ Anslutningar: Bluetooth® 5
Temperatur under transport och förvaring	-10° till 50° C
Temperatur under drift	0° till 35° C
Luftfuktighet under drift	15 % till 95 %, icke-kondenserande
Atmosfäriskt tryck under drift, transport och förvaring	700 hpa till 1060 hpa
I lådan	■ BE1221-P02 Vibio sängvibrator ■ USB-laddningskabel

UKRP

Bellman & Symfon UK Limited
The Tack Room, Rectory Farm
Offices, Warmington,
Peterborough, PE8 6UT, UK



Audiocare AG
Eichenweg 1, CH-4410 Liestal
Switzerland



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com



Revision: BE1221_019MAN3.0

Date of issue: 2024-11-14

TM and © 2024 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.