




BE1221 Vibio Bed Shaker

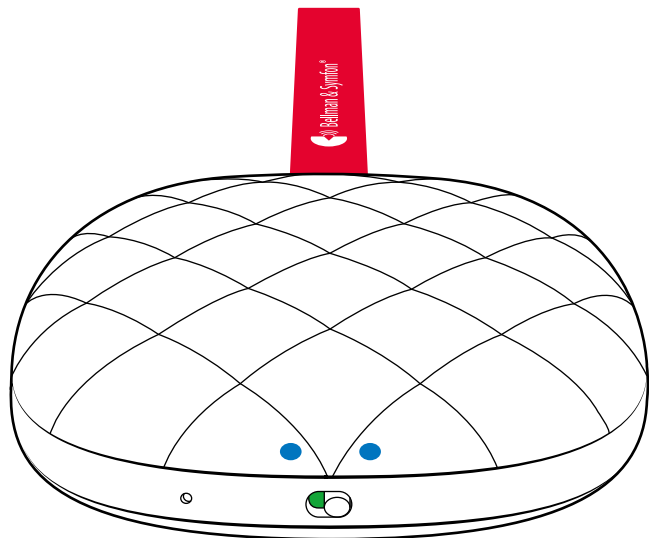

BE1221 Vibio Bed Shaker

- 4 User manual
- 12 Manual del usuario
- 20 Manuel d'utilisation
- 28 用戶手冊
- 36 用戶手冊
- 44 ユーザーマニュアル

EN

ES

FR

CN_{SI}

CN_{TR}

JP

請先閱讀此內容

本手冊指導您如何使用和維護新的 無線振動器 Vibio。請務必仔細閱讀本手冊，包括警告部分。如果您有其他問題，請聯絡 Bellman 當地辦事處或經銷商。

關於 BE1221 無線振動器 Vibio

操作原理

無線振動器 Vibio 通常放置在枕頭或床褥下，透過 Vibio 手機應用程式設置警鐘。當警鐘響起時，無線振動器將在枕頭或床褥下震動來喚醒使用者。設置警鐘後，無線振動器將能獨立運作。

預定使用者群體

預定使用者是指希望接收增強信號的人士。

預定使用者

預定使用者群體包括各年齡層人士。



裝置的設計將不會恢復正常聽力，也不會預防或改善器官性疾病所引起的聽力損傷或失聰。


歡迎使用

您還需要

- iOS15/Android 8 或更高版本的手機
- USB 適配器

包裝盒內含有


- 1 充電線
- 2 無線振動器 Vibio

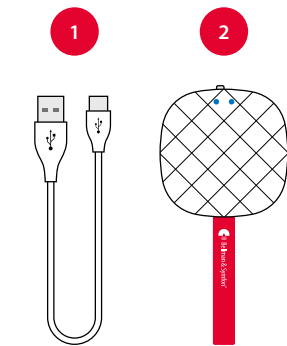

BE1221 Vibio 無線振動器

指示燈閃爍狀態

- 白色表示鬧鐘已激活，或正在與您的手機通信
- 藍色表示已準備好配對
- 綠燈閃表示正在充電
- 黃色表示您有來電或訊息
- 紅色表示電池電量低

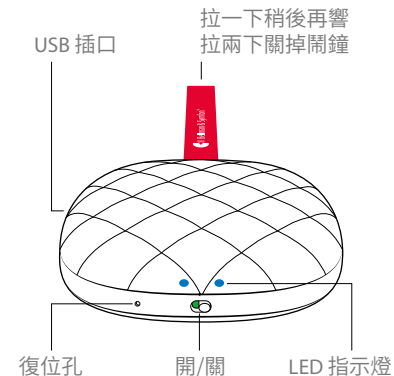


安裝 Vibio

1 充電

連接充電線到您的 Vibio，並將充電線插入 USB 電源適配器或 USB 電腦插座。

2 打開開關

將開關滑到右側開機，然後將 Vibio 靠近手機。

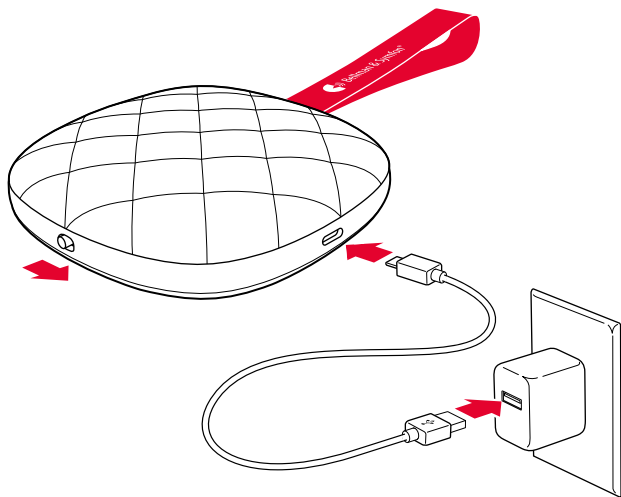

3 安裝應用程式



從 App Store® 或從 Google Play™、Bellman 中文官網下載 **Vibio** 應用程式，並按指示安裝。



使用應用程式

管理鬧鐘



新增。點一下加號按鈕可新增鬧鐘



編輯。按一下鉛筆按鈕可編輯鬧鐘



刪除。按一下減號按鈕可刪除鬧鐘



開/關。按一下「開」或「關」按鈕可啟用或禁用鬧鐘

監控 Vibio



連接。Vibio 圖標顯示連接狀態



電池。電池圖標顯示目前的電池電量

了解更多



幫助。點選「菜單」>「幫助」，以進一步了解該應用程式



重要安全資訊

本節包含有關安全、操作和使用的重要資訊。請保留本小冊子以便將來使用。如只安裝設備，請務必將此小冊子交給住戶。

⚠ 危險警告

- 不遵守這些安全指示或會導致火災、觸電、其他傷害，或引起設備或其他財產的損壞。
- 請將本裝置放在 3 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 請注意，如果電池電量耗盡，可能不會發出警報和通知。
- 請勿在任何熱源附近使用或儲存本裝置，例如明火、發熱板、焗爐或其他發熱設備。
- 只可使用本小冊子中指定的電源轉接器和電池類型。
- 保護電線免受任何潛在的損壞。
- 切勿拆卸設備，會有觸電危險。改動或拆卸設備將使保證無效。
- 本設備只供室內使用。請勿將裝置暴露於潮濕環境中。
- 在儲存和運輸過程中，請保護裝置免受撞擊。

- 只可將損壞或故障產品交給合格的維修人員處理。

❗ 產品安全資訊

- 如不遵守這些指示或會導致設備損壞，以及保證失效。
- 請勿將電池置於火中或陽光直射下。
- 請勿掉落你的設備。掉落在堅硬表面會造成損壞
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用該裝置。
- 如果你的裝置出現其他問題，請聯絡購買商號、當地的 Bellman & Symfon 辦事處或製造商。瀏覽 bellman.com 以獲得聯絡資訊。
- 首次使用裝置前，應先把可充電的電池充滿。請只在 0°– 35° C、32°– 95° F 之間的溫度下為電池充電。
- 充電電池只能由 Bellman & Symfon 或獲授權之服務中心更換。如果電池更換不正確，會有爆炸危險。
- 除非經航班人員特別允許，否則不得在飛機上使用此裝置。

配置選項

此無線振動器可與以下手機型號和作業系統搭配使用

- iPhone 6s 或以上型號或 Android 的設備
- iOS15 或 Android 8 或以上版本

使用條件

在乾燥環境中操作裝置，溫度和濕度不得超過本手冊規定的限制範圍。如果裝置受潮或暴露在潮濕的環境中，則不應再將其視為可靠的裝置，因此應予以更換。

清潔

清潔裝置之前，斷開所有電纜。使用柔軟的無絨布。避免開口受潮。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑。該裝置無需消毒。

服務與支援

如果裝置出現損壞或無法正常運作，請按照本手冊中的說明進行操作。如果產品仍然無法正常運作，請聯絡您當地的聽力保健專業人員，了解有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品（不包括電池）自購買之日起兩 (2) 年內不會因材料或工藝缺陷而出現任何問題。本保固僅適用於正常使用和服務條件，不包括因事故、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或無論何種原因造成的污染而造成的損壞。

本保證不包括意外和間接損壞。此外，保固

不涵蓋不可抗力，例如火災、洪水、颶風和龍捲風。本保固賦予您特定的法律權利，您也可能擁有因地區而異的其他權利。某些國家或司法管轄區不允許限制或排除意外和間接損壞，或限制默示保固的持續時間，因此上述限制可能不適用於您。

此保證是您作為消費者的法定權利的補充。除非雙方書面簽署，否則上述保證不得更改。

符號說明

 表示製造商的序號，以便識別特定裝置。

 表示產品的製造商。

 此符號表示使用者需要參考使用說明。

 此符號表示，於該符號所在位置附近的設備或控制裝置進行操作時，請小心處理，或當前情況需要操作員注意或採取行動，以免出現不良後果。

 確定可以找到資訊的地方，尤其是在緊急情況下。

 表示產品可以安全暴露的溫度限制。

 表示產品可以安全暴露的濕度範圍。

疑難排除

問題	解決方法
LED 指示燈閃爍紅色	電池電量低。使用隨附的充電線對 Vibio 進行充電。
LED 指示燈不亮	電池已耗盡。給 Vibio 充電約 1.5 小時。
Vibio 未連接到手機	請先檢查應用程式主畫面上的藍牙連接狀態。如果 Vibio 圖標為紅色並有刪除線，請嘗試以下操作： 1 在藍牙有效範圍內移動。將您的手機移動至更靠近 Vibio 的地方。 2 關閉藍牙後再開啟。滑動以開啟手機上的控制中心/快速設定面板，然後點按藍牙圖標。 如果仍然連接不上，您需要手動重設並重新連接 Vibio 無線振動器和應用程式。請嘗試以下步驟： 1 強制退出應用程式。請注意，僅關閉是不夠的。 2 Vibio 斷開連接。進入設定>藍牙。點選 Vibio 並點 ⓘ / ❏，忽略此設備/取消配對。請確認藍牙已經開啟。 3 重設 Vibio。拉住繩子不放，等藍色 LED 指示燈開始快速閃爍後，放開後再次拉住繩子，直到藍色指示燈亮起並緩慢閃爍。 4 設定 Vibio。再次啟動 Vibio 應用程式並按照指示操作。



網站

技術規格

尺寸	尺寸：27 x 94 x 94 公釐, 1.1 x 3.7 x 3.7 英吋
重量	重量：153 公克, 5.4 安士
電源和電池	電池電量：1x3.7 V AA 鋰離子電池 耗電量：< 1000 mA, 閒置：< 100 µA 使用時間：每次充電最多可使用 40 天 充電時間：500mA, 至 1.5 小時 充電電流：最高可達 500 mA, 5V DC
電線和連接	電線長度：1 公尺, 39 英吋 連接：USB type A 至 USB Micro-B
兼容性	iOS15 / Android 8 或以上版本， iPhone 6s 或以上型號 /Modern Android 設備
頻率和覆蓋範圍	■ 藍牙頻率：2400 – 2483.5 MHz ■ 輸出功率：最大 2.5mW (4dBm) ■ 覆蓋範圍：達 30 公尺, 33 碼, 空曠場地。 ■ 連接:Bluetooth® 5
運輸和儲存期間的溫度	-10° 至 50° C
運作期間的溫度	0° 至 35° C
運作期間的濕度	15% 至 95%、無冷凝
操作、運輸及儲存期間的大氣壓力	700 hpa至1060 hpa
產品包裝	■ BE1221 無線振動器 Vibio ■ USB 充電線



FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2APAKBE1221 **IC ID:** 6693A-BE1221

Bluetooth® certified

This device includes a Bluetooth module which has passed the BQB certificate. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Bellman & Symfon is under licenses.

Model, type and classification

The information is available at the back of the product.

Product disposal and recycling information

According to local laws and regulations, your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The recycling of your product will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Battery disposal information

The product contains batteries that according to local laws and regulations must be disposed of separately from household waste. Take used batteries to a collection point designated by the authorities.

执行标准

GB4943.1-2022

GB/T 9254.1-2021

GB17625.1-2022

CMIIT ID可在设备标签上找到

CMIIT ID 可在裝置標籤上找到

Bellman & Symfon North America Inc.

PO Box 1388, Morrisville,
North Carolina 27560, USA
Phone: (910) 239-5796
Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626



Bellman & Symfon Asia Ltd.

1401 & 1408, Laifung International Centre
33 Jie Fang Road South
Guangzhou, China
Phone: +86 20 8318 2950



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com

Revision: BE1221_151MAN3.0

Date of issue: 2025-01-08

TM and © 2025 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.