




BE9159 Neck Loop,
long cable

BE9161 Neck Loop,
short cable






Neck Loop

BE9159 / BE9161

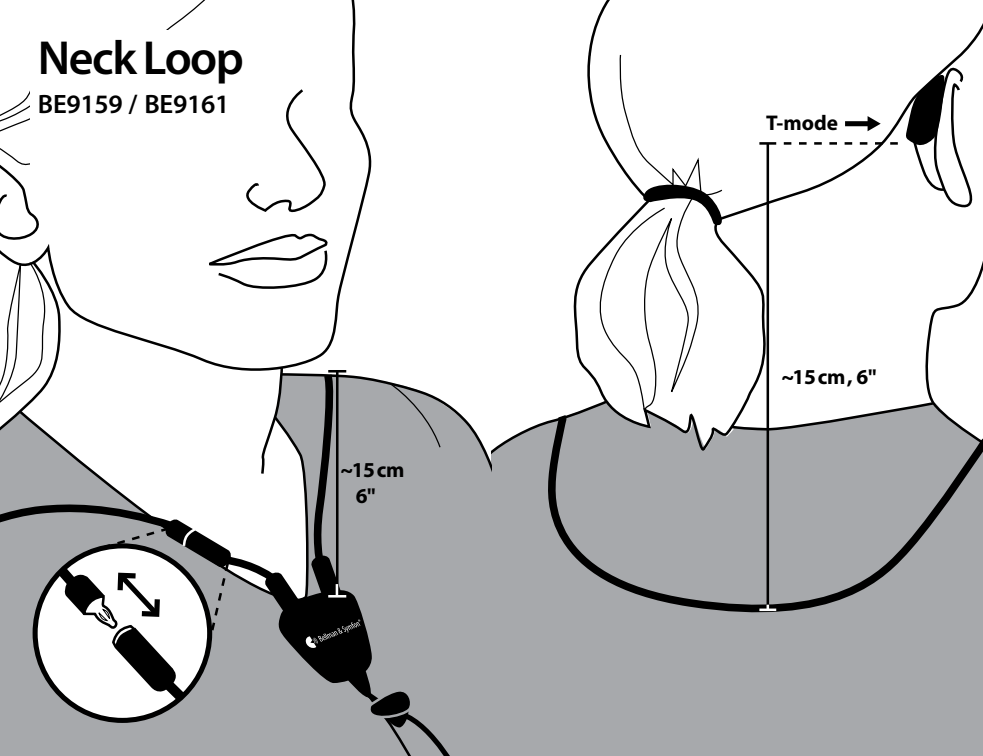

- EN** Use with Domino or Mino
- ES** Utilícelo con Domino o Mino
- FR** Utiliser avec Domino ou Mino
- JP** Domino または Mino と併用してください。
- CN_{SI}** 与Domino或 Mino 搭配使用
- CN_{TR}** 與 Domino 或 Mino 搭配使用

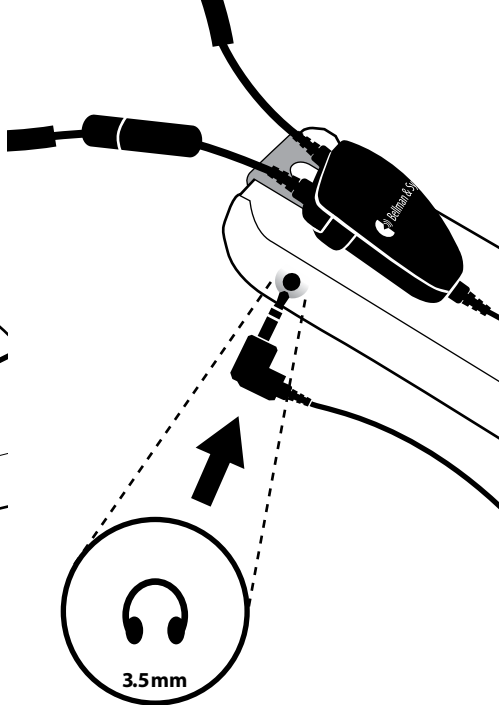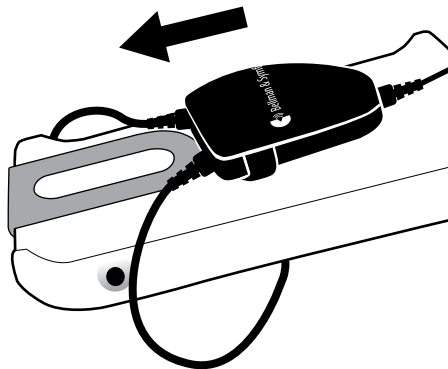

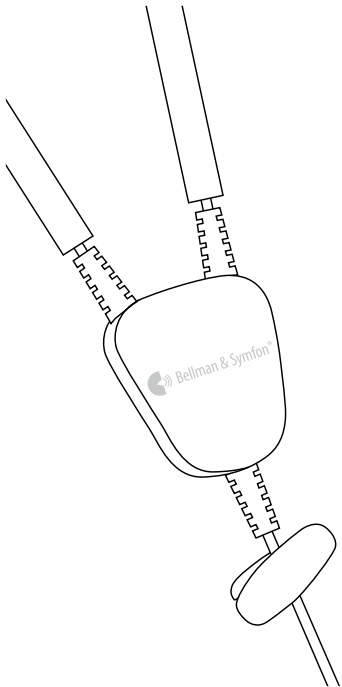

BE9159 Neck Loop, long cable
BE9161 Neck Loop, short cable

08 User manual

14 Manual del usuario

20 Manuel d'utilisation

26 用户手册

32 用户手册

38 ユーザーマニュアル

EN

ES

FR

CN_{SI}

CN_{TR}

JP

使用者資訊

- Bellman & Symfon 的此款頸圈適用於配備 Telecoil 的助聽器和個人交流器。
- 它針對 Maxi、Maxi Pro、Mino 個人交流器和 Domino 個人交流系統系統進行了功能優化。
- 環頸圈也可與智慧型裝置、電視、收音機或其他具備 3.5 mm 立體聲耳機插孔、專為低阻抗耳機設計的設備搭配使用。
- 它設計精巧且佩戴舒適，能夠輕鬆穿戴與襯衫衣領裡面。此外，它還整合了可拆卸的頸帶，可提高安全性。
- **重要!**如果您植入了起搏器，我們建議您在使用環頸圈前，先諮詢您的全科醫師或心臟專科醫師。



請先閱讀

本手冊指導您如何使用和保養您的環頸圈。請務必仔細閱讀本手冊，包括**警告**部分。如果您有其他問題，請聯絡當地經銷商。

關於 BE9159/BE9161 環頸圈

使用者群組

所有年齡層的人。

預期使用者

想要控制調音和聆聽音量的使用者。

操作原理

音訊產品系列包含數種放大器和聲音傳送器，這些產品都是特別為了在嚴苛的環境下仍能提供聲音強化效果而開發。根據特定放大器或聲音發射器的指定功能，可使用不同的麥克風來擷取直接聲音或增強環境聲音。



本裝置無法恢復正常聽力，也無法預防或改善由器質性病變造成的聽力損傷或耳聾。

一般警告

本節包含有關安全、處理和操作條件的重要資訊。請妥善保存本單張，以備日後使用。如果您只是安裝裝置，必須將此單張交給住戶。



危險警告

- 若未遵循這些安全說明，可能會導致火災、觸電或其他傷害，或損壞裝置或其他財產。
- 請勿讓 3 歲以下兒童接觸本裝置。
- 請勿在任何熱源附近使用或存放本裝置，例如明火、散熱器、烤箱或其他會產生熱力的裝置。

- 請勿拆卸本裝置，否則有觸電的危險。篡改或拆卸本裝置將導致保固失效。
- 本裝置僅供室內使用。請勿將本裝置暴露於濕氣中。
- 保護裝置在儲存和運輸過程中不受震動。
- 請勿對本裝置進行任何變更或修改。請僅使用 Bellman & Symfon 原廠配件，以避免任何電擊。
- 保護電纜，避免任何可能的損壞來源。
- 如果您植入了起搏器我們建議您在使用環頸圈前先諮詢您的全科醫師或心臟專科醫師。

產品安全資訊

- 不遵守這些指示可能會導致裝置損壞，並使保固失效。
- 請勿在禁止使用電子設備的區域使用本裝置。
- 本裝置只能由授權維修中心維修。
- 如果您的裝置遇到問題，請與購買點、當地的 Bellman & Symfon 辦公室或製造商聯繫。請造訪 **bellman.com** 以取得聯絡資訊。
- 請勿掉落您的裝置。掉落到硬表面可能會損壞裝置。

清潔

清潔裝置前，請先斷開所有連接線。請使用柔軟、不起毛的布。避免濕氣進入開口。請勿使用家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或研磨劑。本裝置不需要消毒。

服務與支援

如果裝置出現損壞或無法正常運作，請按照使用者指南和本單張的指示操作。如果產品仍無法正常運作，請聯絡您當地的經銷商，以取得有關服務和保固的資訊。

保固條件

Bellman & Symfon 保證本產品自購買日期起 90 天內，不會因材料或製造過程的錯誤而產生任何瑕疵。本保證僅適用於正常的使用和服務狀況，不包括因意外、疏忽、誤用、未經授權的拆卸或污染而造成的損壞，無論其原因為何。本保證不包括意外及間接損害。此外，保固不包括天災，例如火災、水災、颶風和龍捲風。本保證賦予您特定的法律權利，您可能擁有其他權利，這些權利因地區而異。某些國家或司法管轄區不允許限制或排除附帶或間接損害，或限制默示保證的期限，因此上述限制可能不適用於您。本保證是您作為消費者的法定權利的補充。除經本保證雙方簽署的書面文件外，上述保證不得更改。

符號說明

 **SN** 表示產品的序號，以便識別特定裝置。

 表示裝置製造商。

 此符號表示使用者需要參考使用說明。

 此符號表示在操作靠近符號位置的裝置或控制器時必須小心，或表示目前的狀況需要操作者注意或操作者採取行動，以避免不良後果。

 標示可以找到資訊的地方，尤其是在緊急情況下。

 表示裝置可安全暴露的溫度範圍。

 表示裝置可安全接觸的濕度範圍。

技術規格

環頸圈直徑 22 公分, 9 吋
重量 BE9159: 62 克, 2.2 盎司
BE9161: 58 克, 2 盎司

音頻線長度 BE9159: 90 公分, 3 吋
BE9161: 15 公分, 6 吋

連接器 3.5mm tele 插頭 (立體聲) 鍍金
90 度角接頭。
(頸環上的分離式連接器)。

負載阻抗 $2 \times 5 \Omega$

磁性輸出 1500mA/m @ 15 公分、6 吋距離
與 $2 \times 50\text{mW}$ 輸入訊號

操作 溫度: 0 至 35 °C, 32 至 95 °F
濕度: 15% 至 90, 非冷凝

組態 此環頸圈可與下列個人交流器
和個人交流系統搭配使用:

個人交流器

- BE2020 個人交流器 Maxi
- BE2021 個人交流器 Maxi Pro
- BE2030 個人交流器 Mino
- BE2210 Domino Pro 接收器

個人交流系統 ■ BE8005 個人交流系統
Domino Pro

盒內 BE9159 頸圈, 或
BE9161 領圈

CNTR

Bellman & Symfon North America Inc.

PO Box 1388, Morrisville,
North Carolina 27560, USA

Phone: (910) 239-5796

Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626



Bellman & Symfon Asia Ltd.

1401 & 1408, Laifung International Centre
33 Jie Fang Road South
Guangzhou, China
Phone: +86 20 8318 2950



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com

Revision:
BE9159_062MAN1.0
Date of issue: 2025-03-21
TM and © 2025
Bellman & Symfon AB
All rights reserved.