

Visit Smart Hub

BE1310



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Einfache Einrichtung
Einstecken und verbinden

Bluetooth® - Technologie
Bis zu 30 m Betriebsbereich

Zusätzliche Sicherheitsbatterie
Arbeitet auch bei Stromausfall

**Automatische Wiederverbindung
mit dem System**
Mit einem klaren
Wiedererkennungssignal

Skandinavisches Design
Diskret und funktional

Verbindet Ihr Zuhause mit Ihren Hörgeräten

Der Visit Smart Hub ist eine drahtlose Kommunikationszentrale, die Ihr Zuhause mit Ihren Hörgeräten verbindet. Er hilft Ihnen die Türklingel oder das Telefon zu hören, wenn ein Angehöriger Ihre Hilfe benötigt oder der Rauchalarm ausgelöst wird.

Kompatible Streamer und Hörgeräte


Der Smart Hub benötigt separate Sender und ist kompatibel mit allen gängigen Streamern und deren entsprechenden Hörgeräten der namenhaften Hersteller. Ihr Hörgeräteakustiker berät Sie gerne hinsichtlich passender Modelle.

So funktioniert der Smart Hub

Wenn ein Visit Sender aktiviert wird, generiert der Smart Hub einen Alarmton, der direkt in Ihre Hörgeräte übertragen wird.

“Willkommen daheim“-Signal

Wenn Sie nach Hause kommen, wird der Smart Hub Ihre Hörgeräte automatisch wieder mit den Sendern in Ihrer Wohnung/Ihrem Haus verbinden (Voraussetzung: Ihr Streamer ist eingeschaltet). Dann werden Sie nach einigen Minuten einen Bestätigungston hören.

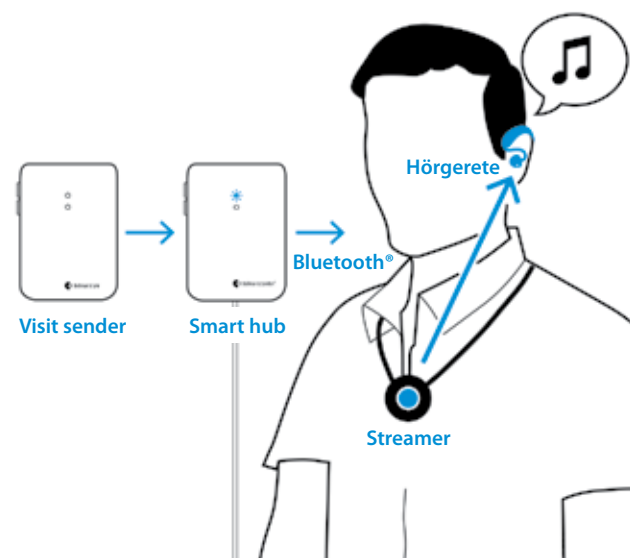

Technische Daten




Größe und Gewicht

- Höhe: **100 mm**
Breite: **65 mm**
Tiefe: **27 mm**
Gewicht: **120 g inkl. Batterien**



Tasten und Anschlüsse

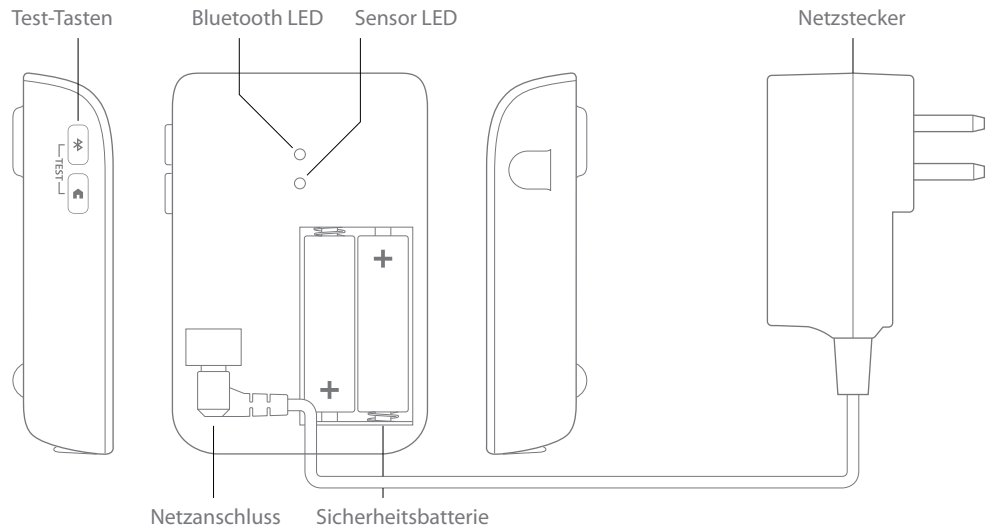

Frequenz und Reichweite

- Bluetooth®-Frequenz: 2400 – 2483,5 MHz
- Bluetooth®-Reichweite: Bis zu 30 m. Reichweite kann durch dicke Wände und große Objekte eingeschränkt werden.

Kompatibilität

- Visit Smart Hub ist kompatibel mit Bluetooth 2.1 (+ EDR) Geräten.

Stromversorgung und Batterien

- Netzstrom: 5,0 VDC, 300 mA
- Stromverbrauch: Aktiv < 50 mA, Ruhezustand < 6 mA
- Sicherheitsbatterien
Batterietyp: 2 x 1,5 V AA (LR6) Lithium- oder Alkaline-Batterie Betriebszeit: mind. 48 Stunden

Umweltbestimmungen

- Nur zum Innengebrauch.
- Raumtemperatur: 15°C – 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% – 95% (nicht kondensierend)

Montage

- Um die optimale Bluetooth® Reichweite sicherzustellen, installieren Sie den Smart Hub zentral in dem Raum, in dem Sie die meiste Zeit verbringen.

Aktivierung

- Über die Test-Tasten oder einen Visit-Sender

Wartung und Reinigung

- Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Fenster- oder Haushaltsreiniger, Sprühreiniger, Lösungsmittel, Alkohole, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Regulatorische Anforderungen

- Stimmt mit folgenden Anforderungen überein: CE, FCC, RoHS, A-Tick, WEEE, Der Grüne Punkt



Lieferumfang

- BE1310 Visit Smart Hub
- Netzteil
- 2 x 1,5V AA Alkaline-Batterien
- Velcro®-System zur Wandbefestigung
- Schrauben- und Dübelset
- Bedienungsanleitung



Unterstützte Sender

- BE1411 Visit Türsender
- BE1431 Visit Telefonsender
- BE1491 Visit Babyrufsender
- BE1420 Visit Druckknopfsender
- BE1480 Visit Rauchmeldesender

© 2018 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.
Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.