

环颈圈

BE9159/BE9161



 Bellman & Symfon®



特色

- 1 高输出功率
双通道输出
- 2 安全分离式扣位
避免意外勒伤
- 3 可更换软布管
舒适卫生
- 4 喷涂软胶外壳
增加触感上的舒适性
- 5 不易缠结的线材
容易处理
- 6 领带夹
可以定位在适当的位置
- 7 镀金插头
避免腐蚀

让助听器更好用

Bellman & Symfon 的环颈圈与 3.5 毫米立体声接口配套使用。将它连接到语音放大器、手机、电脑、平板电脑上，并将听筒切换到“T”档模式。环颈圈轻便舒适，可以穿在衬衫下面。

技术规格

- 颈带长度 70 厘米
- BE9159 电线长 90 厘米
- BE9161 电线长 15 厘米
- 领口直径 22 厘米

尺寸规格

- 长度 3.4 厘米
- 高度 3.8 厘米
- 厚度 1.4 厘米
- 重量 60 克

输出

- $\geq 1700 \text{ mA/m}$ @ 15 cm 距离和 $2 \times 50 \text{ mW}$ 输出信号


输入

- 3.5 毫米（立体声）镀金插头，90 度角连接器
- 阻抗: $2 \times 5 \text{ ohm}$





技术规格

频率反应 (量表参考: -20 dB ~ 0.1 A/m)

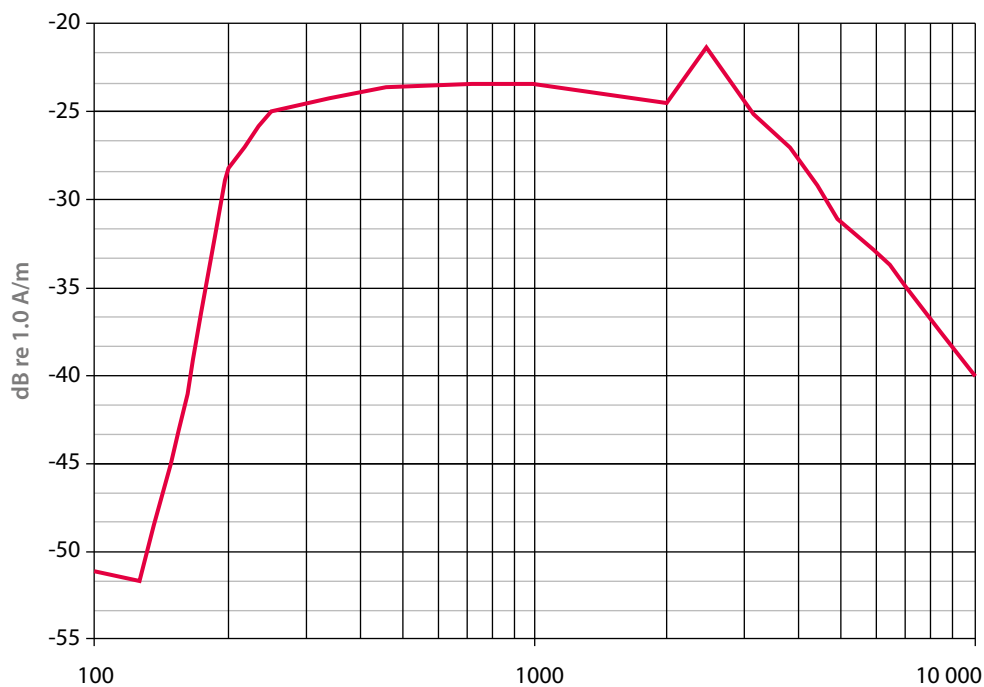

BE9161与 Domino 或 Mino 配套使用

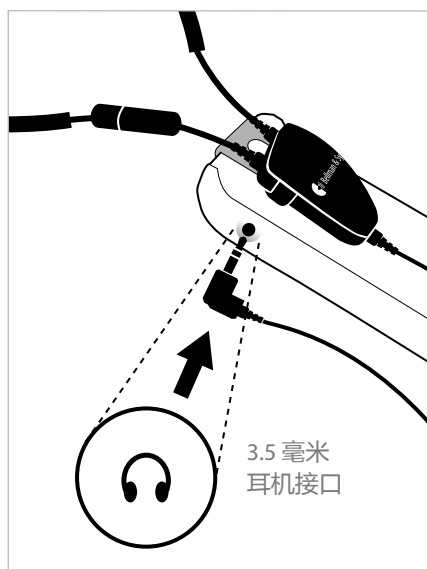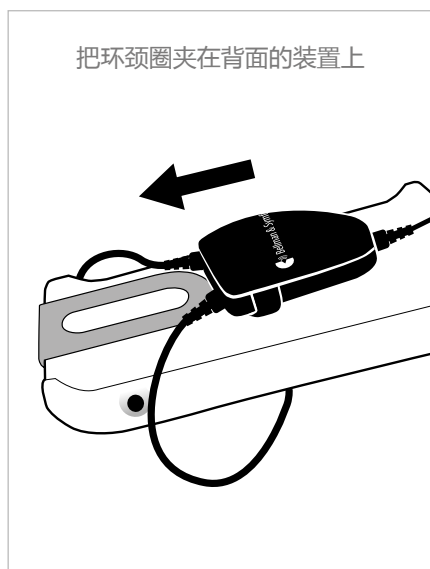

© 2018, Bellman & Symfon AB. All rights reserved.

Bellman, Bellman & Symfon and the Bellman & Symfon logo are registered trademarks of Bellman & Symfon AB. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE9159_BE9161_001DAS008

bellman.com