

Visit Telefon-Sender

BE1432



Bleiben Sie mit Ihren Liebsten in Kontakt.

Der Visit Telefon-Sender ist Teil des Visit Smart Home Systems, das Menschen mit Hörminderung bei diversen Ereignissen in ihrem Zuhause benachrichtigt.

Er bietet eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone und unterstützt Messenger-Dienste wie Skype, WhatsApp, usw. Dies macht es einfacher denn je, in Verbindung zu bleiben. Der Visit Telefon-Sender wird über eine einfach zu bedienende App gesteuert. Diese ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Neben dem Smartphone kann der Telefon-Sender auch wie gewohnt das Festnetztelefon erkennen und mit einer Alarmtrittmatte, Magnetschalter oder einer vorhandenen Türklingel (galvanisch) verbunden werden.

Laden im
 **App Store**

JETZT BEI
 **Google Play**

 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Bluetooth 5

Bis zu einer Entfernung von 50 m

Smartphone-Anbindung

Benachrichtigungen bei Anrufen und Textnachrichten

Messaging-App Unterstützung

Arbeitet mit WhatsApp, Skype usw. zusammen

Festnetztelefon-Unterstützung

Kabel und Adapter im Lieferumfang enthalten

App-Steuerung

Für iOS und Android verfügbar



Technische Daten




Maße und Gewicht

- Höhe: **100 mm**, 4.0 Zoll
Breite: **65 mm**, 2.6 Zoll
Tiefe: **27 mm**, 1.1 Zoll
Gewicht: **120 g**, 4.2 oz. (inkl. Batterien)



Tasten und Anschlüsse

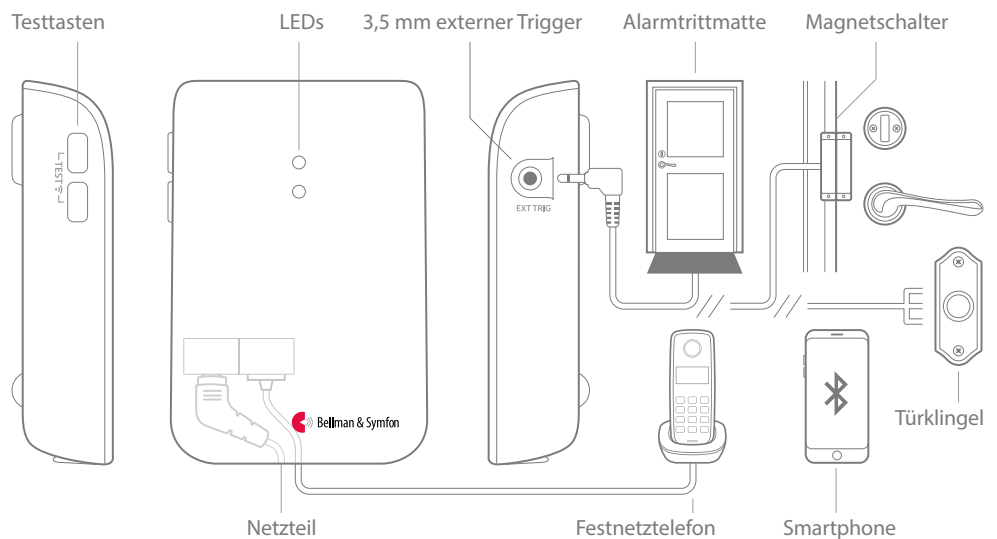

Eingänge

- RJ11 Anschluss für analoges Telefonnetz
- 3,5 mm externer Triggereingang für Zubehör
- Netzteilbuchse
- Bluetooth 5.0

Aktivierung

- Smartphone über Bluetooth
- Testtasten
- Festnetztelefon
- Ext. Triggereingang für Zubehör: z.B. Alarmtrittmatte, Magnetschalter, galvanischen Anschluss an die Türklingel.

Umgebungsbedingungen

- Nur für den Innenbereich geeignet
- Temperatur: 0° – 35° C, 32° – 95° F
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% -95% (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: bis 250 m
- Bluetooth-Frequenz: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth-Reichweite: bis 50 m

Kompatibilität

- Ab iOS11 | ab Android 4.4
- iPhone 6S | moderne Android Geräte

Strom und Batterie

- Netzspannung: 5 V DC / 1000 mA
- Ausfall-Batterien: 2 x 1.5 V AA Alkaline-Batterien

Frequenzbänder

- 64 Bänder standardmäßig.
Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger.
- Nicht wiederverwendbar.

Gesetzliche Anforderungen

- Entspricht den folgenden Anforderungen: CE, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne Punkt



Lieferumfang

- BE1432 Visit Telefon-Sender
- Netzteil
- 2 x 1,5V AA Alkaline-Batterien
- RJ11 Anschlusskabel und TAE-Adapter
- Schrauben und Dübel, Klettband zur Befestigung
- Erste Schritte Anleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9023 Magnetschalter
- BE9026 Alarmtrittmatte
- BE9253 Externes Trigger Kabel (3.5 mm Anschluss)

© und TM 2019, Bellman & Symfon AB

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken von Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Alle Produktdesigns sind patentiert. Dieses Merkblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1432_032DSH001_DE

bellman.com