

产品目录 听力解决方案





让您和您爱的人 倍感安心

对于听障人士来说，普通人习以为常的小事往往会演变成不小的挑战，比如说听见门铃声。
而如今，这样的挑战有了应对的方案，您的听力问题可以通过很多种途径得到提高。瑞典贝尔曼 Bellman & Symfon 不仅提供居家的提醒方案，而且能帮助您在餐桌上轻松加入谈话之中。
在此，您可以更详细地了解这些解决方案。

独立使用产品

振动器和振动闹钟	3
----------	---

音频产品

概览	5
个人交流系统及个人交流器	7
配件	9

独立使用产品

振动器 和 振动闹钟

手机感应器

声音 闪光 振动

信号探测



BE9250/BE9251



产品描述

当有电话或者新资讯时，移动设备的屏幕亮起的光会触发手机感应器，您只需将它放在移动设备的屏幕上，并接上电话发射器或者闪光接收器即可。

光学感应	显示屏亮起即可触发
感光强度	可见性光源 > 3 勒克司 (lux)
连接头 (BE9250)	感应器插头：2.5 毫米插头 电源插头：3.5 毫米
电池 (BE9250)	1 颗 AAA 1.5 V 碱性电池 使用时间 > 1 年



Vibio 无线振动器

BE1221



产品描述

Vibio 是一款无线振动器，可通过蓝牙连接到您的手机。它带有一个适用于 iOS 和 Android 的免费应用程序。在 Vibio 应用程序中，您可以创建多个闹钟，选择振动功率并允许通过电话或消息进行通知。

强劲的振动	即使嗜睡者也可唤醒
蓝牙®	包含一个简单易用的 APP
智能提醒	手机来电和信息提醒
贪睡拉绳	贪睡或停止，只需轻拉
快速设置 不再忘记	可独立使用，无需连接手机



振动器

BE1270



产品描述

振动器能以强劲的振动唤醒酣睡的人，甚至是嗜睡者。把它连接上来访系列的接收器或者充电配件后放在枕头下即可。

强劲的振动	即使嗜睡者也能唤醒
防滑面壳	保持在原位
安全性高	低电压工作
线长	2 米
尺寸与重量	88 x 88 x 27毫米, 120 克



闹钟专业版

BE1370



产品描述

振动闹钟可以通过高频响亮的声音、高亮度的闪光和强劲振动来唤醒您。它使用方便且具有很多其他功能，如夜光圈、备用电池及电话连接口。

响亮的声音信号	铃声递增可超过100分贝
高亮度的闪光	四颗高亮度的LED灯
振动器	以强劲的振动唤醒您
备用电池	即使停电也能正常工作
尺寸及重量	121 x 92 x 108 毫米, 390 克



闹钟基础版

BE1350



产品描述

振动闹钟可以通过高频响亮的声音、高亮度的闪光和来自振动器的强劲振动来唤醒您。它具有清晰的显示表盘和人性设计的旋转调节按钮让时间和闹钟的调节变得更加方便。

响亮的声音信号	铃声递增可超过100分贝
睡眠振动器	以强劲的振动唤醒您
使用方便	大旋转调节按钮
背景灯照明	可调节亮度的背景灯
尺寸及重量	121 x 92 x 108 毫米, 390 克



听力系统 在嘈杂环境中听得更好

听力系统能帮助听障人士在嘈杂的环境下听得更好，比如在办公场所或者学校。即使您身处嘈杂的环境，它也能过滤掉噪音将清晰的声音传递给您，让您不必费力就可以听清周围人的讲话。

来自瑞典贝尔曼公司的听力系统不仅是全数码，而且能和助听器及人工耳蜗一起使用。我们除了提供个人交流器用于家庭聚会及看电视以外，也提供更加先进的可用于听讲座及开工作会议的个人交流系统。


在此，您可以浏览更多关于贝尔曼听力产品的信息。

个人交流系统 Domino

个人交流系统 Domino 由一个发射器和一个接收器组成。接收器(1)接收您身旁人的讲话声。只需它挂在脖子上或是放在您前方的桌子上。发射器(2)接收远距离的讲话声。把它放在桌子的另一端，或挂在您的同事、同学或是老师身上。


个人交流器 Maxi 和 Mino

个人交流器 Maxi 和 Mino 由单独一部配有内置麦克风的主机组成，您只需将它放在您前方的桌子上，根据自己的喜好调整音量，它就会将清晰而响亮的声音传递给您。您可以用耳机直接收听，如果您有佩戴助听器或者人工耳蜗，也可以用环颈圈将它们连接起来使用。

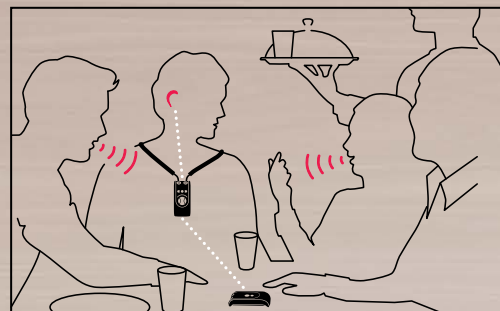

在餐厅

个人交流系统能帮助您们在嘈杂环境中听清言语声。

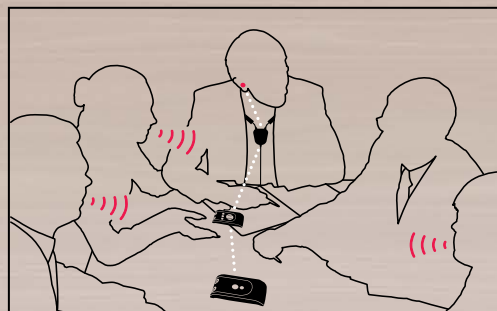


在公司

把发射器和接收器放在桌子的两端，就可以听清大家的谈话了。




在学校

请老师把发射器佩戴在脖子上，就能听清老师的讲课了。

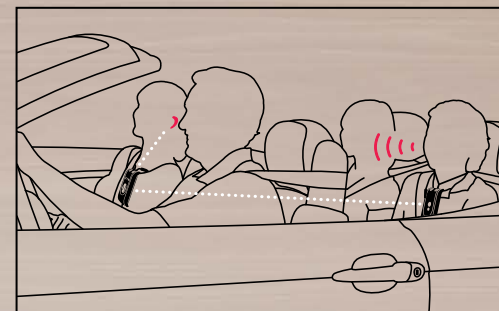

在车里

把发射器夹在同伴的衣服上，就可降低交通噪音。

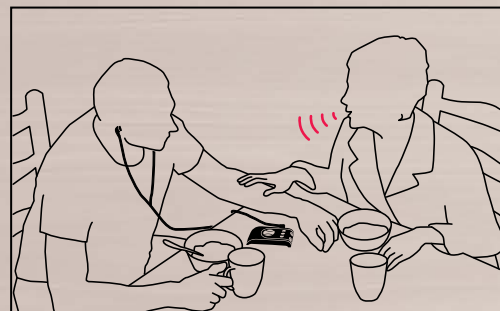

在家里

只需使用个人交流器，您的爱人就无需再提高音量或者不断重复说话内容了。



看电视

把发射器连到电视或收音机上，自由选择适合您的音量聆听，无需打扰到家人。



在药店

把发射器放在您前面的柜台上您就可以听到清晰的话语声而不会错过重要信息了。



在影剧院

在配有电感环绕场所的影剧院看表演，内置的电感功能可以让您听到更精彩的演出。



1



2



个人交流系统

发现听力改善的乐趣

个人交流系统 Domino Pro

BE8005



产品描述

Domino Pro 是一款全数码的个人交流系统，它能过滤掉嘈杂的背景噪音将清晰的言语声传递给您。产品包含了一个接收器，以及一个发射器。其中多项高级设置，如左右耳平衡调节等，可满足用户的不同需求。

麦克风	全向及定向
信号处理	16 位全数码
无线电路	2.4 GHz 无线传输
电池	可充电锂电池
尺寸及重量	99 x 48 x 22 毫米, 74 克 / 部



个人交流系统 Domino Classic

BE8020



产品描述

Domino Classic 是我们最经济实惠的个人交流系统，它使用数字信号处理技术过滤背景噪音并加强言语声。Domino Classic 包含了一个接收您周围声音的接收器，以及一个接收远距离声音的发射器。

麦克风	全向
信号处理	16 位全数码
无线电路	2.4 GHz 无线传输
电池	可充电锂电池
尺寸及重量	99 x 48 x 22 毫米, 74 克 / 部



个人交流系统 Maxi Pro

BE8054



产品描述

个人交流系统 Maxi Pro 是一款完善的聆听工具，可通过蓝牙连接到电视、手机和平板电脑。它包括一个个人交流系统 Maxi Pro 和一个电视伴侣。个人交流系统 Maxi Pro 可与普通头戴式耳机或入耳式耳塞以及助听器配合使用配。

麦克风	全向
信号处理	16 位全数码
内置电感功能	配有电感拾音圈的场所使用
电池	2 颗 AA 1.5V 碱性电池
尺寸及重量	140 x 45 x 27 毫米, 127 克



个人交流器

发现听力改善的乐趣

个人交流器 Mino

BE2030



产品描述

Mino 是一款数码型个人交流器，它可以便携地放进口袋里，是专为需要小型轻便的听力产品的用户设计的。您可以用耳机直接收听，如果您有佩戴助听器或者人工耳蜗，也可以用环颈圈将它们连接起来使用。

麦克风	全向及定向
信号处理	16位全数码
内置电感功能	在配有电感环绕系统的场所使用
电池	可充电锂电池
尺寸及重量	99 x 48 x 22 毫米, 74 克



个人交流器 Maxi

BE2020



产品描述

Maxi 是一款简单易用的数码型个人交流器，它专为视力不好而且手脚不灵活的听障人士设计。您可以用耳机直接收听，如果您有佩戴助听器或者人工耳蜗，也可以用环颈圈将它们连接起来使用。

麦克风	全向
信号处理	16位全数码
内置电感功能	在配有电感环绕系统的场所使用
电池	2颗AA 1.5V 碱性电池
尺寸及重量	140 x 45 x 27 毫米, 133 克



个人交流器 Response


（仅在指定国家区域销售）BE1053



产品描述

Response是我们一款最实惠的个人交流器。它轻巧、便携，专为一对一谈话而设计。电视连接线配件还可提升你收听电视的效果。Response有两个内置立体声麦克风接收声音，可与头戴式耳机或入耳式耳塞连接。

麦克风	两个全向麦克风
灵活性	可用于交流和收听电视等
轻巧	别在衣领或者腰带上
电池	一节AAA号电池最长使用时间可达100小时
尺寸及重量	65 x 43 x 16 毫米, 40克

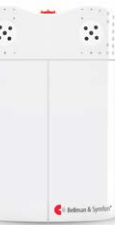

配件

完善您的解决方案

环颈圈

BE9159/BE9161



产品描述

环颈圈既轻便又舒适，而且高输出功率。只需将它连接到您的个人交流器或手机，然后把您的助听器到“T”档的位置即可。环颈圈有长版和短版两个型号可供选择。

高输出功率	双声道输出
软布管	干净舒适
不易打结的线材	容易处理
镀金插头	防氧化
线长	长版90 厘米，短版 15 厘米



Microset™ 耳麦

BE9129



产品描述

耳麦MicroSet™是一款专门为Mino设计的配件，它由一个隐蔽的领夹麦克风和 一个耳塞组成。将麦克风夹在您的衣领上，将Mino藏在口袋里，您的双手就可以做其它事情啦！

线长	95 厘米
连接头	3.5毫米立体声插头
麦克风	全向
重量	15 克
颜色	黑色



领夹麦克风

BE9127/BE9136

产品描述

延长麦克风不仅可以用于在会议上的远距离交谈，改善噪音环境下的收听效果。您还可以把它粘贴在电视喇叭附近，当用来收听电视的简易配件。

线长	5米（BE9127）1.5米（BE9136）
连接头	2.5毫米插头
麦克风	全向
重量	35 克
颜色	黑色



音频转换线

BE9126 / BE9137

产品描述

音频转换线可以把个人交流器或个人交流系统连接到电视机、DVD或立体声音响系统，即可享受高品质的立体声效果。音频转换线包括一条5米（BE9126）或1.5米（BE9137）的连接线和一个立体声莲花头转换头。

音频线长	5米（BE9126）1.5米（BE9137）
音频线插头	2.5和 3.5毫米的转换接口
转换线长	25 厘米
莲花转换插头	3.5毫米立体声插头
颜色	黑色



头戴式耳机

BE9122

下挂式耳塞

BE9125

产品描述

立体声耳机的耳套是半封闭式，音质清晰无杂音。单侧的耳机线十分人性化，而且很耐用。

频率范围	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω ± 10%
灵敏度	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
插头	3.5毫米立体声插头
线长	1.2 米



产品描述

下挂式耳塞可以传递高达140dB的音量，不仅配戴舒适，而且摘戴简单。

频率范围	800 - 3000 Hz
输出功率	124 dB SPL @ 1kHz, 50 mW
插头	3.5毫米立体声插头
重量	38 克
线长	1.5 米



入耳式耳塞

BE9124

电视连接线

BE9022

产品描述

立体声耳塞不但轻便且输出高清晰的音质，入耳式的耳套可以减少漏音，并很好地隔离环境中的噪音。

频率范围	20 Hz - 20 kHz
阻抗	16 Ω +/- 10%
灵敏度	104 dB/mW @ 1 kHz SPL
插头	3.5毫米立体声输出插头
线长	1.2 米



产品描述

电视连接线是一款专为Response设计的配件，可粘贴在电视喇叭附近，便可清晰地聆听电视声音了。也可以用于在会议上的远距离交谈，改善噪音环境下的收听效果。

线长	5米
连接头	3.5毫米插头+3.5毫米转接头
麦克风	全向
颜色	黑色





我们专注于听力事业

瑞典 Bellman & Symfon 贝尔曼公司一直为提高听障人士的生活品质而不断努力。我们的团队及合作伙伴与听力学家及顶尖专家紧密合作，致力于保护和改善您的听力。

欧洲总部

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan
30, 436 32 Askim
Sweden
Phone +46 31 68 28 20
Fax +46 31 68 28 90
E-mail: info@bellman.se

亚太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.
广东省广州市越秀区解放南路33号
丽丰国际中心1401,1408室
邮编: 510115
电话: 020 8318 2950
传真: 020 8333 5528
E-mail: info.cn@bellman.com



贝尔曼公众号



bellman.com