


Katalog Hörselhjälpmedel

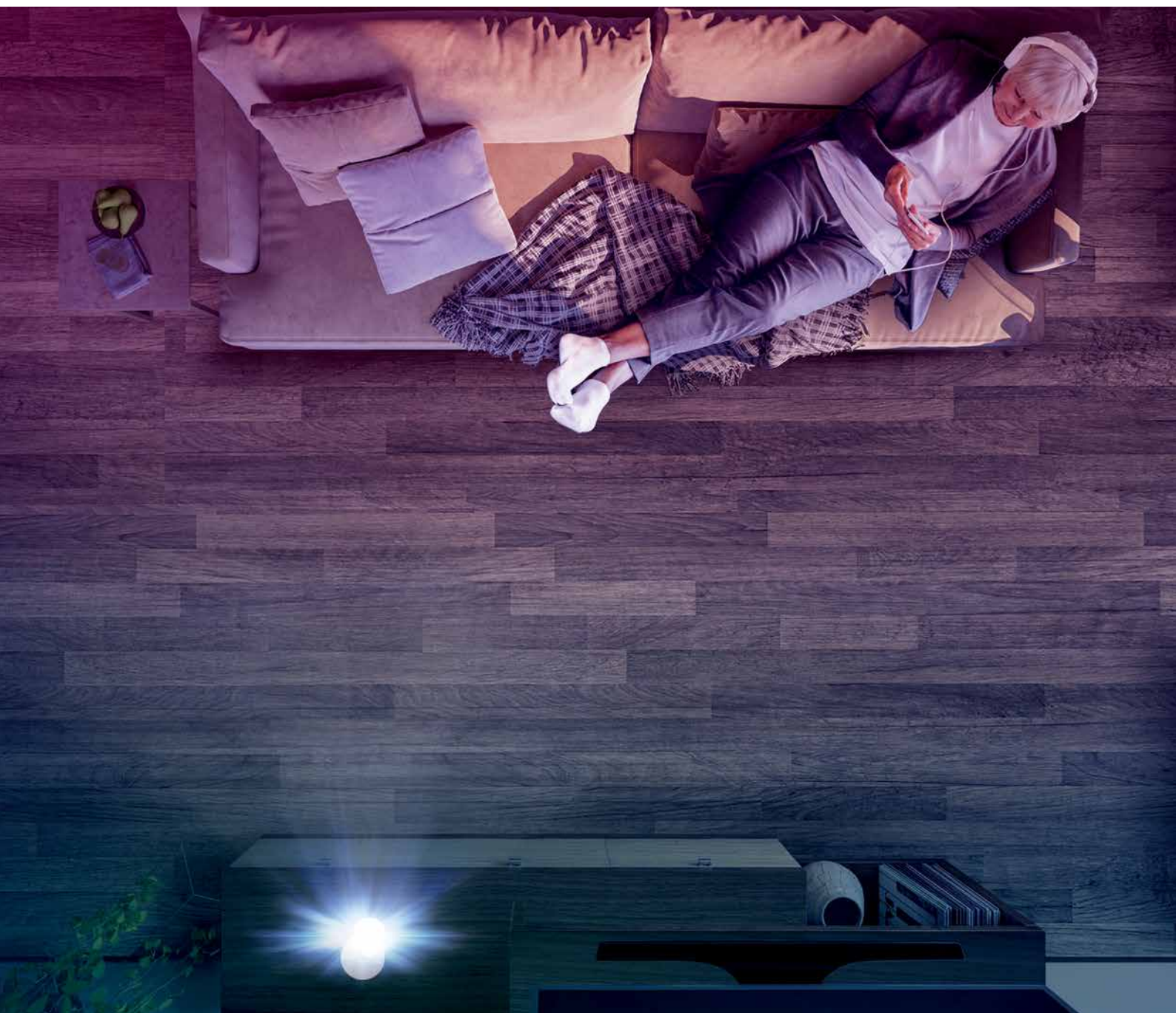

En enklare vardag för dig och din familj

När man börjar höra sämre kan företeelser som man förut tagit för givet, som t.ex att höra dörrklockan, bli en utmaning. Men det behöver inte vara så. Nu för tiden finns många hjälpmedel som gör vardagen med en hörselnedsättning enklare. Bellman & Symfon erbjuder en rad smarta lösningar som till exempel vibrerar när telefonen ringer eller förstärker ljudet i teven. Här kan du läsa mer om dem.

Varseblivningsprodukter

Översikt	3
Sändare	5
Mottagare	7
Tillbehör	9
Värdepaket	11
Fristående produkter	12

Lyssningshjälpmedel

Lyssningssystem	13
Samtalsförstärkare	14
System för TV-lyssning	14
Tillbehör	15
Light My Way	17



Visitsystemet

Uppfatta hemmets signaler

Visitsystemet hjälper dig som har svårt att höra signalerna i hemmet att uppfatta till exempel dörrklockan, telefonsignalen och brandlarmet. Att alltid veta när något händer ger en ökad trygghet för både dig och dina närmaste. Till höger kan du se hur Visitsystemets olika sändare och mottagare fungerar i ett typiskt hem.



1 Dörrsändare
Detekterar dörrklockan




2 Brandvarnare
Upptäcker rök och eld



3 Babyvakt
Vakar över barnen



4 Mobilsändare
Håller koll på dina mobila enheter

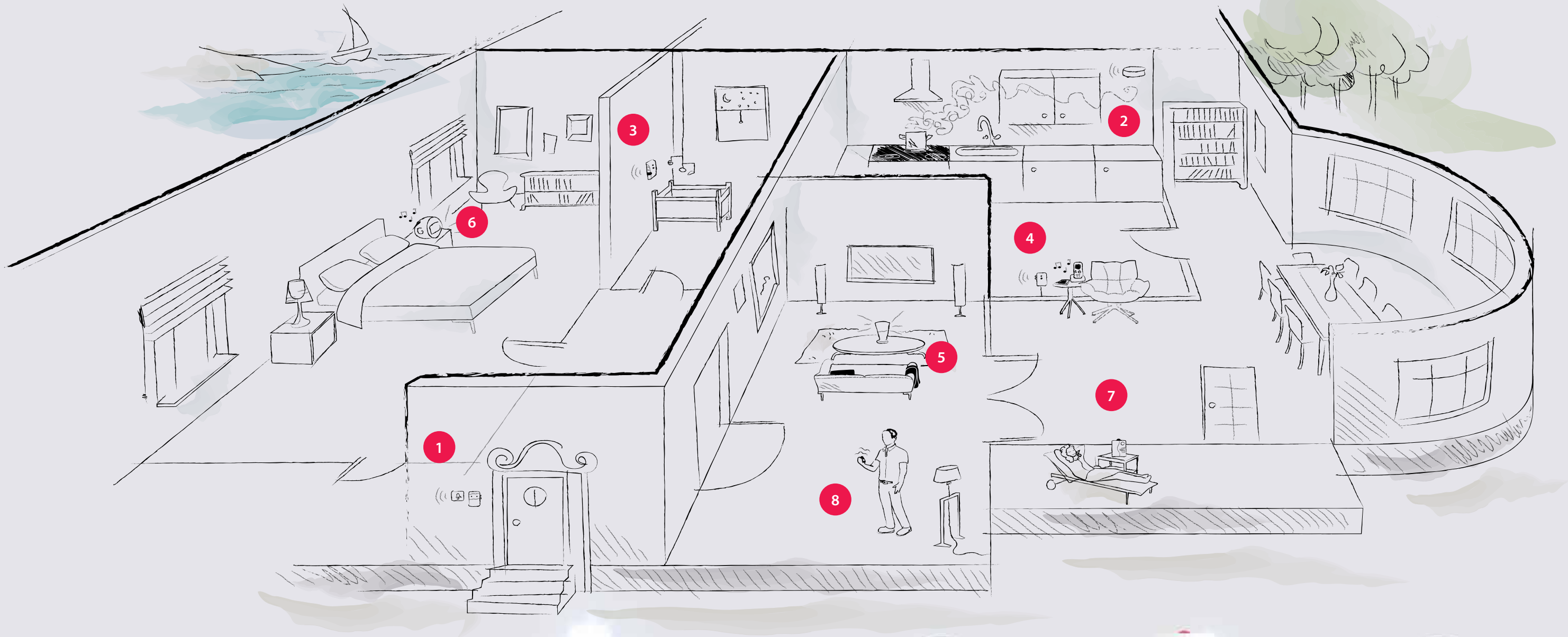

5 Blixtmottagare
Blixtrar med klart ljus



6 Väckarklocka
Använder ljud, ljus & vibrationer



7 Portabel mottagare
Avger en kraftfull ljudsignal



8 Pager
Använder milda vibrationer

Visitsändare

Diskreta, underhållsfria och lätta att sätta upp

Mobilsändare

BE1433



Beskrivning

Mobilsändaren ansluter Visitsystemet till din mobil, surfplatta och smartklocka via Bluetooth. Dessutom kommer dina Visitmottagare att ljuda, blixtra och vibrera vid inkommande mobilsamtal och meddelanden.

Bluetooth	Upp till 250 m räckvidd
Visitnotiser	På dina mobila enheter
Lättanvänd app	Finns för både iOS & Android
Flexibel	Stöd för en flera tillbehör
Mått och vikt	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Telefonsändare

BE1431



Beskrivning

Hjälper dig att uppfatta när den fasta telefonen ringer. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. Den kan också användas med t ex en trampoline eller magnetbrytare.

Säker radiolänk	Upp till 250 m räckvidd
Flexibel	Stöd för en flera tillbehör
Justerbar signal	Välj unik signal för varje telefon
Underhållsfri	Upp till 10 års batterilivslängd
Mått och vikt	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Dörrsändare

BE1411



Beskrivning

Dörrsändaren hjälper dig att uppfatta när det ringer på dörren. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. Den är programmerbar och kan lära sig att känna igen i stort sett alla dörrklockor.

Säker radiolänk	Upp till 250 m räckvidd
Flexibel	För dörrklocka och porttelefon
Tillförlitlig	Digital fingeravtrycksalgoritm
Underhållsfri	Upp till 10 års batterilivslängd
Mått och vikt	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Tryckknappssändare

BE1420



Beskrivning

Tryckknappssändaren fungerar som en trådlös dörrklocka. När någon trycker på knappen skickar den en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljus, ljud eller vibrationer. Den kan också användas som portabelt personarm.

Säker radiolänk	Upp till 250 m räckvidd
Flexibel	Fungerar som personarm
Justerbar signal	Välj unik signal för varje dörr
Lång batteritid	Upp till 2 år
Mått och vikt	48 × 66 × 23 mm, 50 g



Babyvakt

BE1491



Beskrivning

Hjälper dig att uppfatta när bebisens gråter, även när du sover eller befinner dig ett par rum bort. Den skickar då en signal till Visitmottagaren som visar med ljus, ljud eller vibrationer att ditt barn behöver dig.

Säker radiolänk	Upp till 250 m räckvidd
Justerbar känslighet	Så du inte väcks i onödan
Justerbar fördröjning	Om babyn rör sig i sömnen
Kontaktmatta (tillval)	Om barnet lämnar sängen
Mått och vikt	65 × 100 × 27 mm, 120 g



Brandvarnare

BE1481

Beskrivning

Upptäcker eld och pyrande rök i ett tidigt skede och skickar då en signal till Visitmottagaren som notifierar dig omedelbart. Den har batteriövervakning som meddelar dig när det är dags att byta batteri.

Sensor	Optotermisk
Säker radiolänk	Upp till 200 m räckvidd
Broadcast	Aktiverar alla brandvarnare
Lång batteritid	Upp till 5 år
Mått och vikt	120 × 120 × 37 mm, 165 g



Kolmonoxidvarnare (CO)

BE1555

Beskrivning

CO-larmet upptäcker farliga koncentrationer av kolmonoxid och skickar omedelbart larmet vidare till din Visitmottagare. Det har en elektrokemisk sensor och inbyggd radiomodul.

Sensortyp	Elektrokemisk
Säker radiolänk	Upp till 200 m räckvidd
Broadcast	Larmar alla enheter inom räckvidd
Förslutet batteri	Varar produktens livslängd (10 år)
Mått och vikt	105 × 120 × 40 mm, 185 g



Detektering

Dörr

Telefon

Mobil

Brand

Baby

Hjälp

CO

Visitmottagare

Smarta, trådlösa och användarvänliga

Blixtmottagare

BE1441 / BE1442



Beskrivning

Blixtmottagaren visar med intensivt blyxtljus när en Visitsändare aktiveras. Den är trådlös och har en roterbar topp så att du kan rikta blyxtljuset. Den finns också med batterireserv (BE1442) för full funktionalitet även vid strömbavbrott.

Intensivt blyxtljus	Högeffektiv Xenonblyxt
Tydlig identifikation	4 olidfärgade lysdioder
Roterbar topp	Enkelt att rikta blyxtljuset
Batterireserv (BE1442)	Fungerar vid strömbavbrott
Mått och vikt (BE1442)	Ø 88 × 155 mm, 320 g

Portabel mottagare

BE1450



Beskrivning

Den portabla mottagaren blixtrar och ljuder när en Visitsändare aktiveras. Den är mycket enkel att använda och trådlös så att du kan ta med den ut på balkongen eller i trädgården.

Hög ljudsignal	Reglerbar upp till 93 dB
Tydlig identifikation	Färgat sken och ljudsignaler
Enkel att sätta upp	Inkluderar ett väggfäste
Lång batteritid	Upp till 3 år
Mått och vikt	130 × 165 × 36 mm, 590 g

Väckarklocka Visit

BE1580



Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, intensivt blyxtljus och vibrationer under huvudkudden när det är dags att stiga upp eller när någon av Visitsändarna aktiveras. Den har också en nattlampa med milt blått sken.

Hög ljudsignal	Ökar gradvis till över 100 dB
Intensivt blyxtljus	Fyra kraftiga LED-blyxtar
Sängvibrator	Vibrerar under kudden
Batterireserv	Fungerar vid strömbavbrott
Mått och vikt	121 × 92 × 108 mm, 390 g

Notifiering

LjudBlyxtVibration

Pager

BE1470



Beskrivning

Pagern visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder vilken Visitsändare som aktiverats. Den är liten och kan bäras i fickan eller på bältet. En bordsladdare med anslutning för sängvibrator (BE1260) finns som tillval.

Diskreta vibrationer	I fickan eller på bältet
Tydlig identifikation	Lysdioder och vibrationer
Lätt och bärbar	Innehåller bältesclips
Tillval laddare	Med uttag för sängvibrator
Mått och vikt	57 × 86 × 29 mm, 70 g

Armbandsmottagare

BE8102



Beskrivning

Armbandsmottagaren visar med olika vibrationsmönster och färgade lysdioder vilken Visitsändare som aktiverats. Du bär den runt handleden som ett vanligt armbandsur. En bordsladdare med anslutning för sängvibrator ingår i paketet.

Diskreta vibrationer	Lätt mot handleden
Tydlig identifikation	Lysdioder och vibrationer
Laddare ingår	Med uttag för sängvibrator
Utbytbart armband	Extra textilarmband ingår
Mått och vikt	38 × 12 × 49 mm, 27 g


Få **Visitnotiser** direkt i mobilen

BE1433 Mobilsändare ansluter Visitsystemet till mobilen, surfplattan eller smartklockan. Ladda ner Visitappen från App Store eller Google Play och ta emot Visitnotiser direkt i den mobila enheten. Dessutom kommer Visitmottagaren att ljuda, blixtra och vibrera vid inkommande samtal och meddelanden.

I Visitappen kan brukaren enkelt skräddarsy systemet för sitt hem och sina behov samt anpassa notiser och se historik.

Läs mer här:

bellman.com/be1433

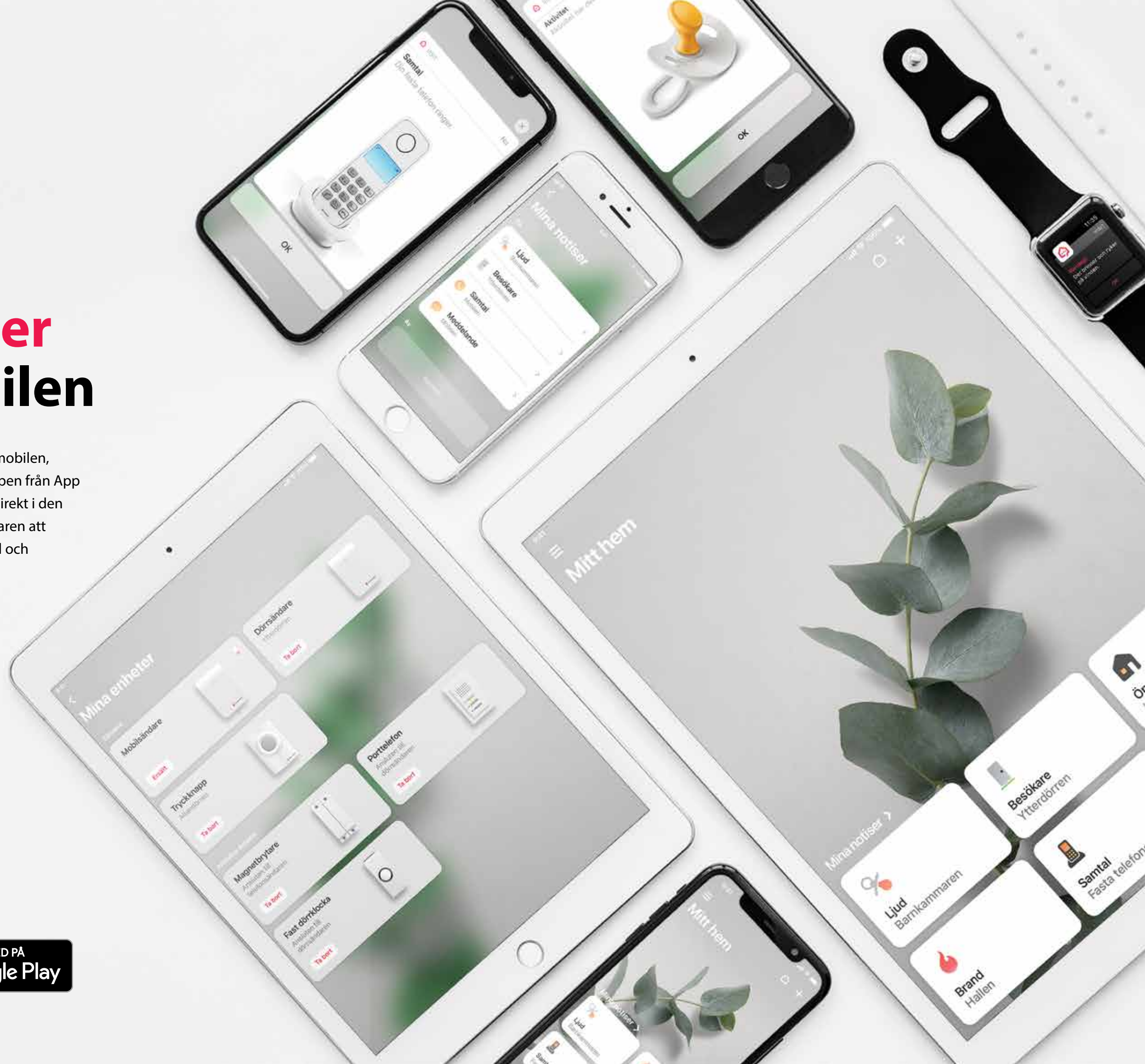

Tillbehör

Komplettera din Visitlösning

Sängvibrator

BE1272



Beskrivning

Sängvibratorn genererar kraftfulla vibrationer som väcker även de som sover tungt. Anslut den till någon av Visitmottagarna och placera den under madrassen eller huvudkudden

Kraftig vibration	Bra för svårväckta
Gummerad yta	Ligger säkert på plats
Säker	Enbart lågspänning
2 m lång sladd	Lätt att placera
Mått och vikt	88 × 88 × 27 mm, 120 g

Ljusedämpare för blixmottagare

BE9164-67

Beskrivning

Används för att dämpa ljuset när din blixtmottagare är placerad i ditt direkta synfält. Bör inte användas i samband med brand- eller kolmonoxidvarnare. Notera att blixtmottagaren då inte längre uppfyller standarden UL1971.

Röd	BE9164
Blå	BE9165
Gul	BE9166
Vit	BE9167
Mått och vikt	Ø 70 × 57 mm, 13 g

Pagerladdare

BE1260

Beskrivning

Pagerladdaren används för att ladda batteriet i pagern t ex under natten. Du kan också ansluta upp till två sängvibratörer och bli väckt av vibrationer under huvudkudden om någon av Visitsändarna aktiveras medan du sover.

Laddningstid	~ 6 h
Batterireserv	Fungerar vid strömbavbrott
Anslutningar	Upp till 2 sängvibratörer
Sladdlängd	1,7 m
Mått och vikt	78 × 88 × 43 mm, 385 g

Repeater

BE1510

Beskrivning

Repeatern används för att förlänga Visitsystemets räckvidd ytterligare. Den kan användas i större byggnader eller i konstruktioner med mycket kompakta väggar. Repeatern kan också användas som multifunktionssändare.

Säker radiolänk	Upp till 200 m räckvidd
Signalrepetering	Seriekoppla flera enheter
Nätdriven	Minimalt underhåll
Batterireserv	Fungerar vid strömbavbrott
Mått och vikt	60 × 98 × 30 mm, 110 g

Magnetisk monteringssats

BE9175

Beskrivning

Den magnetiska monteringssatsen erbjuder ett snabbt och enkelt alternativ till skruv och plugg vid montering av brandvarnare. Den består av två självhäftande plattor - en som du fäster i taket och en som du fäster på brandvarnaren.

Magnetiskt fäste	Kräver ingen skruv & plugg.
Lätt att montera	Hög vidhäftning och styrka
Förenklar batteribyte	Lätt att ta ner brandvarnaren
Flexibel	Passar alla Visitbrandvarnare
Vikt	25 g

Väggfäste

BE9075

Beskrivning

Väggfästet används för att montera blixtmottagaren på väggen så att blixtljuset syns överallt i rummet. Väggfästet levereras komplett med skruv, plugg och bruksanvisning.

Storlek	45 × 90 × 50 mm
Material	Aluminium
Användning	För inomhusbruk
Färg	Vit
Vikt	110 g

Trampmatta

BE9026

Beskrivning

Trampmattan används tillsammans med telefonsändaren för att detektera när någon går ut eller in i ett rum. När man trampar på den skickas en signal till Visitmottagaren som uppmärksammar dig med ljud, ljus eller vibrationer.

Sladdlängd	1,5 m
Kontakt	3,5 mm mono
Vikt	255 g
Färg	Svart
Mått	540 × 395 × 4,6 mm

Extern triggkabel

BE9086

Beskrivning

Den externa triggkabeln används för att länka den fristående väckarklockan BE1370 till Visitsystemet. Väckarklockan ser då till att du vaknar om en Visitsändare aktiveras medan du sover.

Sladdlängd	1,5 m
Kontakt, klocka	3,5 mm stereo
Kontakt, mottagare	3,5 mm mono
Färg	Vit
Vikt	20 g

Extern mikrofon

BE9199 / BE9200

Beskrivning

Den externa mikrofonen används med dörrsändaren för att detektera ljudkällor som är placerade en bit bort. Den kan t ex detektera ljudet från porttelefonen samtidigt som dörrsändarens mikrofon lyssnar av ljudet från dörrklockan.

Sladdlängd	2,5 m / 0,75 m
Mikrofon	Piezoelektrisk
Kontakt	3,5 mm mono
Färg	Vit
Vikt	15 g

Magnetbrytare

BE9023

Beskrivning

Magnetbrytaren används tillsammans med telefonsändaren för att detektera när t ex en dörr eller ett fönster öppnas. När magneterna dras isär skickar telefonsändaren automatiskt en signal till Visitmottagaren.

Sladdlängd	0,5 m
Kontakt	3,5 mm mono
Öppen brytare	< 1cm från magnet
Sluten brytare	> 2 cm från magnet
Vikt	25 g

Extern triggkabel

BE9253

Beskrivning

Den externa triggerkabeln ansluter BE1370 till ditt Visitsystem. Då kan väckarklockan uppmärksamma dig med ljud, ljus och vibration när dörrklockan eller telefonen ringer eller om brandlarmet skulle aktiveras.

Sladdlängd	0,5 m
Kontakt	3,5 mm stereo
Färg	Vit
Vikt	25 g

Värdepaket

Ett enkelt sätt att komma igång

Safe värdepaket

BE8037



Beskrivning

Safe värdepaket väcker dig med förstärkt ljud, blytljus och vibrationer under huvudkudden om en brand skulle inträffa. Det innehåller en trådlös brandvarnare som är ansluten till Visitväckarklockan och en sängvibrator.

Trådlös	Upp till 200 m räckvidd
Lätt att sätta upp	Innehåller allt du behöver
Batterireserv	Fungerar vid strömbrott
Trygg och säker	Godkänd av myndigheter
I paketet	BE1580, BE1480, BE1272



Care värdepaket

BE8039



Beskrivning

Care värdepaket hjälper dig att uppfatta när dörrklockan och telefonen ringer. Det innehåller en trådlös tryckknapp, en blytmottagare och en telefonkabel. Blytmottagaren uppmärksammar dig med intensivt blytljus och lysdioder.

Intensivt blytljus	Högeffektiv Xenonblyt
Lätt att sätta upp	Innehåller allt du behöver
Roterande topp	Rikta blytljuset dit du vill
Trygg och säker	Godkänd av myndigheter
I paketet	BE1441, BE1420, RJ11 kabel



Fristående produkter

Sängvibrator och väckarklockor

Väckning   

Väckarklocka Pro

BE1370



Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud, blytljus och vibrationer från den medföljande sängvibratoren. Den är enkel att använda och fullspäckad med smarta funktioner som t ex nattlampa, batterireserv och telefonanslutning.

Hög ljudsignal	Ökar gradvis till över 100 dB
Intensivt blytljus	Fyra kraftiga LED-blyt
Sängvibrator	Vibrerar under huvudkudden
Batterireserv	Fungerar vid strömbrott
Mått och vikt	121 × 92 × 108 mm, 390 g



Väckarklocka Classic

BE1350



Beskrivning

Väckarklockan väcker dig med förstärkt ljud och vibrationer under huvudkudden från den medföljande sängvibratoren. Den har en stor och tydlig, upplyst urtavla och stora vred som gör det lätt att ställa tid och väckning.

Hög ljudsignal	Ökar gradvis till över 100 dB
Sängvibrator	Vibrerar under huvudkudden
Lätt att använda	Stora och lättanvända vred
Upplyst urtavla	Med justerbar ljusstyrka
Mått och vikt	121 × 92 × 108 mm, 390 g



Vibio

BE1221



Beskrivning

Vibio är en trådlös sängvibrator som används tillsammans med Vibio-appen. I appen, som finns för både iOS och Android, skapar och hanterar du enkelt dina alarm. Du kan även välja att få notifieringar för telefonsamtal och meddelanden.

Kraftfulla vibrationer	Väcker dig som sover tungt
Bluetooth®	Lättanvänd mobilapp ingår
Smarta notifieringar	För samtal och meddelanden
Snoozeband	Snooza med ett lätt ryck
Mått och vikt	27 × 94 × 94 mm, 153 g



Lyssningshjälpmedel

Upptäck glädjen i att höra bättre

Domino Pro lyssningssystem

BE8005



Beskrivning

Domino är ett helt digitalt lyssningssystem som lyfter fram tal i bullriga miljöer så att du hör orden klart och tydligt. Det består av en mottagare som plockar upp tal i din närhet och en sändare som fångar upp tal på lite längre håll.

Mikrofoner	Runduppt. och riktverkande
Ljudåtergivning	16 bit digital stereo
Radiolänk	2.4 GHz bredband
Batterier	Uppladdningsbart litiumjon
Mått och vikt	99 × 48 × 22 mm, 74 g



Mino samtalsförstärkare

BE2030



Beskrivning

Mino är en digital samtalsförstärkare, utvecklad för dig som vill ha en liten och lätt enhet som ryms diskret i fickan. Den används med hörlurar eller med halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

Mikrofoner	Rundupptagande / riktverkande
Ljudåtergivning	16 bit digital stereo
Inbyggd telespole	För lokaler med teleslinga
Batterier	Uppladdningsbart litiumjon
Mått och vikt	99 × 48 × 22 mm, 74 g



Maxi samtalsförstärkare

BE2020



Beskrivning

Maxi är en mycket robust och användarvänlig digital samtalsförstärkare, speciellt utvecklad för dig som behöver stora, enkla och tydliga reglage. Den används med hörlurar eller med halsslinga om du har hörapparat eller hörselimplantat.

Mikrofon	Rundupptagande
Ljudåtergivning	16 bit digital stereo
Inbyggd telespole	För lokaler med teleslinga
Batterier	2 × AA 1,5V batterier
Mått och vikt	140 × 45 × 27 mm, 133 g



Maxi Pro TV-system

BE8054



Beskrivning

Maxi Pro TV-system är ett komplett lyssningsverktyg som ansluter via Bluetooth till din TV, smartphone, surfplatta och radio. Lyssna med hörlurar eller använd en halsslinga om du har hörapparat eller cochleaimplantat.

Teknik	Qualcomm® aptX™ Low Latency
Flexibel	Förstärker tal, TV-ljud och mobil
Enkel att använda	Tydliga knappar med symboler
I paketet	BE2021, BE2022
Mått och vikt	140 × 45 × 27 mm, 197 g



Maxi Pro samtalsförstärkare

BE2021



Beskrivning

Maxi Pro samtalsförstärkare är utformad för personer med nedsatt syn eller begränsad motorik. Följ med i konversationen vid middagen, anslut den till TVn eller använd den med mobilen för att förstärka rösten hos den som ringer.

Mikrofoner	Rundupptagande/riktverkande
Ljudåtergivning	16 bit digital stereo
Teknik	Qualcomm® aptX™ Low Latency
Batterier	Uppladdningsbart litiumjon
Mått och vikt	140 × 45 × 27 mm, 127 g



Maxi Pro TV-sändare

BE2022



Beskrivning

Maxi Pro TV-sändare strömmar ljud i full Hi-Fi kvalitet direkt till dina öron via din Maxi Pro samtalsförstärkare. TV-sändaren har både analog och digital ingång och kan anslutas till de allra flesta moderna teveapparater.

Teknik	Qualcomm® aptX™ Low Latency
Ingångar	Analog och digital ingång
Räckvidd	Upp till 25 m, fritt fält
Laddning	USB typ A
Mått och vikt	24 × 88 × 48 mm, 70 g



Tillbehör

Komplettera ditt lyssningshjälpmedel

Halsslinga

BE9159 / BE9161



Beskrivning	
Halsslingan är liten och lätt och genererar en hög utnivå. Anslut den till samtalsförstärkaren eller mobiltelefonen och växla till T-läge på hörapparaten. Den finns med lång sladd (art. nr. BE9159) och kort sladd (art. nr. BE9161).	
Hög utnivå	Dubbla kanaler
Mjukt tyghölje	Komfortabel & hygienisk
Trasselfri kabel	Lätt att hantera
Guldpläterad kontakt	Förhindrar korrosion
Sladdlängd	90 cm resp. 15 cm



Hörlurar

BE9122



Beskrivning	
Stereohörlurarna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är relativt täta och ger ett klart och tydligt ljud utan återkoppling. Hörlurarna är utrustade med en enkelsidig sladd och är mycket lätthanvända.	
Frekvensomfång	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω ± 10%
Känslighet	105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL
Kontakt	3,5 mm teleplugg
Sladdlängd	1,2 m



Microset™

BE9129



Beskrivning	
MicroSet™ är ett tillbehör speciellt utvecklat för Mino som består av en diskret myggmikrofon och en öronsnäcka. Fäst myggmikrofonen på kavajslaget så kan du ha Mino i fickan och få händerna fria för annat.	
Sladdlängd	95 cm
Kontakt	3,5 mm stereo
Mikrofon	Rundupptagande (omni)
Vikt	15 g
Färg	Svart



Öronsnäckor

BE9124

Kabelset

BE9126

Beskrivning	
Öronsnäckorna är speciellt utvalda för våra lyssningshjälpmedel. De är lätta och ger ett tydligt och detaljerat ljud. De är mycket täta vilket förebygger rundgång och ger ett minimum av störande omgivningsljud.	
Frekvensomfång	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω +/- 10%
Känslighet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
Kontakt	3,5 mm teleplugg
Sladdlängd	1,2 m



Beskrivning	
Med kabelsetet kan du ansluta ditt lyssningshjälpmedel till din TV, mobil eller HiFi-anläggning och njuta av högkvalitativt stereoljud. Paketet innehåller en 5 m lång stereokabel med teleplugg och en RCA (Phono) adapter.	
Sladdlängd, kabel	5 m
Kontakter, kabel	2,5 till 3,5 mm stereo
Sladdlängd, adapter	25 cm
Kontakter, adapter	Phono till 3,5 mm stereo
Färg	Svart



Hörlurar med mikrofon

BE9233

Öronsnäckor med mikrofon

BE9229

Beskrivning	
Stereohörlurarna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare. De är utrustade med en enkelsidig sladd, en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal.	
Frekvensomfång	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω ± 10%
Känslighet	105 ± 3 dB/mW @ 1kHz SPL
Kontakt	3,5 mm teleplugg
Sladdlängd	1,2 m



Beskrivning	
Öronsnäckorna är speciellt utvecklade för att passa Maxi Pro samtalsförstärkare och används för att lyssna ostört på musik eller tala i telefon. De är utrustade med en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal.	
Frekvensomfång	20 Hz - 20 kHz
Impedans	16 Ω +/- 10%
Känslighet	93 dB/mW @ 1 kHz SPL
Kontakt	3,5 mm teleplugg
Sladdlängd	1,2 m



Extern mikrofon

BE9127

Resetui

BE9147

Beskrivning	
Den externa mikrofonen kan användas som en förlängd mikrofon under möten för att förbättra signal-/brusförhållandet. Den kan också användas för att lyssna på TV genom att fästa mikrofonen på TV:ns högtalare.	
Sladdlängd	5 m
Kontakt	2,5 mm mono
Mikrofon	Rundupptagande
Vikt	35 g
Färg	Svart



Beskrivning	
Resetuiet är speciellt designat för Bellman & Symfons samtalsförstärkare och lyssningssystem. Det är tillverkat i slitstark canvas och skyddar effektivt alla dina lyssningstillbehör under resan.	
Slitstark canvas	Tål tuff behandling
Förstärkt yttre	Skyddar effektivt
Magnetlås	Lätt att öppna och stänga
Storlek	19 × 15 × 5 cm
Färg	Svart med vita kantband





Vi brinner för din hörsel.

Vårt uppdrag är att göra skillnad för hörselskadade och döva. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som ger människor möjlighet att känna sig trygga, oberoende och socialt aktiva. Vårt globala huvudkontor finns i Göteborg och vi representeras av regionala kontor och ett kvalificerat partnersätverk i Europa, Asien och Nordamerika.



Tillverkare

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim
Tel 031-68 28 20
E-post info@bellman.com
bellman.com



Revision: PRODCAT_001ART014_SE
Utgivningsdatum: 2022-04-13
TM och © 2022 Bellman & Symfon AB.
Alla rättigheter förbehålles.



bellman.com