

Visit Tischblitzlampe

BE1442-868



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Helle Blitzlichtsignale
Xenon-Blitz mit 30 Candela

Klare Signalidentifikation
Mit farbkodierten LED-Leuchten

Drehbarer Kopf
Für einfache Ausrichtung des Blitzlichts

Mehrere Anschlüsse
Ausgänge für Telefon und Vibrationskissen

Ausfall-Akku
Funktioniert selbst bei Stromausfall

MD

Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR 2017/745

Lautlose Alarmierung.

Die Tischblitzlampe von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Sie benachrichtigt Sie mit hellen Blitzlichtsignalen, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Leistungsfähig und mobil

Die Tischblitzlampe ist sehr einfach einzurichten und zu benutzen. Verbinden Sie diese einfach mit der Steckdose und stellen Sie die Tischblitzlampe auf einen Tisch oder auf ein Regal. Mit der optionalen Wandhalterung, lässt

sich diese ebenfalls an der Wand befestigen. Sie sendet helle Blitzlichtsignale aus, die auch in großflächigen Bereichen unübersehbar sind und dank der farblich unterschiedlichen LED-Signale, sofort dem jeweiligen Visit-Sender zugeordnet werden können.

Die Tischblitzlampe verfügt über getrennte Anzeige von Festnetz- und Mobiltelefonen. Zusätzlich kann ein Vibrationskissen angeschlossen werden, das Sie mit kräftigen Vibrationen alarmiert. Die BE1442 verfügt zudem über Ausfall-Akkus.





Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Höhe	155 mm
Durchmesser	78 mm
Gewicht	320 g



Tasten und Steuerelemente

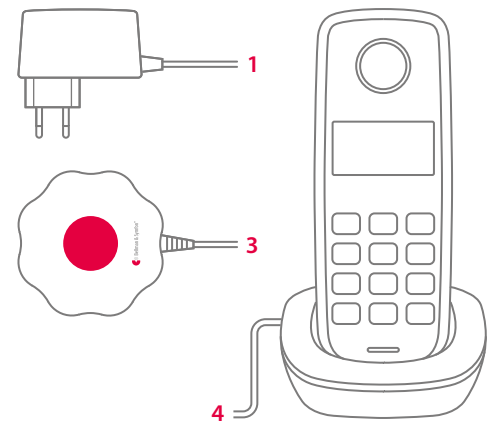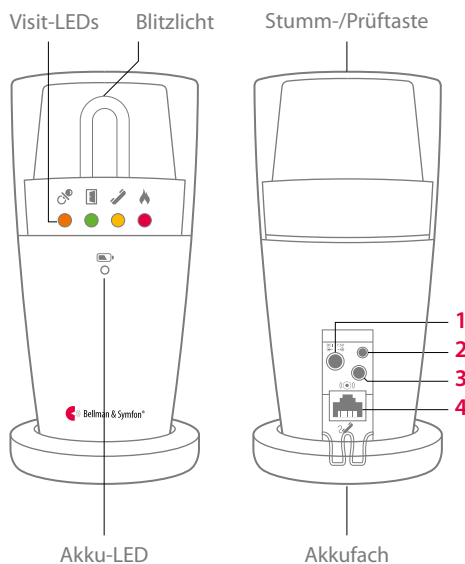

- 1 - Netzteil, 2 - Externer Trigger (2,5 mm)
3 - Vibrationskissen, 4 - Festnetztelefon

Eigenschaften

- Modell
BE1442-868 (mit Ausfall-Akku)
- Alarmsignal
Integriertes Blitzlicht: Xenon-Licht mit ca. 30 Candela
Warnung! Blitzlichter können epileptische Anfälle hervorrufen.
- Aktivierung durch:
 - Visit-Sender
 - Analoges Telefonnetz
 - Test-Taste

Strom und Batterie

- Netzstrom
7,5 V DC / 1500 mA mit Netzteil
- Stromverbrauch
Aktiv: 750 mA, Ruhezustand: 8 mA
- Ausfall-Akku
4 x aufladbare Akkus (1,2 V; AAA; NiMH; HR03)
Betriebsdauer: ca. 24 h, wenn vollständig geladen

Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Zulassungen



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Lieferumfang

- BE1442-868 Visit Tischblitzlampe mit Batterie-Backup
- 7,5 V DC / 1500 mA Netzteil
- 4 x 1,2 V AAA NiMH-Batterien

Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen standardmäßig Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyrunder wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelder wurde aktiviert

Zubehör

- BE9075 Wandkonsole
- BE1270-P02 Vibrationskissen
- BE9105 RJ11-Telefonkabel

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1441-868-1442-868_186DSH1.0-DE

bellman.com