


Visit-Türsender

BE1411-868

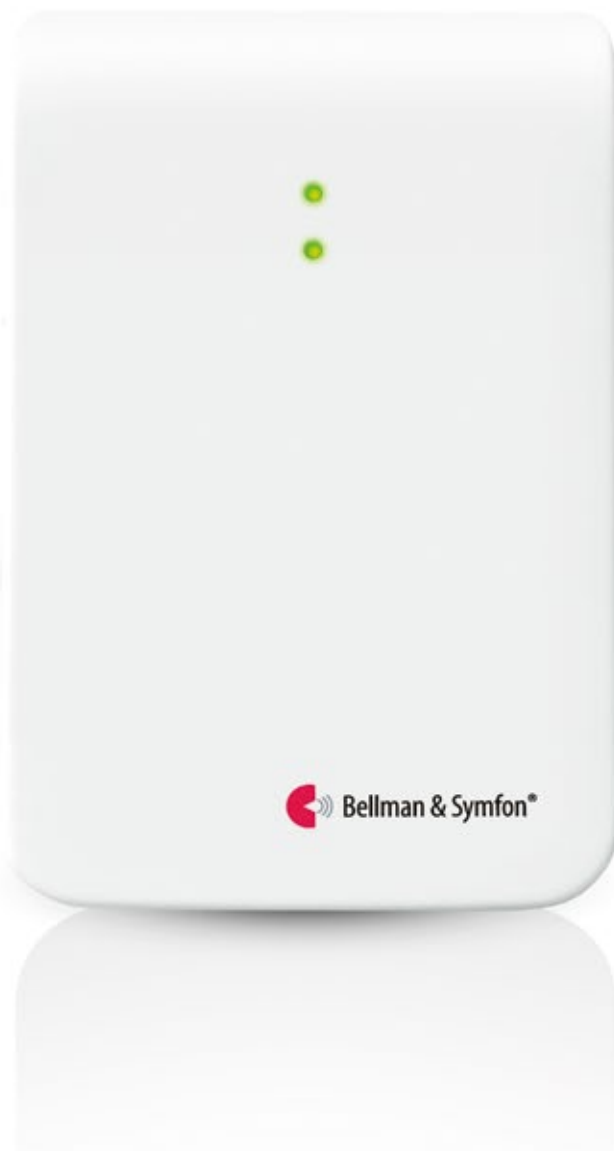

Eigenschaften

Flexibel

Erkennt die Türklingel und die Gegensprechanlage

Zuverlässige Erkennung

Dual-Mikrofon-Technologie

Programmierbar

Lernmodus zur Erkennung von beliebigen Tönen

Langanhaltende Leistung

Bis zu zehn Jahre Batterieleistung

Sichere Funkverbindung

Bis zu 250 m Reichweite

MD

Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR 2017/745

Wissen, wann die Gäste ankommen

Der Türsender von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben.

Er erkennt automatisch schon nahezu alle Türklingeln und Gegensprechanlagen und kann zusätzlich programmiert werden.

Funktionsweise

Bei Aktivierung des Türsenders wird ein Signal an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigt.

Mehrfache Aktivierung


Der Türsender kann von den folgenden Elementen aktiviert werden:

- internes Mikrofon
- integrierter elektromagnetischer Detektor
- externes Mikrofon
- galvanische Verbindung mit Ihrer Türklingel

Der Türsender verfügt über eine Dual-Mikrofon-Technologie und sorgt damit für eine zuverlässige Erkennung und stabile Funkverbindung im gesamten Wohnbereich. Das System ist einfach in der Einrichtung, praktisch wartungsfrei und benötigt so wenig Energie, dass es über Jahre mit Standardbatterien betrieben werden kann.



Technische Daten

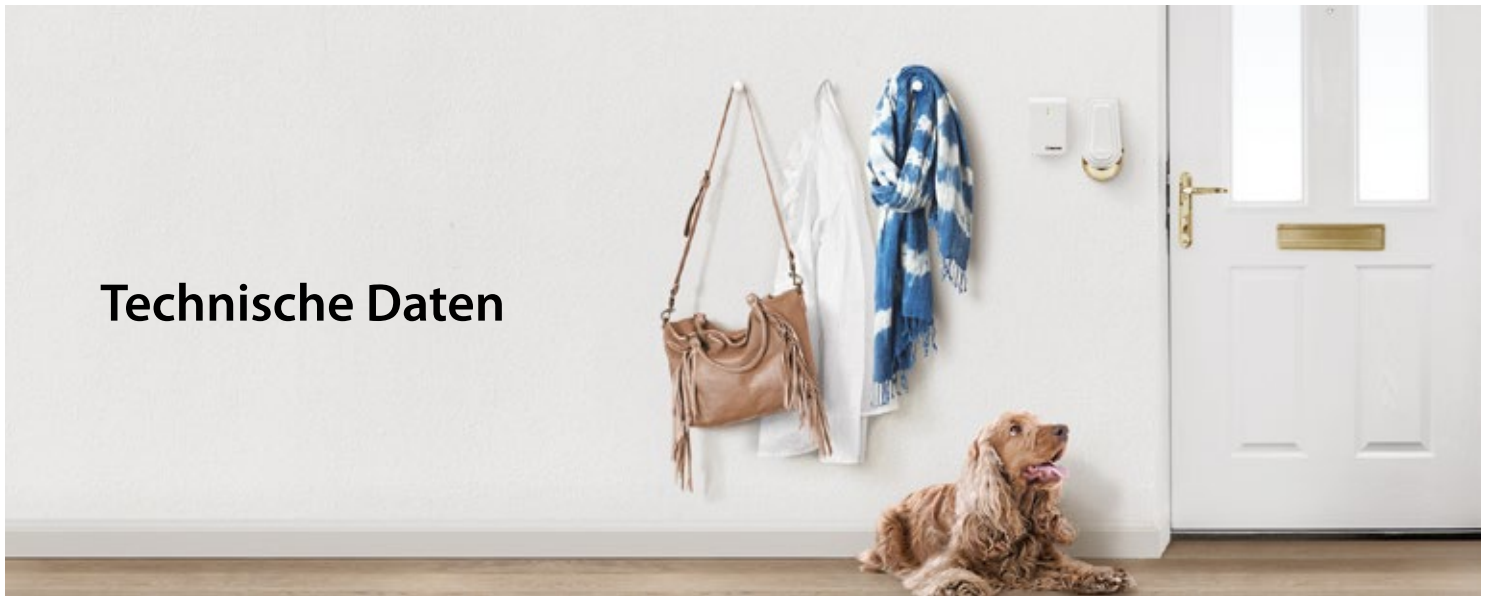


Größe und Gewicht

Höhe: **100 mm**
 Breite: **65 mm**
 Tiefe: **27 mm**
 Gewicht: **120 g**



Tasten und Anschlüsse

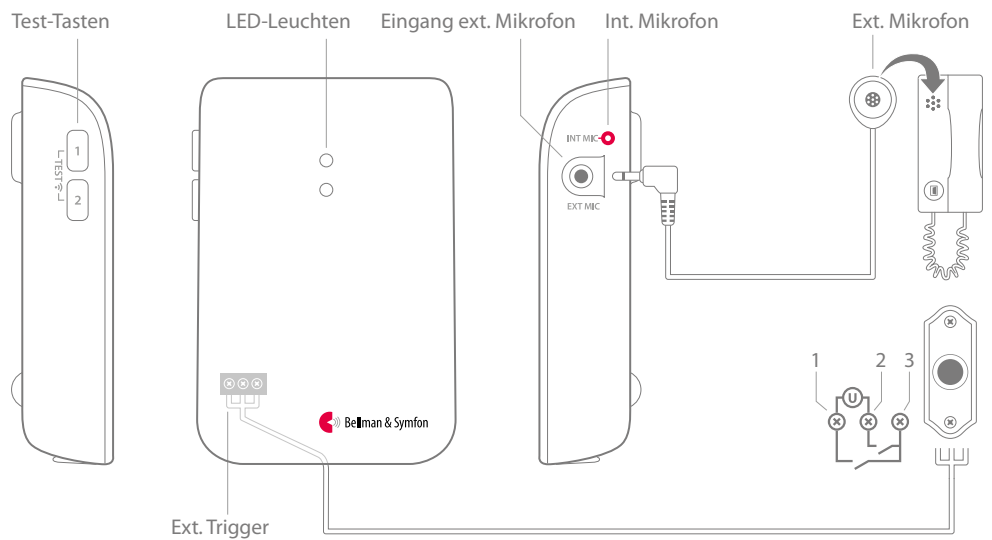

Ein-/Ausgänge

- Eingang für externes Mikrofon
- Eingang für externen Trigger

Aktivierung

- Test-Tasten
- Internes Mikrofon
- Externes Mikrofon
- Integrierter elektromagnetischer Detektor
- Galvanischer Anschluss

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Zulassungen



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Strom und Batterie

- Stromversorgung
Batteriestrom 2 x 1,5 V, AA, Lithium oder Alkaline
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA, Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline: ca. 5 Jahre, Lithium: ca. 10 Jahre

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 0° bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- BE1411-868 Visit-Türsender
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Klettverschluss für Wandbefestigung
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



Zubehör

- BE9199-P02 Externes Mikrofon (2,5 m)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.
 Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB.
 Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1411-868_174DSH1.0_DE

bellman.com