


Visit-Telefonsender

BE1431-868

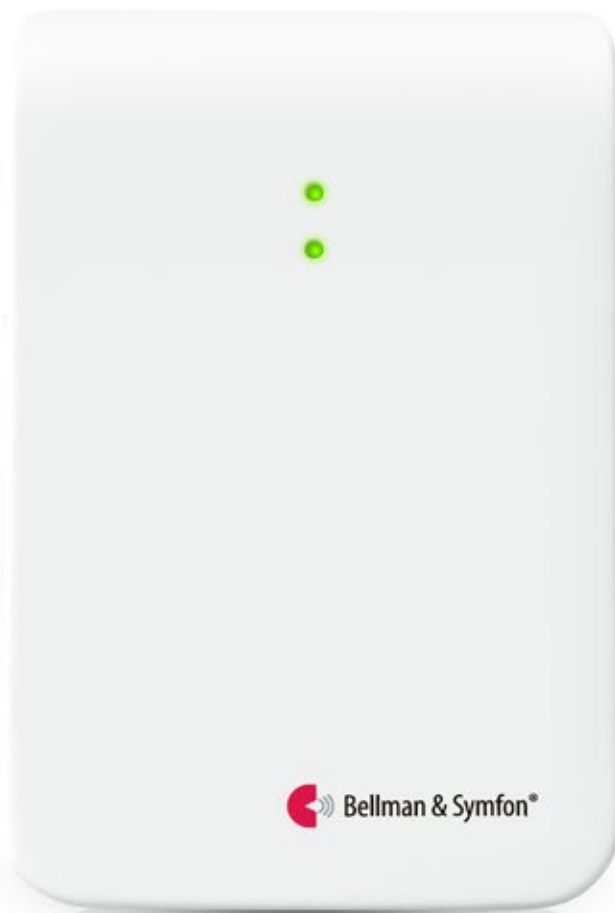

Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Liebsten.

Der Telefonsender von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Er kann verwendet werden, um Ihr Festnetztelefon zu erkennen oder um in der häuslichen Pflege zu unterstützen (Zubehör erforderlich).

Funktionsweise

Bei Aktivierung des Telefonsenders wird ein Signal an den Visit-Empfänger gesendet, der Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigt. Er verfügt über drei Triggereingänge die – neben der Telefonerkennung – auch noch verwendet

werden können für:

- die Alarmtrittmatte (Zubehör)
- den Magnetschalter (Zubehör)
- eine vorhandene Türklingel, etc.

Mit dem Telefonsender können Sie für jeden Trigger-Eingang einen individuellen Alarm auswählen und mit seiner stabilen Funkverbindung sorgt er für die vollständige Erfassung Ihres Wohnbereichs. Das System ist einfach in der Einrichtung, praktisch wartungsfrei und benötigt so wenig Energie, dass es über Jahre mit Standardbatterien betrieben werden kann.



Eigenschaften

Mit fast allen Telefonen kompatibel
Festnetztelefone

Mehrere Anschlüsse
Drei separate Trigger-Eingänge

Anpassbare Signale
Jeder Eingang erkennbar

Praktisch wartungsfrei
Bis zu zehn Jahre Batterieleistung

Sichere Funkverbindung
Bis zu 250 m Reichweite

MD

Gerät mit CE-Kennzeichnung
gemäß EU-MDR 2017/745

Technische Daten




Größe und Gewicht

Höhe:	100 mm
Breite:	65 mm
Tiefe:	27 mm
Gewicht:	134 g (inkl. Batterien)



Tasten und Anschlüsse

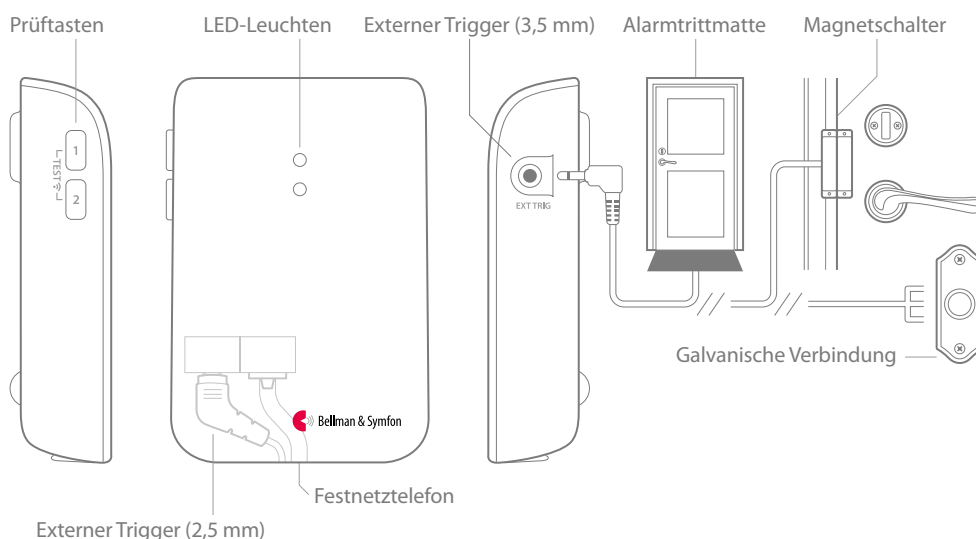

Ein-/Ausgänge

- RJ11-Eingang für analoges Telefonnetz
- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm) für weiteres Zubehör

Aktivierung

- Prüftasten
- Festnetztelefon
- Alarmtrittmatte- oder Magnetschalterzubehör
- Externer Trigger

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Strom und Batterie

- Stromversorgung
Batteriestrom 2 x 1,5 V, AA, Lithium oder Alkaline
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA, Ruhezustand < 15 µA
- Betriebsdauer
Alkaline: ca. 5 Jahre, Lithium: ca. 10 Jahre

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch.
- Temperatur: 0 ° bis 35 ° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- BE1431-868 Visit Telefon-Sender
- BE9105 Telefonkabel
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Klettverschluss für Wandbefestigung
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9026-P02 Alarmtrittmatte
- BE9023-P02 Magnetschalter
- BE9253 Ext. Trigger-Kabel (Stecker 3,5 mm)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1431-868_121DSH1.0_DE

bellman.com