


Telefon-Transceiver BT

BE1433

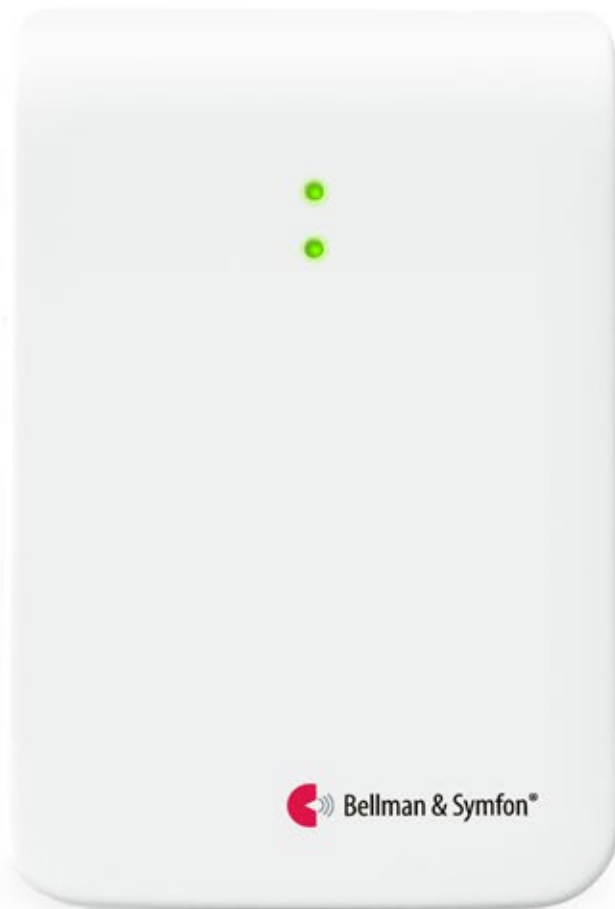

Eigenschaften

Bluetooth-unterstützt

Bis zu 40 m Reichweite, Freifeld

App-gesteuert

Erhältlich für iOS & Android

Sendet Visit-Alarme an mobile Geräte

Zeigt Visit-Alarme auf Ihrem Telefon, Tablet oder Ihrer Smartwatch (Modellabhängig) an

Alarm für mobile Anrufe und Mitteilungen, sowie das Festnetz
Signalisiert Ihren Visit-Empfängern, wenn Sie eingehende Anrufe oder SMS erhalten

Verbindet das komplette Visit-System mit Ihrem Smartphone oder dem Tablet.

Mit dem Telefon-Transceiver ist es einfacher denn je, Ihr Zuhause im Auge zu behalten. Er verbindet das Visit-System über Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Ihrer Smartwatch (Modellabhängig). Sobald Sie die Visit-App installiert haben, erhalten Sie Mitteilungen von Ihrem Visit System auf Ihrem Mobilgerät. Darüber hinaus informieren Sie Ihre Visit-Empfänger über eingehende Anrufe und SMS auf Ihrem Mobilgerät.


Es ergänzt Ihre vorhandenen Empfänger, indem es zusätzliche Informationen zu den Alarmen bereitstellt und ermöglicht es, Ihre Benachrichtigungen anzupassen, den Verlauf der Benachrichtigungen zu durchsuchen und einen Überblick über Ihre verbundenen Geräte zu erhalten.

Der Telefon-Transceiver kann auch Ihr Festnetztelefon signalisieren und verfügt über eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit per Klinke für die Trittmatte, den Magnetschalter oder als Anschluss an die Klingelanlage.



Medizinisches Gerät mit CE-Kennzeichnung gemäß EU-MDR 2017/745



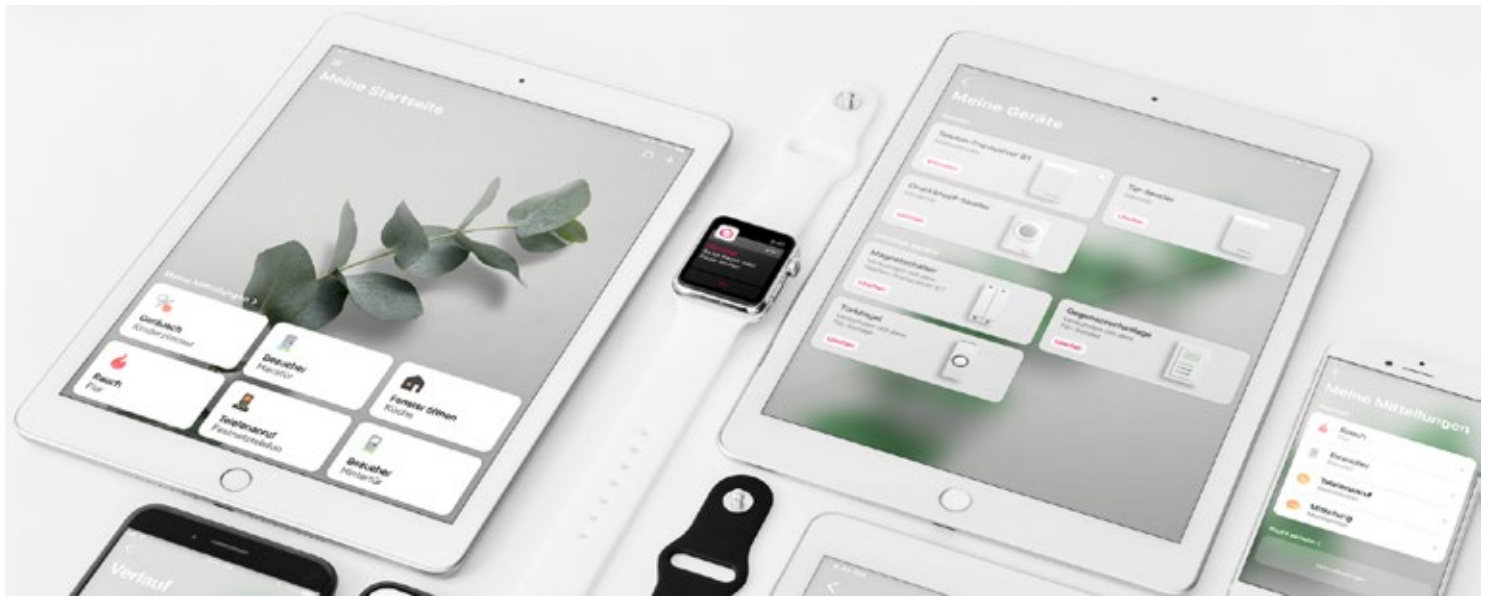


Maße und Gewicht

Höhe:	100 mm , 4.0 Zoll
Breite:	65 mm , 2.6 Zoll
Tiefe:	27 mm , 1.1 Zoll
Gewicht:	198 g , 4.2 oz. (inkl. Batterien + Anschlusskabel)



Tasten und Anschlüsse

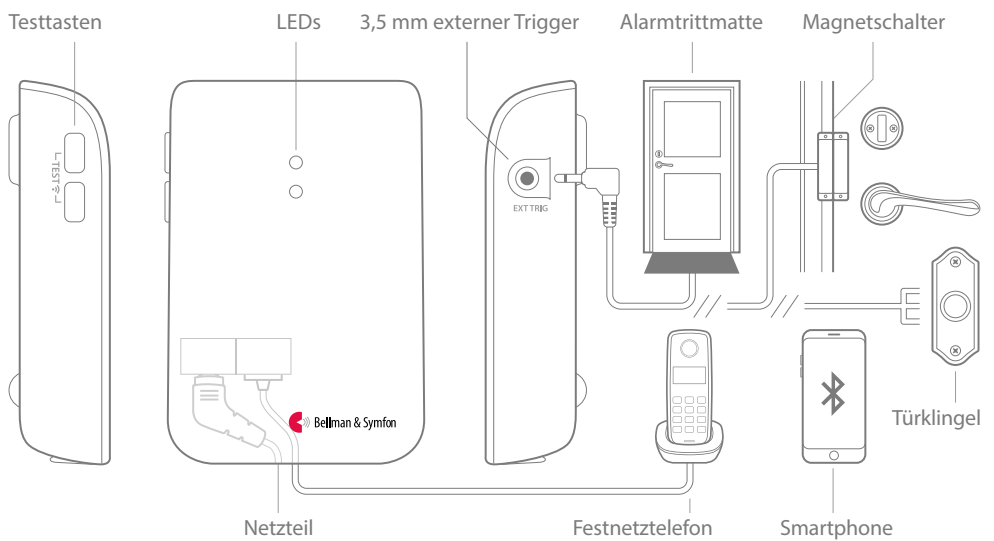

Eingänge

- RJ11 Anschluss für analoges Telefonnetz
- 3,5 mm externer Triggereingang für Zubehör
- Netzteilbuchse
- Bluetooth 5.0

Aktivierung

- Ein mobiles Gerät über Bluetooth
- Testtasten
- Festnetztelefon
- Ext. Trig. Anschluss

Kompatibilität

- Ab iOS15 | ab Android 8 und höher
- iPhone 6S und höher | moderne Android Geräte

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innenbereich geeignet
- Temperatur: 0° bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% – 90% (nicht kondensierend)

Strom und Batterie

- Netzspannung: 5 V DC / 1000 mA
- Ausfall-Batterien: 2 x 1.5 V AA Alkaline-Batterien

Wartung und Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringt. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger.
- Nicht wiederverwendbar.

Frequenzbänder

- 64 Bänder standardmäßig.

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: bis 250 m
- Bluetooth-Frequenz: 2400 – 2483.5 MHz
- Bluetooth-Reichweite: bis 40 m

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Lieferumfang

- BE1433 Telefon-Transceiver BT
- Netzteil
- 2 x 1,5V AA Alkaline-Batterien
- RJ11 Anschlusskabel
- Schrauben und Dübel, Klettband zur Befestigung
- Erste Schritte Anleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9023-P02 Magnetschalter
- BE9026-P02 Alarmtrittmatte
- BE9253 Externes Trigger Kabel (3.5 mm Anschluss)

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten

Bellman, Bellman & Symfon und das Bellman & Symfon-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Änderungen an diesem Merkblatt sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

BE1433_053DSH1.0_DE

bellman.com