

Visit Tragbarer Empfänger

BE1450-868



Eigenschaften

Kraftvoller Klang
Bis zu 93 dB möglich

Klare Signalidentifikation
Verwendet LEDs
und Tonsignaturen

Langanhaltende Leistung
Bis zu drei Jahre Batterielaufzeit

Ausgang für Vibrationskissen
Für leise Alarmierung
in der Nacht

Einfache Einrichtung
Sofort einsatzbereit

MD

Medizinisches Gerät mit
CE-Kennzeichnung gemäß
EU-MDR 2017/745

Überall erreichbar.

Der tragbare Empfänger von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Er benachrichtigt Sie mit akustischen und optischen Signalen, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Der tragbare Empfänger ist sehr einfach zu benutzen. Er benötigt keinerlei Kabel, d. h., Sie können ihn auch problemlos mit raus auf den Balkon oder die Veranda nehmen. Die Batterien halten bis zu drei Jahre.

Klare und eindeutige Alarme

Der tragbare Empfänger kann ein Tonsignal von bis zu 93 dB erzeugen und mit seinem großem, ergonomischen Regler können Sie die Lautstärke ganz bequem nach Wunsch anpassen. Dank der verschiedenen LED-Farben können die jeweiligen Visit-Signale sofort erkannt werden.

Zusätzlich kann ein Vibrationskissen angeschlossen werden, das Sie Nachts mit Vibration aufweckt.



Technische Daten




Abmessungen und Gewicht

Höhe	165 mm
Breite	130 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	590 g (inkl. Batterien)



Tasten und Steuerelemente

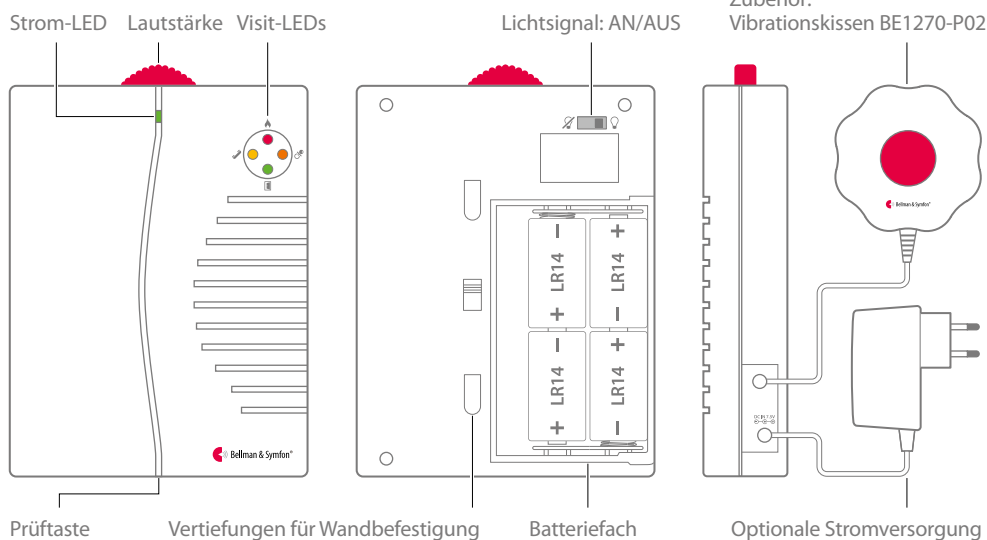

Eigenschaften

- Einstellbares Tonsignal
Max. 93 dBA bei 1 m Entfernung,
Frequenzbereich: 500 bis 1000 Hz
- Klare Signalidentifikation
Farb-LEDs und individuelle Tonsignaturen
- Langanhaltende Leistung
Bis zu drei Jahre Batterielaufzeit
- Ausgang Vibrationskissen: 2,0 bis 4,0 VDC

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld).
Die Funkreichweite ist abhängig von
Gebäudeeigenschaften und örtlichen
Funkbedingungen.

Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 0°C bis 35°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %
(nicht kondensierend)

Strom und Batterie

- Batteriestrom
4 x Alkaline-Batterien (1,5 V; LR14)
- Netzstrom
7,5 V DC / 1500 mA mit optionaler Stromversorgung
- Stromverbrauch
Aktiv: 1000 mA, Ruhezustand: 0,1 mA
- Betriebsdauer
2 bis 3 Jahre mit Alkaline-Batterien

Lieferumfang

- BE1450-868 Visit Tragbarer Empfänger
- 4 x Batterien (1,5 V; LR14)
- Wandkonsole mit Schrauben und Dübeln

Zubehör

- BE1270-P02 Vibrationskissen
- Bellman & Symfon Netzteil

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt
gemäß der Verordnung (EU) 2017/745
(Medizinprodukteverordnung).

Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol
Der Babyruf-Sender wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol
Der Rauchmelder wurde aktiviert
- Orangefarbene und rote LEDs blinken
abwechselnd
Der CO-Alarm wurde aktiviert

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von
Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von
Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1450-868_066DSH1.0_DE

bellman.com