

# Visit Pager-Empfänger

BE1470-868



## Eigenschaften

### Sanfte Vibrationen

Leise und unaufdringlich

### Klare Signalidentifikation

Verwendet LEDs  
und Vibrationsmuster

### Leicht und tragbar

Sie können ihn am Gürtel tragen

### Vorderes Etikett austauschbar

Einfach anzupassen

### Optionales Ladegerät als Zubehör

Mit zwei Bettalarm-Anschlüssen

**MD**

Medizinisches Gerät mit CE-  
Kennzeichnung gemäß EU-MDR  
2017/745

## Passt in Ihre Tasche und begleitet sie unauffällig den ganzen Tag.

Das Pager-Empfangsgerät von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Es benachrichtigt Sie mit einem sanften Vibrationsalarm, wenn es an der Tür läutet oder das Telefon klingelt, wenn Ihr Baby nach Ihnen verlangt oder ein Feuer ausbrechen sollte.

Der Pager zeigt die unterschiedlichen Visit-Signale mit verschiedenfarbigen Leuchten an und kann mit einer einzigen Batterie bis zu drei Wochen betrieben werden. Er ist leicht,

dennoch robust und kann am Gürtel befestigt oder problemlos in der Tasche verstaut werden. Verwenden Sie ihn zuhause und in der häuslichen Umgebung, um jederzeit informiert zu sein, wenn etwas passiert, um das sie sich kümmern müssen.

Das als Zubehör erhältliche Pager-Ladegerät umfasst eine Reservebatterie und zwei Bettalarm-Ausgänge. Legen Sie ihn einfach unter Ihr Kopfkissen oder Ihre Matratze, um mit Vibrationen geweckt bzw. benachrichtigt zu werden, wenn des Nachts etwas passiert.



# Technische Spezifikationen




## Abmessungen und Gewicht

Höhe: **86 mm**  
Breite: **57 mm**  
Tiefe: **29 mm**  
Gewicht: **70 g (inkl. Batterien)**



## Tasten und Steuerelemente

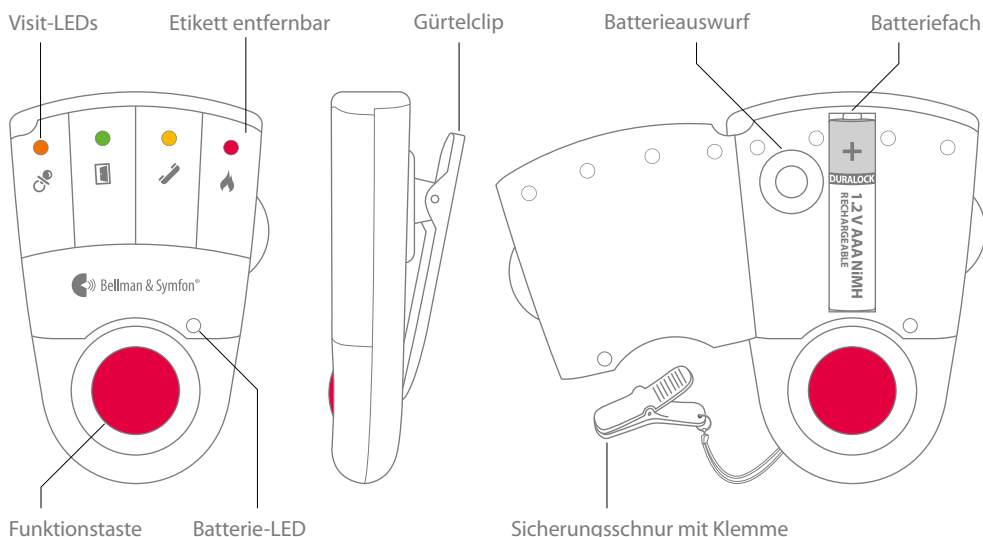

## Eigenschaften

- Sanfte Benachrichtigung  
Erzeugt leise und unaufdringliche Vibrationen
- Klare Signalidentifikation  
Verwendet Farb-LEDs und Vibrationsmuster
- Leicht und tragbar  
Wägt nur 70 g
- Optionales Ladegerät als Zubehör  
Mit zwei Bettalarm-Anschlüssen ausgestattet

## Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,3 MHz
- Reichweite: 50 - 250 m  
Die Reichweite hängt von der Funkfrequenz, den Gebäudeeigenschaften und der Kombination aus Sendern und Empfängern ab.

## Zulassungen

**MD** Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

## Strom und Batterie

- Netzstrom  
Stromversorgung über BE1260-C Pager-Ladegerät-Zubehör
- Batteriestrom  
1 x Alkaline (1,5 V; AAA) oder  
1 x nachladbare NiMH-Batterie (1,2 V; AAA)
- Stromverbrauch  
Aktiv: 220 mA, Ruhezustand: 1 mA
- Betriebsdauer  
Alkaline-Batterien: 2 bis 3 Wochen  
NiMH-Batterien: ca. 1 Woche  
(wenn vollständig geladen)

## Lieferumfang

- BE1470-868 Visit Pager-Empfänger
- Gürtelclip, Sicherungsschnur, zweites Vorderseiten-Etikett

## Umweltbestimmungen

- Betriebstemperatur: Von 0 °C bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %  
(nicht kondensierend)

## Visit-Anzeigen

Die Visit-LEDs zeigen normalerweise Folgendes an:

- Orange LED, Schnuller-Symbol  
Das Babyphone wurde aktiviert
- Grüne LED, Türsymbol  
Der Türsender wurde aktiviert
- Gelbe LED, Telefonsymbol  
Der Telefonsender wurde aktiviert
- Rote LED, Feuersymbol  
Der Rauchmelder wurde aktiviert

## Zubehör

- BE1260-C Pager-Ladegerät
- BE1270-P02 Vibrationskissen  
(an Ladegerät angeschlossen)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1470\_081DSH1.0\_DE

[bellman.com](https://bellman.com)