

Visit Rauchmelder

BE1481 / BE1481-DE



Eigenschaften

Sensortyp
Optothermaler Sensor

Lange Batterielebensdauer
Bis zu 5 Jahre

Stummschaltung
Über Funktionstaste möglich

Hohe Funkreichweite
Bis zu 200 m

MD

CE-gekennzeichnetes
Medizinprodukt gemäß EU
MDR 017/745 und Rauchmelder
gemäß EN 14604:2005/AC:2008

Beschützt Ihre Familie und Ihr Zuhause.

Der Visit Rauchmelde-Sender ist Teil des Visit Systems, das es Ihnen ermöglicht die Dinge des Alltags wahrzunehmen. Er entdeckt Rauch und ungewöhnliche Hitze in einem frühen Stadium und überträgt das Signal an Ihre Visit Empfänger.

Warnt Sie rechtzeitig

Im Brandfall sendet der Visit Rauchmelde-Sender sofort ein Signal an Ihre Visit Empfänger, die Sie über Licht-, Ton- und/oder Vibrationssignale (je nach Empfängertyp)

benachrichtigen. So können Sie sich rechtzeitig in Sicherheit begeben.

Der Visit Rauchmelde-Sender verwendet eine stabile Funkverbindung mit einer Reichweite von bis zu 200 m (freies Feld). Er ist robust gestaltet und mit Batterien ausgestattet, die bis zu 5 Jahre halten. Darüber hinaus verfügt er über eine Stummschaltfunktion bei Fehlalarmen (z. B. bei Dämpfen aus der Küche) und warnt Sie bei Verschmutzungen durch Staub, Schmutz oder Spinnenweben.




Technische Daten

Maße und Gewicht


Länge: **120 mm, 4,7"**
 Breite: **120 mm, 4,7"**
 Höhe: **37 mm, 1,5"**
 Gewicht: **165 g inkl. Batterien**



Tasten und Bedienelemente

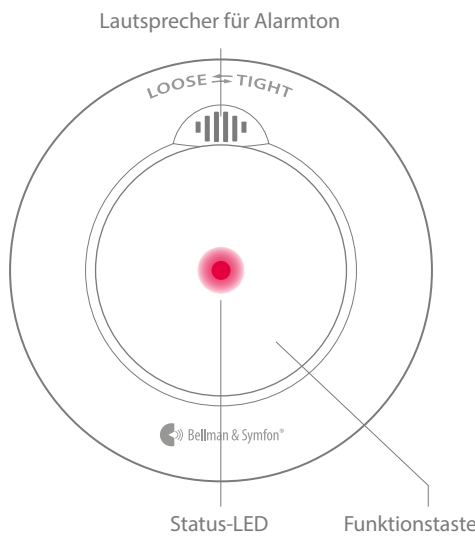

Montageplatte

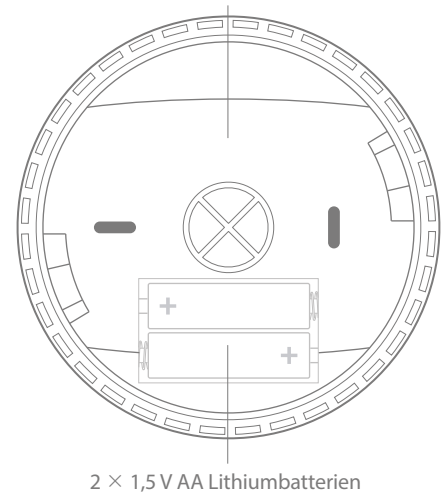

Eigenschaften

- Sensortyp
Optothermaler Sensor für Hitze- und Rauchererkennung.
- Rauchempfindlichkeit: 0.115 – 0.168 dB/m
- Hitzeempfindlichkeit: 62°C (+/- 8°C)
- Alarmton
> 85 dB(A) in 3m Entfernung
Tonfrequenz: 3.2 kHz
- Funkmodul
Zur Übertragung des Alarms an Ihre Visit Empfänger.
- Warnung bei schwacher Batterie
Sendet einen Alarm an alle Visit Empfänger in Reichweite auf dem gleichen Frequenzband.
- Warnung bei Verschmutzung
Meldet sich bei Verunreinigungen durch Staub, Schmutz oder Spinnenweben.
- Broadcast-Funktion
Sendet auf Wunsch einen Alarm an alle Visit Empfänger in Reichweite – unabhängig vom eingestellten Frequenzband.
- Aktivierung durch:
 - Funktionstaste
 - Rauch
 - Hitze, wenn die Temperatur 62 °C (+/- 8°C) übersteigt

Strom und Batterie

- Batteriespannung
2 x 1,5V AA Energizer Lithium L91
- Stromverbrauch
Aktiv < 75 mA, Standby < 15 µA
- Batterielaufzeit
Mit Lithium: bis zu 5 Jahre

Umweltbedingungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperaturbereich: 4° bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95% relativ (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,3 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld)
Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung) und ein Rauchmelder gemäß EN 14604:2005/AC:2008

Lieferumfang

- BE1481 Rauchmelde-Sender
- Halterung
- Batterien
- Schrauben
- Bedienungsanleitung



Instandhaltung und Reinigung

- Saugen Sie Ihren Rauchmelde-Sender regelmäßig (und bei jedem Batteriewechsel) mit einem weichen Bürstenaufsatz des Staubsaugers und wischen Sie das Gerät mit einem nebelfeuchten Tuch ab.
- Warnung:
Rauchmelde-Sender niemals überstreichen!

© und TM 2025, Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Alle Produktdesigns sind patentiert. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1481/BE1481-DE_014DSH1.0-DE

bellman.com