

Visit Babyruf-Sender

BE1491-868



Eigenschaften

Zuverlässige Signalübertragung
Bis zu 250 m Reichweite

Flexibel
Einstellbare Empfindlichkeit
und Auslöseverzögerung

Anpassbare Anzeige
Für jedes Kind ein eigenes Signal

Optionale Alarmtrittmatte
Sie sind jederzeit informiert,
wenn ihr Kind das Bett verlässt

Benutzerfreundlich
Einfache und vielseitige
Einstellungen



Medizinisches Gerät mit CE-
Kennzeichnung gemäß EU-MDR
2017/745

Immer ganz nah bei Ihrem Baby

Für Sie als Eltern ist die Sorge um die Gesundheit und Sicherheit Ihres Kindes das Wichtigste. Bellman & Symfon bietet Eltern mit einer Hörminderung vollständige und sichere Babyüberwachungslösungen, mit denen Sie Ihrem Kind immer nah sind. Der Visit Babyruf-Sender benachrichtigt Sie in dem Moment, wenn Ihr Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt, selbst wenn Sie gerade schlafen oder sich ein paar Zimmer weiter befinden.

Funktionsweise

Bei Aktivierung des Babyruf-Senders wird ein Signal an die Visit-Empfänger gesendet, die Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigen.

Sicher und zuverlässig

Visit verwendet eine sichere Funkverbindung, die Ihren gesamten Wohnbereich abdeckt, so dass Sie die Gewissheit haben, jederzeit mit Ihrem Kind verbunden zu sein.

Einstellbare Empfindlichkeit und Ansprechverzögerung

Sie können die Empfindlichkeit und die Auslöseverzögerung des Babyruf-Senders so einstellen, wie es die Gegebenheiten erfordern.

Anpassbare Meldung

Wenn Sie mehr als ein Kind haben, können Sie zwischen verschiedenen Signalen auswählen, um jederzeit zu wissen, welches Kind Ihre Aufmerksamkeit benötigt.



Technische Daten



Größe und Gewicht

- Höhe: **100 mm, 4,0 Zoll**
Breite: **65 mm, 2,6 Zoll**
Tiefe: **27 mm, 1,1 Zoll**
Gewicht: **118 g, 4,2 oz (inkl. Batterien)**



Ein-/Ausgänge

- Externer Trigger-Eingang (3,5 mm)

Aktivierung

- Prüftasten und internes Mikrofon
- Alarmtrittmatte (Zubehör)

Einstellungen

- Empfindlichkeit: Hoch, Mittel, Niedrig
- Verzögerung: 30 s, 10 s, 1 s

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 250 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Zulassungen







Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

Tasten und Anschlüsse

Prüftasten /
Einstellungen

LED-Leuchten

Externer Trigger-Eingang Mikrofon

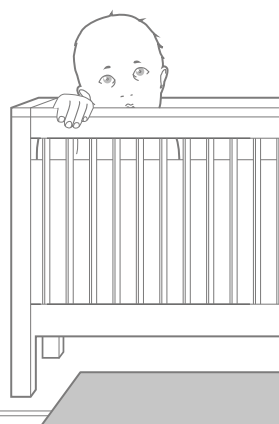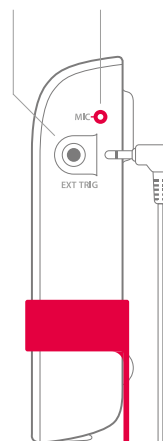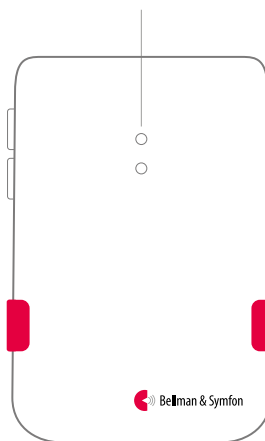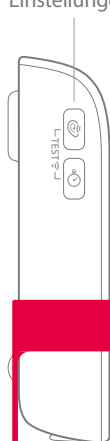

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass sich der Babyrufsender außerhalb der Reichweite von Kindern befindet. Stellen Sie den Babyrufsender niemals im Bett oder Laufgitter des Kindes auf.

Alarmtrittmatte

Strom und Batterie

- Stromversorgung
Batteriestrom 2 x 1,5 V, AA, Lithium oder Alkaline
- Stromverbrauch
Aktiv < 70 mA, Ruhezustand < 400 µA
- Betriebsdauer
Alkaline: ca. 6 Monate; Lithium: ca. 1 Jahr

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Wartung und Reinigung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Haushaltsreinigungsmittel, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel.
- Nicht wiederverwendbar.

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch.
- Temperatur: 0 bis 35 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- BE1491-868 Visit Babyruf-Sender
- Standfuß
- 2 x Alkaline-Batterien (1,5 V; AA)
- Schraube und Dübel
- Bedienungsanleitung



Zubehör

Folgendes Zubehör ist erhältlich:

- BE9026-P02 Alarmtrittmatte
- BE9023-P02 Magnetschalter

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1491-868_091DSH1.0_DE

bellman.com