

Magnetschalter

BE9023-P02



Eigenschaften

Flexibel

Für Türen und Fenster

Einfache Installation

Klebeband (bereits angebracht)

Kompatibel mit Visit

Verbindung mit
BE1433 Telefon Transceiver BT
BE1491 Babyrufsender


Überwacht Ihre Eingangstür und Ihre Fenster.

Der Magnetschalter von Bellman & Symfon wurde eigens für das Visit-Smart-Home-System entwickelt und benachrichtigt Sie, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird.

Bringen Sie den Magnetschalter einfach an dem Tür- oder Fensterrahmen an und verbinden Sie ihn mit dem Visit Telefon Transceiver BT. Wenn die Magneten des Magnetschalters (durch Öffnen einer Tür oder eines Fensters) getrennt werden, sendet der Sender ein Signal an die Visit-Empfänger, die Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigen.

Technische Daten

- Abmessungen 25 × 62 × 13 mm
- Gewicht 25 g
- Anschluss Mono-Klinkenstecker(3,5 mm)
- Kabellänge 0,5 m
- Unterbrecherkontakt:
Der Abstand zwischen den Magneten muss bei geschlossener Tür kleiner als 1 cm sein.
- Farbe Weiß
- Nur für den Innengebrauch

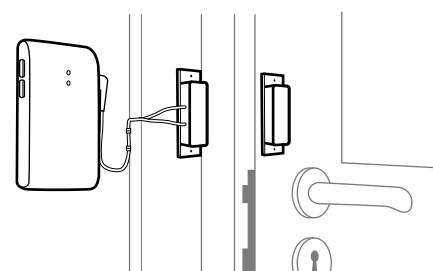

Zulassungen

MD Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (Medizinprodukteverordnung).

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.
Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE9023-P02_004DSH1.0_DE

bellman.com