

Visit Drukknopzender

BE1420-868



Functies

Gemakkelijk toegankelijk
Draag het om uw nek 24/7

Licht en duurzaam
Bestand tegen alledaags gebruik

Betrouwbare transmissie
Tot 245 meter reikwijdte

Duurzame energie
~ Levensduur van de batterij tot 2 jaar



Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745

Uw huis binnen handbereik.

Deze drukknopzender van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij kan om uw nek worden gedragen als een draagbare oproepknop, of als draadloze deurbel bij de voordeur worden geïnstalleerd.

Licht en duurzaam

De zender is ontworpen voor dagelijks gebruik, vrijwel onderhoudsvrij en werkt jarenlang op één batterij.

Gebruik als een oproepknop

Vraag uw partner om de zender om de nek te dragen, zodat u altijd bereikbaar bent als er iets gebeurt dat uw aandacht vereist.

Wanneer uw partner op de knop drukt om hulp in te roepen, wordt het signaal onmiddellijk doorgestuurd naar uw Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Gebruik als een deurbel

De drukknopzender kan ook worden gebruikt als draadloze deurbel. Plaats hem bij de voordeur als een gewone deurbel om het komen en gaan in uw huis bij te houden.

Wanneer de gasten arriveren en op de knop drukken, wordt het signaal doorgestuurd naar uw Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).


Technische specificaties

Afmetingen en gewicht

Hoogte: **66 mm, 2,6"**
Breedte: **48 mm, 1,9"**
Diepte: **23 mm, 0,9"**
Gewicht: **50 g, 1,8 oz. incl. batterijen**



Productoverzicht

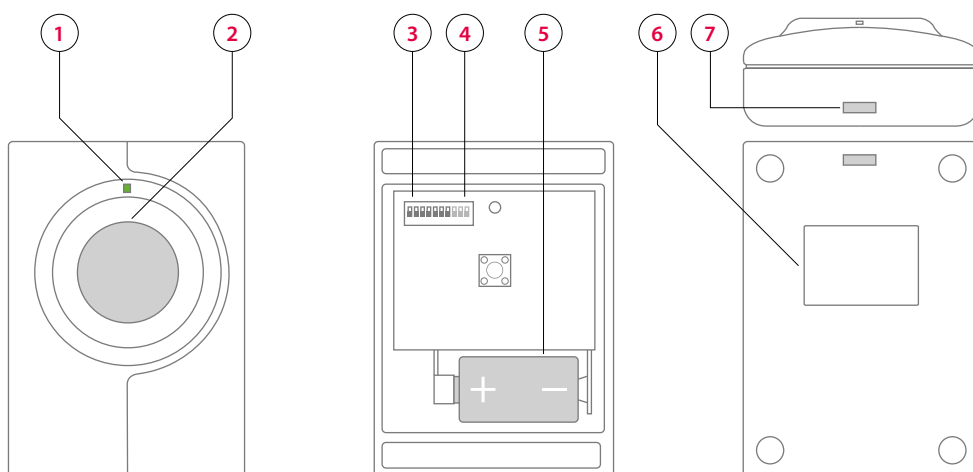

Stroom en batterij

- Batterijtype
6V PX28A alkaline of 6V PX28L lithium
- Stroomverbruik
Actief 35 mA, inactief 0,05 μ A
- Gebruikstijd
~ 2 jaar

Aantal radiotoetsen

- 64 standaard. Maximaal 256 met optionele software

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,3 MHz
- Dekking: 50-250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

Goedkeuringen

MD Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Knoppen en bedieningselementen

- 1 Status-led
- 2 Drukknop
- 3 Signaalschakelaar
- 4 Radio sleutelschakelaar
- 5 Batterijcompartiment
- 6 Opening voor nekkoord
- 7 Plakband voor wandmontage

Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

Milieuvereisten

- Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis op een beschermde locatie. Is niet bestand tegen water of regen. (IP42)
- Temperatuur: -22 ° tot 104 °F (-30 ° tot 40 °C)
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90%, niet-condenserend

In de doos

- BE1420-868Visit Drukknopzender
- PX28A 6V alkalinebatterij
- Nekkoord met veiligheidssluiting
- Schroeven en pluggen
- Dubbelzijdig plakband
- Gebruikershandleiding



© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1420-868_001DSH1.0-NL

bellman.com