

Visit Telefoonzender

BE1431-868



Houd contact met uw dierbaren.

Deze telefoonzender van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij kan worden gebruikt om zowel uw vaste telefoon als uw mobiele telefoon te detecteren, of zelfs een inkomend bericht op uw tablet (accessoire vereist).

Hoe het werkt

Wanneer de telefoonzender is geactiveerd, signaleert deze de Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Hij is uitgerust met drie activeringen die, naast telefoondetectie, kunnen worden gebruikt voor:

- Een contactmat
- Een magnetische schakelaaraccessoire
- Een bestaande deurbel, enz.

Met de telefoonzender kunt u, voor elke activering, een individuele waarschuwing kiezen en hij maakt gebruik van een robuuste radioverbinding die uw hele huis dekt. Hij is zeer eenvoudig in te stellen, nagenoeg onderhoudsvrij en werkt jarenlang op standaard batterijen.



Functies

Meervoudige verbindingen
Drie aparte activeringsingangen

Aanpasbare melding
Kies er een voor elke activering

Duurzame energie
Levensduur van de batterij tot 10 jaar

Beveiligde radioverbinding
Tot 250 m reikwijdte



Medisch apparaat met CE-markering
volgens EU MDR 2017/745

Technische specificaties

Grootte en gewicht

Hoogte: **100 mm, 4,0"**
Breedte: **65 mm, 2,6"**
Diepte: **27 mm, 1,1"**
Gewicht: **134 g, 4,7 oz. (incl. batterijen)**



Ingangen/uitgangen

- RJ11-ingang naar analogoos telefoonnetwerk
- 3,5 mm externe activeringsingang voor andere accessoires

Activering

- De testknoppen en de vaste telefoon
- De contactmat of een magnetisch contactaccessoire
- Een deurbel, enz. aangesloten aan de externe activering

Frequentie en dekking


- Radiofrequentie: 868,3 MHz
- Dekking: 50 – 250 m, afhankelijk van de kenmerken van het gebouw.

Goedkeuringen



Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Knoppen en aansluitingen

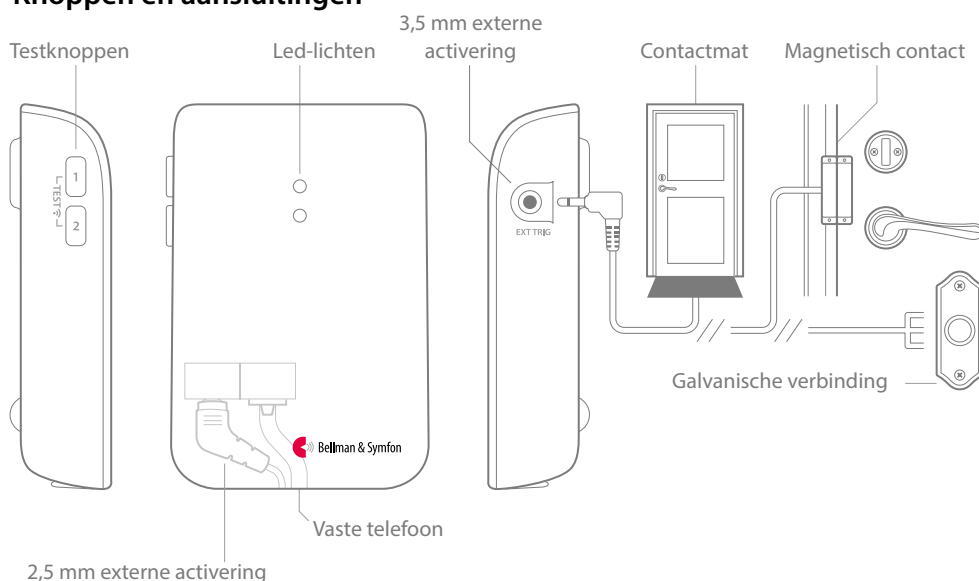

Stroom en batterij

- Stroomvoorziening
Batterijvermogen 2 x 1,5 V AA lithium of alkaline
- Stroomverbruik
Actief < 70 mA, inactief < 15 µA
- Gebruikstijd
Alkaline ~ 5 jaar, lithium ~ 10 jaar

Aantal radiotoetsen

- 64 standaard. Maximaal 256 met optionele software.

Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Temperatuur: 0 ° - 35 °C, 32 ° tot 95 °F
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

In de doos

- BE1431-868 Visit Telefoonzender
- BE9105 Telefoon snoer
- 2 x 1,5 V AA alkalinebatterijen
- Klittenband voor wandmontage
- Schroef en plug
- Gebruikershandleiding



Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9026-P02 Contactmat
- BE9023-P02 Magnetische Schakelaar
- BE9253 Externe triggerkabel (3,5 mm aansluiting)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1431-868_001DSH1.0_NL

bellman.com