

Mobiele Telefoonzender

BE1433



Verbindt Visit met je mobiele telefoon, tablet of smartwatch.

De Mobiele telefoonzender maakt het makkelijker dan ooit om een oogje op je huis te houden. Hij verbindt het Visit-systeem via Bluetooth met je mobiele telefoon, tablet of smartwatch. Nadat je de Visit-app hebt geïnstalleerd, ontvang je Visit-meldingen op je mobiele apparaat. Bovendien geeft je Visit-ontvanger je een melding bij inkomende oproepen en berichten op je mobiele apparaat.

Met extra informatie over je meldingen complementeert hij je bestaande ontvanger, en laat jou je notificaties aanpassen, door de meldingengeschiedenis bladeren en een overzicht van je aangesloten apparaten bekijken.

De Mobiele telefoonzender kan ook meldingen sturen naar je vaste telefoon en heeft een activeringspoort waarop je een contactmat, deurbel, of magneetschakelaar kunt aansluiten.



MD Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745



Funcities


Bluetooth-aangedreven
Tot 40 m dekking, open veld

Besturing via app
Verkrijgbaar voor iOS & Android

Stuurt Visit-waarschuwingen naar mobiele apparaten
Toont Visit-waarschuwingen op je telefoon, tablet of smartwatch

Meldingen voor mobiele oproepen en berichten
Geeft je Visit-ontvanger een signaal wanneer je inkomende gesprekken of berichten ontvangt



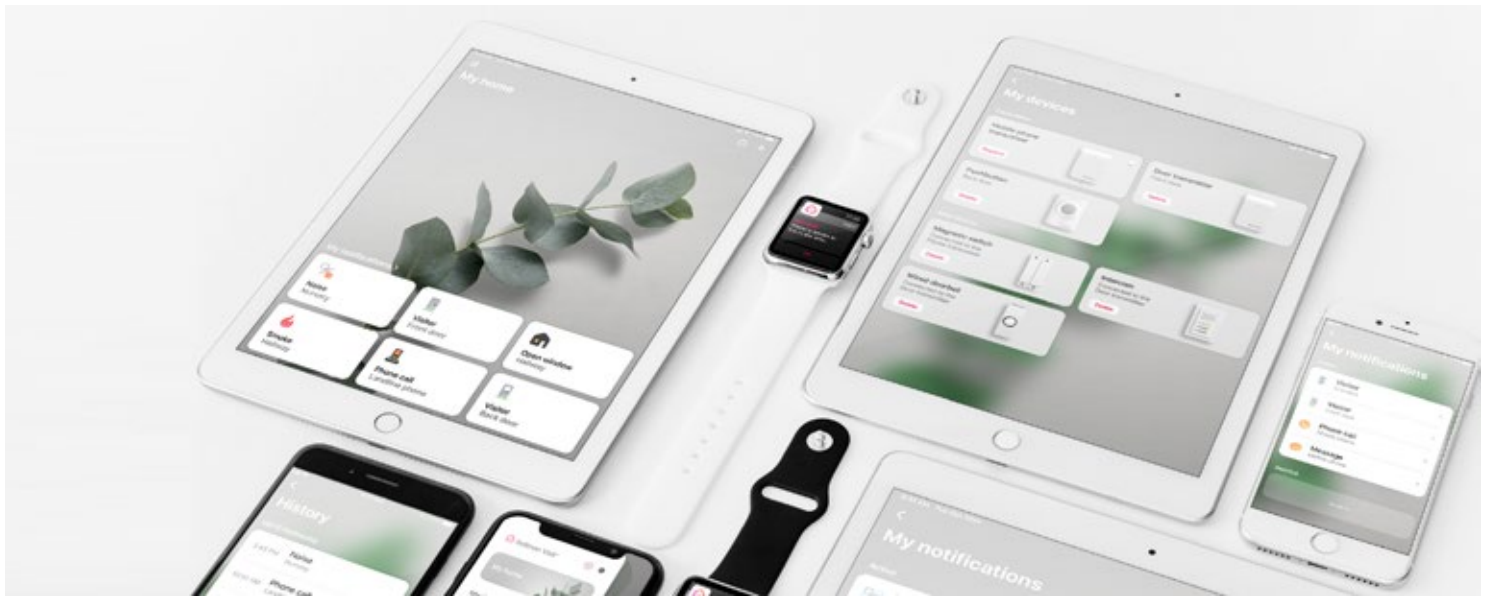


Grootte en gewicht

Hoogte: **100 mm, 4,0"**
 Breedte: **65 mm, 2,6"**
 Diepte: **27 mm, 1,1"**
 Gewicht: **198 g, 4,2 oz. incl. batterijen**



Knoppen en aansluitingen

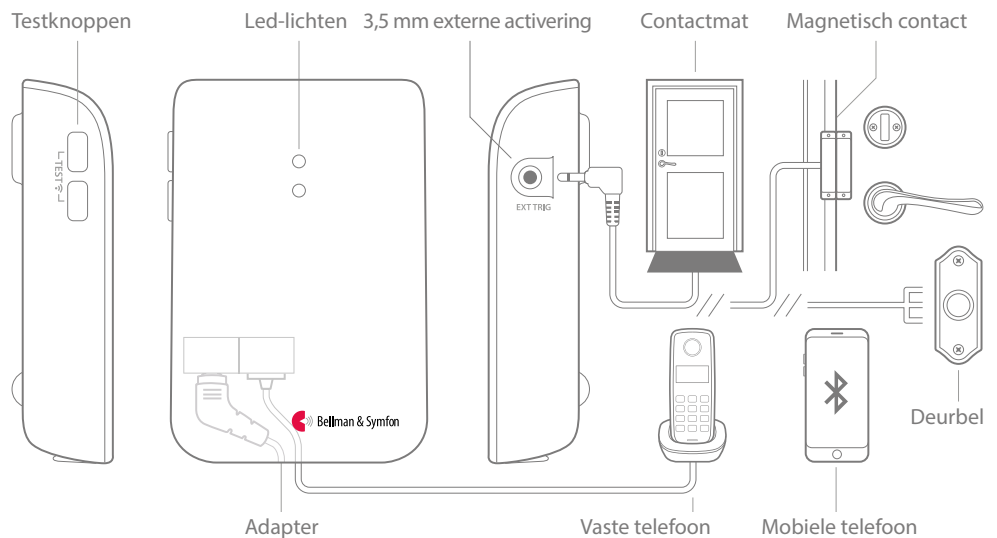

Connectiviteit

- RJ11-ingang naar analogoos telefoonnetwerk
- 3,5 mm ext. activeringspoort voor accessoires
- Stroomvoorziening jack-aansluiting
- Bluetooth 5.0

Activering

- Mobiel apparaat via Bluetooth
- De testknoppen en de vaste telefoon
- De contactmat of een magnetisch contactaccessoire
- Bedrade deurbel verbonden met ext. activeringspoort

Compatibiliteit

- iOS15 en hoger | Android 8 en hoger
- iPhone 6S en hoger | Moderne Android-apparaten

Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Temperatuur: 0 - 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

Stroom en batterij

- Netstroom: 5 VDC/1.000 mA
- Back-upbatterijen: 2 x 1,5 V AA Alkaline

Frequentie en dekking

- ISM-frequentie: 868,30 MHz
- ISM-dekking: Tot 250 m (275 yd)
- Bluetooth-frequentie: 2400 - 2483,5 MHz
- Bluetooth-dekking: Tot 40 m

Aantal radiotoetsen

- 64 standaard.

Onderhoud en reiniging

- Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

Goedkeuringen



Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

In de doos

- BE1433 Mobile Telefoonzender
- Stroomvoorziening en stroomkabel
- 2 x 1,5 V AA alkalinebatterijen
- Voorgemonteerd telefoonsnoer
- Telefoonsplitter
- Schroef en plug



Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9026-P02 Contactmat
- BE9023-P02 Magnetische Schakelaar
- BE9253 Externe activeringskabel (3,5 mm aansluiting)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1433_053DSH1.0_NL

bellman.com