

Visit Draagbare Ontvanger

BE1450-868



Functies

Krachtig geluid
Instelbaar tot 93dB

Duidelijke signaalidentificatie
Gebruikt licht - en geluidssignalen

Duurzame energie
Levensduur van de batterij tot 3 jaar

Trilschijfuitgang
Voor nachtelijke waarschuwingen

Gemakkelijke opstelling
Werkt direct uit de doos

MD

Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745

Houdt u op de hoogte.

De draagbare ontvanger van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u met individuele lichten en geluiden wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

De draagbare ontvanger vereist geen installatie en is zeer eenvoudig in gebruik. Hij is volledig draadloos, zodat u hem naar de veranda of het balkon kunt brengen en heeft een batterijduur van maximaal drie jaar.

Heldere en duidelijke waarschuwingen

De draagbare ontvanger kan een geluidssignaal tot 93 dB produceren en is voorzien van een grote, ergonomische draaiknop waarmee u het volume gemakkelijk naar wens kunt aanpassen. Hij gebruikt gekleurde lichten en individuele geluidssignaturen om de Visit signalen te onderscheiden.

Bovendien kunt u een trilschijf aansluiten en wakker worden met trillingen als er iets zou gebeuren terwijl u slaapt.




Technische specificaties




Afmetingen en gewicht

Hoogte	165 mm, 6,5"
Breedte	130 mm, 5,1"
Diepte	36 mm, 1,4"
Gewicht	590 g, 20,8 oz. (incl. batterij)

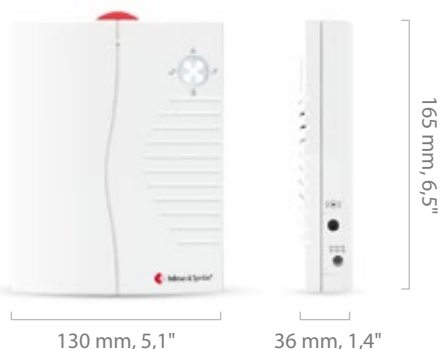

Knoppen en bedieningselementen

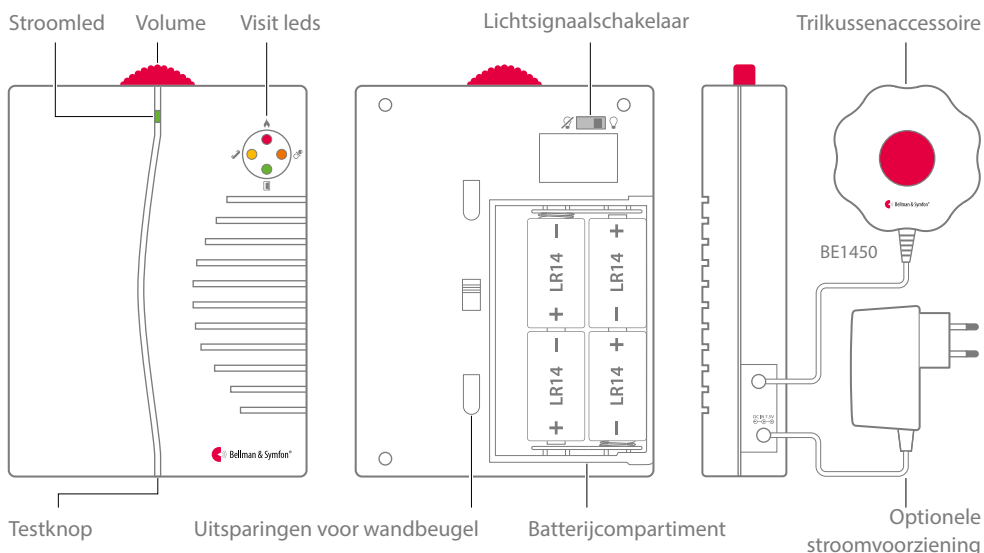

Functies

- Instelbaar geluidssignaal
Max 93 dBA @ 1 m, frequentiebereik: 500-1.000 Hz
- Duidelijke signaalidentificatie
Gekleurde leds en individuele geluidssignalen
- Duurzame energie
Tot 3 jaar levensduur van de batterij
- Spanning Trilkussen: 2,0 - 4,0 VDC

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,3 MHz,
- Dekking: Tot 250 meter, afhankelijk van de kenmerken van het gebouw en de combinatie van zenders en ontvangers.

Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 0 ° tot 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

Stroom en batterij

- Batterijvermogen
4 x 1,5V LR14 alkalinebatterijen
- Netstroom
7,5 V DC/1000 mA met optionele stroomvoorziening
- Stroomverbruik
Actief: 1000 mA, inactief: 0,1 mA
- Gebruiksduur
2 - 3 jaar met alkalinebatterijen

In de doos

- BE1450-868 Visit Draagbare Ontvanger
- 4 x 1,5V LR14 batterijen
- Wandbeugel met schroeven en pluggen

Goedkeuringen



Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool
De rookmelder is geactiveerd
- Oranje en rode LED's knipperen afwisselend
De CO-melder is geactiveerd

Accessoires

- BE1270-P02 Trilkussen
- Voedingseenheid (VK of Europa)

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1450-868_001DSH1.0_NL

bellman.com