


Visit Rookmelder

BE1481 / BE1481-DE

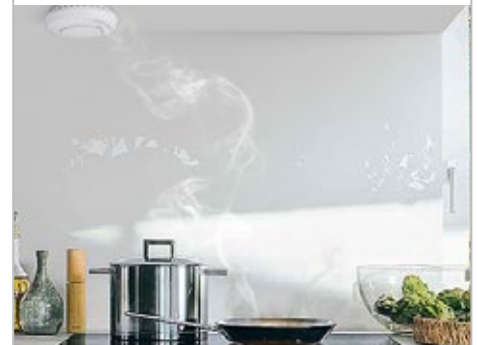

Funcities

Sensortype
Optothermische sensor

Lange levensduur van de batterij
Gaaf 5 jaar mee

Stille modus
Voor ruimtes met kookdampen

Betrouwbare radioverbinding
Dekt uw hele huis

MD

Medisch apparaat met CE-markering volgens EU MDR 2017/745 en rookmelder volgens EN 14604:2005/AC:2008

Bescherm uw huis en uw gezin.

De Visit rookmelder maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij ontdekt rook en smeulend vuur in een vroeg stadium en geeft het alarm direct door aan uw Visit ontvangers.

Kijkt uit voor u

Als er brand uitbreekt, geeft de Visit rookmelder onmiddellijk het signaal door aan uw Visit ontvanger die u waarschuwt met geluiden, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger). Visit

zal u tijdig waarschuwen, zodat u de gevarezone snel kunt verlaten.

De Visit rookmelder maakt gebruik van een zeer betrouwbare radioverbinding die uw hele huis dekt. Hij is robuust en gaat lang mee, met een batterijduur van 5 jaar. Hij is uitgerust met een stille modus om vals alarm te voorkomen tijdens het koken en waarschuwt als hij is verontreinigd met vuil, stof of spinnenwebben.



Technische specificaties



Afmetingen en gewicht

Hoogte: 120 mm, 4,7"


Breedte: 120 mm, 4,7"

Diepte: 37 mm, 1,5"


Gewicht: 150 g, 5,3 oz. incl. batterij



Knoppen en bedieningselementen

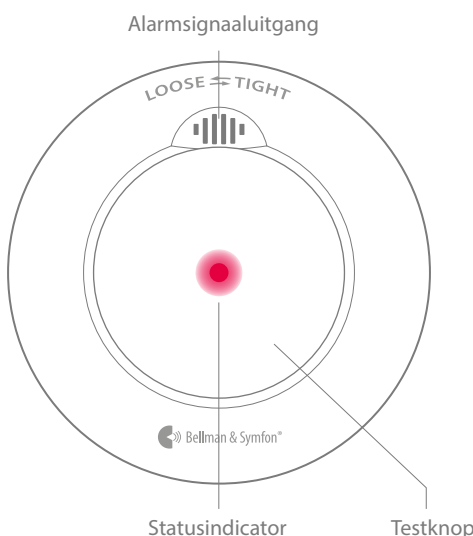

Montagebeugel

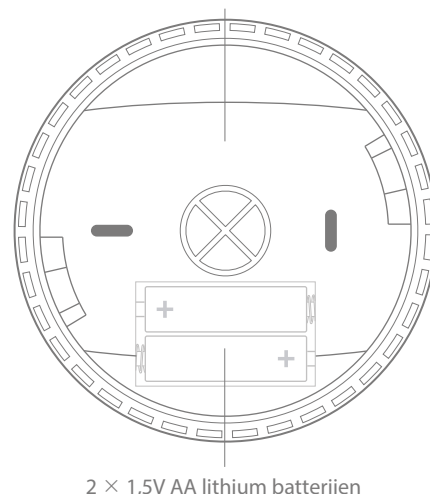

Funcities

- Sensortype
Optische rookdetectie en thermische detectie
- Rookgevoeligheid
0,115 - 0,168 dB/m
- Warmtegevoeligheid
54° - 70° C
- Hoorbaar alarm
> 85 dB(A) @ 3m (10')
Frequentie: 3,2 kHz
- Radioverbinding
Beschikt over een aparte radiomodule in de rookmelder.
- Waarschuwing lage batterij
Verzendt het alarm naar alle Visit ontvangers binnen bereik (dezelfde instellingen voor de radiosleutel vereist).
- Waarschuwing defect apparaat
Geeft een alarm af als het apparaat is verontreinigd met vuil, stof of spinnenwebben.
- Uitzendfunctie
Verzendt het alarm naar alle andere Visit ontvangers binnen bereik, waarbij de instellingen van de radiosleutel worden uitgeschakeld.
- Activering
 - Via testknop
 - Via de rookdetector
 - Via de temperatuursensor, wanneer de temperatuur tussen 54 - 70 °C ligt.

Stroom en batterij

- Batterijvermogen
Lithium: 2 x 1,5V AA Energizer Lithium L91
- Stroomverbruik
Actief < 75 mA, inactief < 15 µA
- Gebruikstijd
Lithium batterijen: 5 jaar

Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- Temperatuurbereik: 4 ° tot 40 °C
- Vochtigheidsbereik: 15% tot 95% RV (niet-condenserend)

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,30 MHz
- Dekking: Tot 200 m vrij zicht.
Het bereik wordt verkleind door muren, grote objecten en andere radiozenders zoals televisies en mobiele telefoons

Goedkeuringen



Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening medische hulpmiddelen) en een rookmelder die voldoet aan EN 14604:2005/AC:2008.

In het pakket

- BE1481/-DE Visit Rookmelder
- Beugel
- Batterijen
- Schroeven



Onderhoud en reiniging

- Stofzuig uw rookmelder regelmatig (en altijd als de batterij wordt vervangen) met een zachte borstel en veeg het apparaat af met een licht vochtige doek.
- Waarschuwing: Verf niet over de rookmelder heen.

Accessoires

- BE9175 Magnetische montagekit
Biedt een snel en gemakkelijk alternatief voor traditionele schroeven en pluggen.

© nl TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden.


Alle productontwerpen zijn gepatenteerd. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1481/BE1481-DE_014DSH1.0-NL

bellman.com

Détecteur de Fumée Visit

BE1481 / BE1481-DE

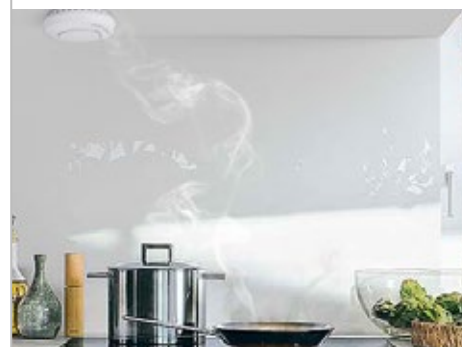

Caractéristiques

Type de capteur
Capteur optothermique

Batterie longue durée
Durée de vie de 5 ans

Mode silence
Pour les zones où il y a des fumées de cuisson

Liaison radio fiable
Couvre toute la maison



Dispositif médical marqué CE conformément au règlement européen MDR 2017/745 et détecteur de fumée conforme à la norme EN 14604:2005/AC:2008

Protégez votre maison et votre famille.

L'émetteur Visit du détecteur de fumée fait partie du système Visit qui vous aide à surveiller votre maison. Il détecte la fumée et les feux couvants à un stade précoce et transmet l'alarme directement à votre récepteur Visit.

Veille sur vous

Si un incendie se déclare, le détecteur de fumée Visit transmet instantanément le signal à votre récepteur Visit qui vous alerte par des sons, des clignotements ou des vibrations (selon le récepteur). Visit vous alerte

rapidement afin que vous puissiez vous mettre à l'abri à temps.

Le détecteur de fumée Visit utilise une liaison radio très fiable qui couvre l'ensemble de votre domicile. Robuste et durable, il offre une autonomie de 5 ans. Il est équipé d'un mode silencieux pour éviter les fausses alarmes lorsque vous cuisinez et vous avertit s'il est encrassé par de la saleté, de la poussière ou des toiles d'araignée.



Spécifications techniques

Dimensions et poids


Hauteur: 120 mm
Largeur: 120 mm
Profondeur: 37 mm
Poids: 150 g, batterie comprise



Caractéristiques

- Type de capteur
Détection optique de fumée et détection thermique
- Sensibilité à la fumée
0.115 – 0.168 dB/m
- Sensibilité à la chaleur
54° – 70° C
- Alarme sonore
> 85 dB(A) @ 3m (10 pieds)
Fréquence: 3.2 kHz
- Connexion radio
Comprend un module radio séparé à l'intérieur du détecteur de fumée.
- Avertissement de batterie faible
Transmet le signal d'alarme à tous les récepteurs Visit dotés de la même clé radio et situés dans la portée radio.
- Avertissement d'unité défectueuse
Déclenche une alarme si l'unité est contaminée par de la saleté, de la poussière ou des toiles d'araignée.
- Fonction de diffusion
Transmet l'alarme de fumée et de chaleur à tous les autres récepteurs Visit situés dans la portée, en ignorant les paramètres de la clé radio.
- Activation
 - Via le bouton de test
 - Via le détecteur de Fumée
 - Via le capteur de température, si la température est comprise entre 54 et 70 °C.

Boutons et commandes

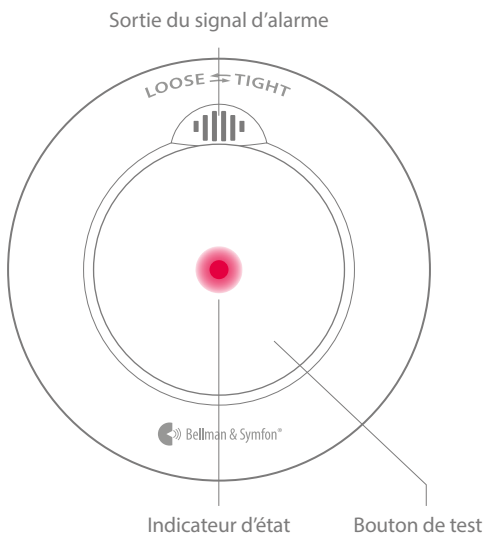

Alimentation et batterie

- Alimentation par batterie
Lithium: 2 piles AA Energizer Lithium L91 de 1,5 V
- Consommation électrique
En active < 75 mA, en veille < 15 µA
- Durée de l'opération
Piles au lithium: 5 ans

Exigences environnementales

- Pour usage intérieur uniquement
- Plage de température: 4 °C à 40 °C
- Plage d'humidité: 15 % à 95 % HR (sans condensation)


Fréquence et couverture

- Fréquence radio: 868.30 MHz
- Couverture: jusqu'à 200 m de ligne de vue dégagée.
La portée est réduite par les murs, les objets volumineux et d'autres émetteurs radio tels que les téléviseurs et les téléphones mobiles.

Homologations

MD Dispositif médical marqué CE conformément au règlement européen MDR 2017/745 et détecteur de fumée conforme à la norme EN 14604:2005/AC:2008

Support de montage

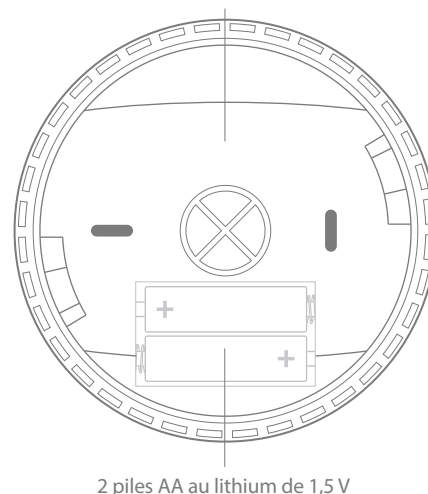

Dans l'emballage

- BE1481/-DE Visit
Détecteur de fumée
- Support
- Piles
- Vis



Entretien et nettoyage

- Passez régulièrement l'aspirateur sur votre détecteur de fumée (et systématiquement après avoir remplacé la pile) à l'aide d'une brosse douce, puis essuyez-le avec un chiffon légèrement humide.
- Avertissement: ne peignez pas le détecteur de fumée.

Accessoires

- BE9175 Kit de fixation magnétique
Offre une alternative rapide et facile aux vis et chevilles traditionnelles.

© and TM 2025, Bellman & Symfon AB

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. All product designs are patented. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE1481/BE1481-DE_014DSH1.0-FR

bellman.com