

Visit Babyfoon

BE1491-868



Funcities

Betrouwbare overdracht
Tot 250 m reikwijdte

Flexibel
Instelbare gevoeligheid
en vertraging

Aanpasbare melding
Gebruik een uniek signaal
voor elk kind

Optionele deurmat
Weet of uw kind het bed verlaat

Gemakkelijk in gebruik
Geen ingewikkelde menu's

MD

Medisch apparaat met CE-
markering volgens EU MDR
2017/745

Wees er voor uw baby.

Zorgen voor de gezondheid en veiligheid van uw baby is een van de belangrijkste dingen die u als ouder doet. Bellman & Symfon biedt een volledig veilige bewakingsoplossing voor baby's van ouders met gehoorverlies, zodat u altijd dicht bij uw baby bent. De Visit babyfoon waarschuwt u zodra uw baby u nodig heeft, ook als u slaapt of een paar kamers verwijderd bent.

Hoe het werkt

Wanneer de babyfoon is geactiveerd, signaleert deze de Visit ontvanger die u waarschuwt met geluid, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger).

Veilig en betrouwbaar

Visit maakt gebruik van een beveiligde radioverbinding die uw hele huis dekt, zodat u altijd weet dat u verbonden bent.

Instelbare gevoeligheid en vertraging

U kunt de gevoeligheid en vertraging van de babyfoon aanpassen, zodat deze niet wordt geactiveerd wanneer uw kind beweegt in zijn slaap.

Aanpasbare melding

Als u meer dan één kind hebt, kunt u verschillende signalen kiezen, zodat u weet wie uw aandacht nodig heeft.



Technische specificaties




Grootte en gewicht

- Hoogte: **100 mm, 4,0"**
Breedte: **65 mm, 2,6"**
Diepte: **27 mm, 1,1"**
Gewicht: **120 g, 4,2 oz (incl. batterijen)**



Knoppen en aansluitingen

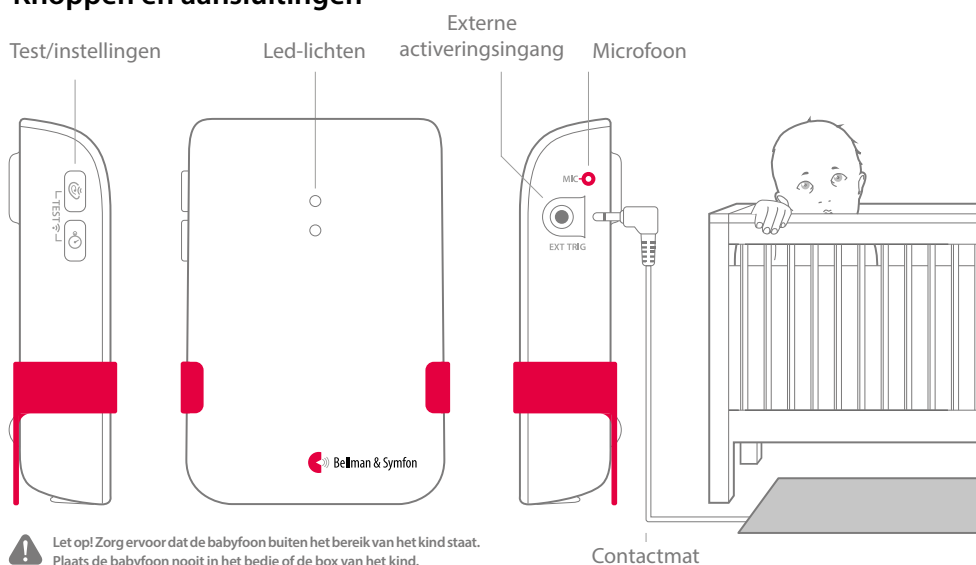

Ingangen/uitgangen

- 3,5 mm externe activeringsingang

Activering

- De testknoppen en de interne microfoon
- De Contactmat (los verkrijgbaar)

Instellingen

- Gevoeligheid: Hoog, Medium, Laag
- Vertraging: 30 sec, 10 sec, 1 sec

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie 868,3 MHz
- Bereik: 50 – 250 m
Afhankelijk van de kenmerken van het gebouw.

Goedkeuringen

MD Dit product is een medisch apparaat dat voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 (Verordening betreffende medische hulpmiddelen).

Stroom en batterij

- Stroomvoorziening
Batterijvermogen 2 x 1,5 V AA lithium of alkaline
- Stroomverbruik
Actief < 70 mA, inactief < 400 µA
- Bedrijfstijd
Alkaline ~ 6 maanden, lithium ~ 1 jaar

Aantal radiotoetsen

- 64 standaard. Maximaal 256 met optionele software.

Onderhoud en reiniging

- Onderhoudsvrij. Reinig met een droge doek.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Niet herbruikbaar.

Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Temperatuur: 0 tot 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

In de doos

- BE1491-868 Visit Babyfoon
- Tafelstandaard
- 2 x 1,5V AA alkalinebatterijen
- Schroef en plug
- Gebruikershandleiding



Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar:

- BE9026-P02 Contactmat

© 2025 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1491-868_001DSH1.0_NL

bellman.com