

Maxi Pro persoonlijke versterker

BE2021



Functies

Spraakversterking

Volg moeiteloos het gesprek aan de eettafel.

Telefoonversterking

Praat met vrienden zonder iemand te moeten vragen om zichzelf te herhalen.

TV kijken

Kijk naar uw favoriete serie en spaar tegelijkertijd de oren van uw gezinsleden

Gemakkelijk in gebruik

Stevig en ergonomisch ontwerp met unieke softgrip-materialen

Ontdek het plezier van beter horen

De nieuwe Bluetooth MaxiPro kan meer dan ooit tevoren. Maxi Pro is een complete luisteroplossing die uw smartphone, tablet en zelfs tv verbindt*, zodat u kunt genieten van uw favoriete programma en kan chatten met uw vrienden of familie zonder dat u de bank hoeft te verlaten. Aangedreven met 135dB versterking, een volledig bereik of toon/frequentie-instellingen en grote gebruiksvriendelijke knoppen, staat de MaxiPro alleen in kwaliteit.

Maxi Pro is ontworpen om stevig en gebruiksvriendelijk te zijn. Hij beschikt over grote voelbare knoppen, softgrip-materialen en indicatoren voor hoog contrast die hem heel gemakkelijk te hanteren maken. Dit maakt hem een uitstekende keuze voor mensen met tremoren, beperkt zicht of verminderde handvaardigheid.

*Maxi Pro tv-streamer vereist.



Qualcomm® aptX™
low latency




Technische specificaties

Afmetingen en gewicht

Hoogte: 140 mm, 5,5" Diepte: 27 mm, 1,1"
Breedte: 45 mm, 1,8" Gewicht: 127 g, 4,3 oz.



Knoppen en bedieningselementen

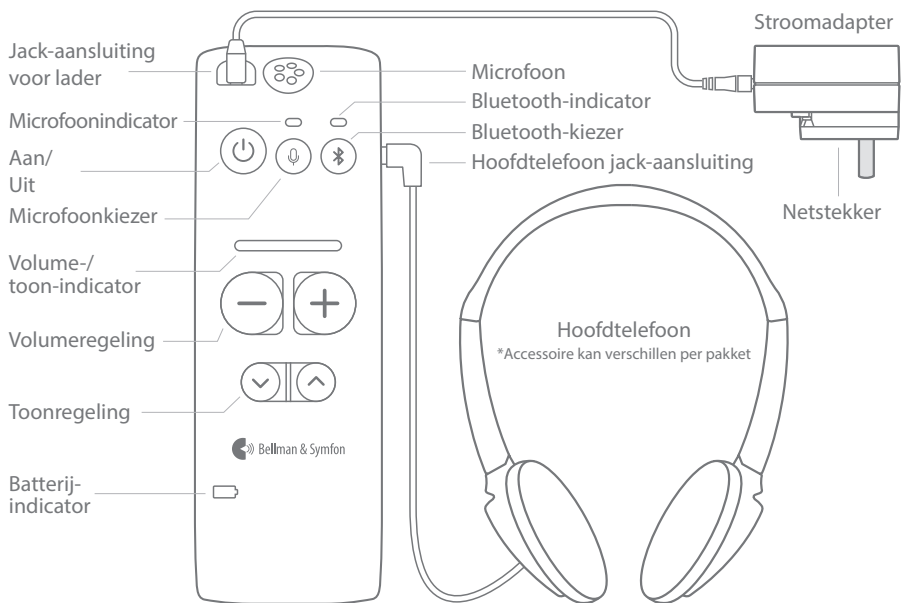

Functies

- **Digitale audio**
Heldere en natuurlijk klinkende spraak met een lage latentie en zonder vervorming.
- **Qualcomm® aptX™ LL aangedreven**
Maakt rechtstreeks verbinding met uw mobiele telefoon via Bluetooth en uw televisie via de Maxi Pro tv-streamer.
- **Gemakkelijk in gebruik**
Ergonomisch ontwerp met grote tactiele knoppen, softgrip-materialen en indicatoren met hoog contrast. Ideaal voor mensen met beperkte behendigheid of slecht gezichtsvermogen.
- **Gemaakt voor hoortoestellen**
Werkt met alle met luisterspoel uitgeruste hoortoestellen. (Nekkoordaccessoire vereist)

Stroom en batterij

- Batterijvermogen: 2 x 3,7V 750 mAh Li-on
- Gebruiksduur: Tot 70 uur
- Stroomverbruik: 18 mA

Frequentie en dekking

- Bluetooth-frequentie: 2402 - 2480 MHz
- Dekking: Tot 25 m, 27,5 yd, vrij veld.
- Connectiviteit: Qualcomm® aptX™ Lage latentie

Verbindingen

- Hoofdtelefooningang: 3,5 mm mini-stereo-aansluiting
- Laadgang: 2,5 mm aansluiting, DC 5V, 1,0 A

Milieuvereisten

- Gebruikstemperatuur: 0° - 35 °C
- Relatieve vochtigheid: 15% - 90% (niet-condenserend)

Uitgangssignaal

- **Uitgangsniveau met BE9124 oordopjes**
135dB @ 1kHz (SPL90)
136dB (HF Ave. SPL90)
Volledige versterkingsfactor: 49dB @ 1kHz
Ref. test versterkingsfactor: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **Uitgangsniveau met BE9122 hoofdtelefoon**
122dB @ 1kHz (SPL90)
127dB (HF Ave. SPL90)
Volledige versterkingsfactor: 36dB @ 1kHz
Ref. test versterkingsfactor: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **Mic SNR**
53dB @ 1kHz 1% THD (elektrisch)
- **Vervorming**
0,2% THD @ 1kHz - 6dB @ 1% THD (elektrische microfoon)
- **Bluetooth SNR**
85dB @ 1kHz 1%THD (BT met tv-streamer)
- **Frequentiebereik**
20Hz - 8kHz (Mic), 20Hz - 20kHz (Bluetooth)
- **Uitgangsvermogen**
Max 82mW @ 1kHz/16 Ω (THD=1%)

Onderhoud en reiniging

- Koppel het netsnoer en alle kabels los om het product te reinigen. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt.
- Gebruik geen glasreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.

In de doos

- BE2021 Maxi Pro
- BE9233 hoofdtelefoon met microfoon*
- Laadkabel
- Stroomadapter
- Netstekker
- Gebruikershandleiding



Accessoires

- BE9122 Stereo hoofdtelefoon, zwart
- BE9124 In-ear stereo oordopjes, zwart
- BE9233 Headset met microfoon, zwart
- BE9229 oordopjes met microfoon, zwart
- BE9159 nekkoord met 90 cm kabel, zwart
- BE9161 nekkoord met 15 cm kabel, zwart
- BE9228 glasvezelkabel, wit
- BE9123 mini-stereo-naar-RCA-kabelset, wit
- BE9254 enkele DC-naar-USB-laadkabel, wit
- BE9148 dubbele DC-naar-USB-laadkabel, zwart
- BE9273 universele stroomadapter, wit
- BE9262 universele stroomadapter, zwart

© nl TM 2020, Bellman & Symfon AB

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden.

Alle productontwerpen zijn gepatenteerd. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE2021_048DSH004_NL

bellman.com