


# Visit Dörrsändare

## BE1411-868

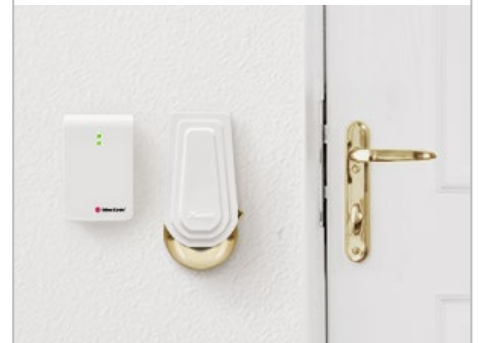

### Egenskaper

#### Flexibel

Klarar dörrklocka och porttelefon

#### Tillförlitlig detektering

Digital fingeravtrycksalgoritm

#### Programmerbar

Lär sig känna igen din dörrklocka

#### Lång batteritid

Upp till 10 års batterilivslängd

#### Säker radiolänk

Upp till 250 m räckvidd

**MD**

CE-märkt medicinsk enhet  
enligt EU MDR 2017/745

## Missa inga besök

Visit dörrsändare är en produkt som ingår i Bellman & Symfons lösningar för smarta hem. Den talar om när gästerna står vid dörren, så att du enkelt kan hålla reda på vilka som kommer och går i hemmet. Dörrsändaren är förprogrammerad att känna igen de flesta dörrklockor och porttelefoner och kan lära sig att känna igen praktiskt taget vilken dörrsignal som helst.

#### Så fungerar det

När någon ringer på, skickar dörrsändaren en signal till Visitmottagaren som visar med ljud, blyxtljus eller vibrationer att gästerna har kommit.

#### Flexibel detektering

Visit dörrsändare kan aktiveras genom:

- Den interna mikrofonen
- Den inbyggda magnetiska detektorn
- Det externa mikrofontillbehöret
- En galvaniskt ansluten dörrklocka

Visit dörrsändare använder digital fingeravtrycksalgoritm för ljudanalys och en säker radiolänk med lång räckvidd. Den är mycket enkelt att installera, praktiskt taget underhållsfri och har en batterilivslängd på upp till tio år.




# Teknisk information

## Mått och vikt

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Höjd:  | 100 mm                |
| Bredd: | 65 mm                 |
| Djup:  | 27 mm                 |
| Vikt:  | 120 g inkl. batterier |



## Knappar och anslutningar

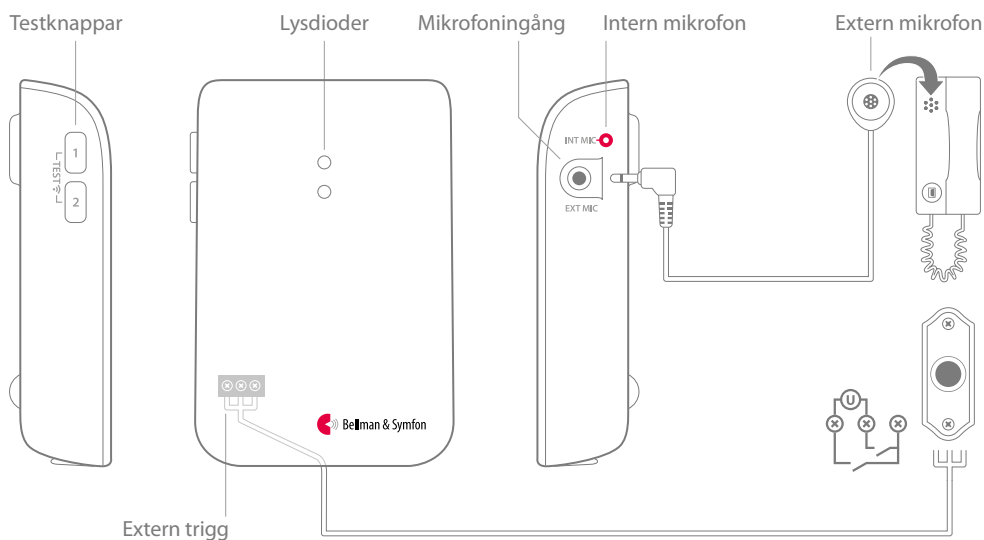

## Anslutningar

- Mikrofoningång (3,5 mm monokontakt)
- Extern trigg för galvanisk anslutning

## Aktivering

- Testknappar
- Intern mikrofon
- Extern mikrofon (tillbehör)
- Magnetisk detektion
- Befintlig dörrklocka ansluten till extern trigg

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Godkännanden



Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

## Ström och batteri

- Strömförsörjning  
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkaliskt
- Strömförbrukning  
Aktiv < 70 mA, Viloläge < 15 µA
- Drifttid  
Alkaliskt batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

## Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

## Underhåll och rengöring

- Underhållsfri. Rengör endast med en torr trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller slipmedel.
- Ej för återanvändning

## Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % -90 %  
(ej kondenserande)

## I paketet

- BE1411-868 Visit Dörrsändare
- 2 x 1.5V AA Alkaliska batterier
- Kardborreband för väggmontage
- Skruv och plugg
- Bruksanvisning



## Tillbehör

- BE9199-P02 Extern mikrofon 2.5 m

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1411-868\_001DSH1.0\_SE

[bellman.com](https://bellman.com)