

Visit Portabel Mottagare

BE1450-868



Egenskaper

Kraftfullt ljud

Går att justera upp till 93 dB

Tydliga signaler

Med blix och färgade lysdioder

Lång batteritid

Håller upp till tre år

Sängvibrator eller ljudutgång

För nattlarm eller förstärkt ljud

Enkel att sätta upp

Använd den direkt ur paketet



CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Håller dig uppdaterad.

Den portabla mottagaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med ljud och blixtar talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Den portabla mottagaren är mycket enkel att använda. Den är helt trådlös, så du kan ta med den ut på verandan eller balkongen, och har en batterilivslängd på upp till tre år.

Klara och tydliga larm

Den bärbara mottagaren producerar en ljudsignal på upp till 93 dB och har ett stort, ergonomiskt vred som gör det enkelt att justera volymen precis som du vill. Den använder olika färgade lysdioder och individuella ljud för att särskilja Visitsignalerna.

Du kan dessutom ansluta en sängvibrator och vakna upp till vibrationer om något skulle hända medan du sover.



Teknisk information




Mått och vikt

Höjd	165 mm
Bredd	130 mm
Djup	36 mm
Vikt	590 g (inkl. batteri)



Knappar och reglage

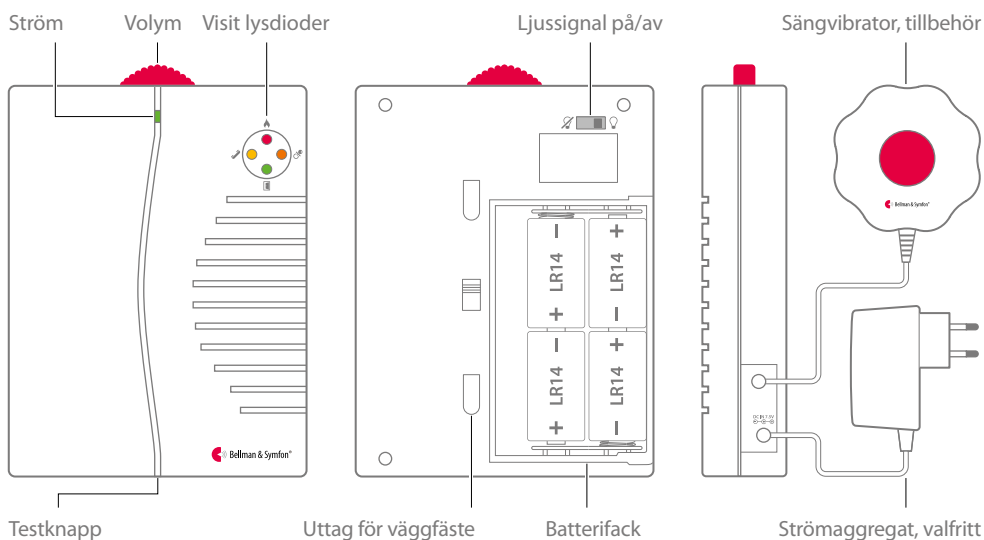

Egenskaper

- Justerbar ljussignal
Max 93 dBA @ 1 m, frekvensomfång: 500-1000 Hz
- Tydlig signalidentifiering
Färgade lysdioder och individuella ljudsignaler
- Lång batteritid
Upp till 3 års batterilivslängd
- Uttag sängvibrator: 2.0 – 4.0 VDC

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 0° till 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% icke kondenserande

Ström och batteri

- Batterityp
4 x 1.5V LR14 alkaliska batterier
- Strömförsörjning
7.5 V DC / 1500 mA med valfritt strömaggregat
- Strömförbrukning
Aktiv: 1000 mA, viloläge: 0.1 mA
- Drifttid
2 – 3 år med alkaliska batterier

I paketet

- BE1450-868 Visit Portabel Mottagare
- 4 x 1.5V LR14 batterier
- Väggfäste med skruv och plugg

Tillbehör

- BE1270-P02 Sängvibrator
- Nätdapter UK eller Europa

Godkännanden

MD Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats
- Orange och röda lysdioder blinkar omväxlande
CO-larmet är aktiverat

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1450-868_001DSH1.0_SE

bellman.com