

Visit Pager-mottagare

BE1470-868



Egenskaper

Diskreta vibrationer

Tysta och diskreta larm

Olikfärgade lysdioder

Lätt att skilja signalerna åt

Lätt och enkel att bära

Sätt fast den i bältet eller kragen

Utbytbar etikett

Enkel att anpassa

Laddare som tillbehör

Med uttag för två sängvibratorer

MD

CE-märkt medicinsk enhet
enligt EU MDR 2017/745

Enkel att bära med sig, i och runt huset.

Pagern från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med diskreta vibrationer talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Pagern använder olikfärgat ljus för att enkelt skilja Visitsignalerna åt och har en batterilivslängd på upp till tre veckor. Den är

robust och lätt, och går antingen att fästa i bältet eller stoppa i fickan. Bär med den runt huset för att alltid få reda på om något händer som kräver din uppmärksamhet.

Pagern kan också användas tillsammans med en laddare (tillbehör) som har reservbatteri och två ingångar för sängvibrator. Placera dem bara under kudden eller madrassen för att vakna av vibrationer om något skulle hända under natten.



Teknisk information




Mått och vikt

Höjd:	86 mm
Bredd:	57 mm
Djup:	29 mm
Vikt:	70 g (inkl. batteri)



Knappar och reglage

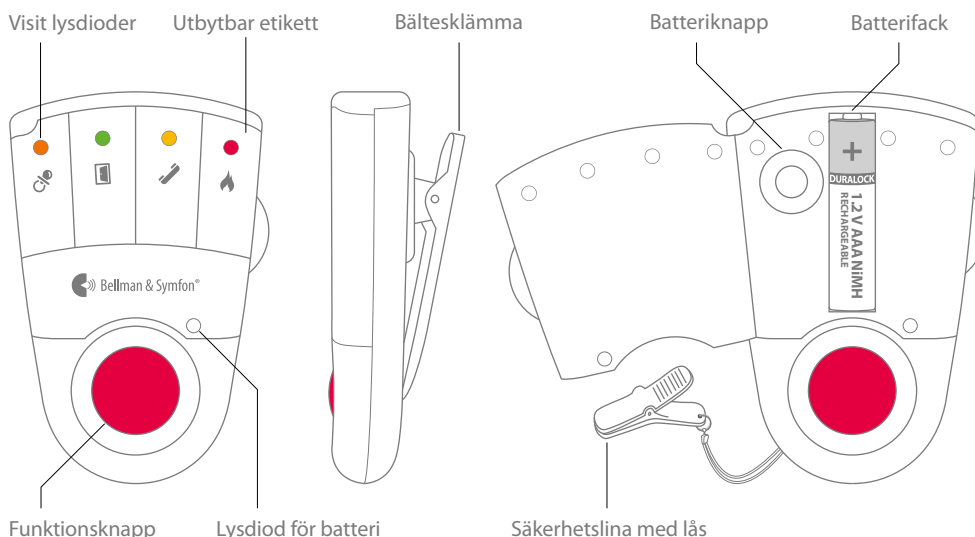

Egenskaper

- Diskreta larm
Avger tysta och diskreta vibrationer
- Tydliga signaler
Använder färgade lampor och vibrationsmönster
- Lätt och portabel
Väger endast 70 g
- Laddare som tillbehör
Utrustad med två uttag för sängvibrator

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Godkännanden

- MD** Denna produkt är en medicinsk enhet som uppfyller kraven i förordning (EU) 2017/745 (förordningen om medicinska enheter).

Ström och batteri

- Med laddare
Laddas via BE1260 pagerladdare
- Med batteri
1 x 1.5 V AAA alkaliskt batteri eller
1 x 1.2 V AAA NiMH uppladdningsbart batteri
- Strömförbrukning
Aktiv: 220 mA, viloläge: 1 mA
- Drifttid
Alkaliskt batteri: 2 – 3 veckor
NiMH batterier: ~1 vecka per laddning

I paketet

- BE1470-868 Visit Pager-mottagare
- Bältesklämma, säkerhetslina, extra etikett

Omgivning

- För inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet:
15% -90%, ej kondenserande

Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Tillbehör

- BE1260-C Pagerladdare
- BE1270-C Sängvibrator (ansluts till laddaren)

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1470_001DSH1.0_SE

bellman.com