




BE1221 Vibio Bed Shaker

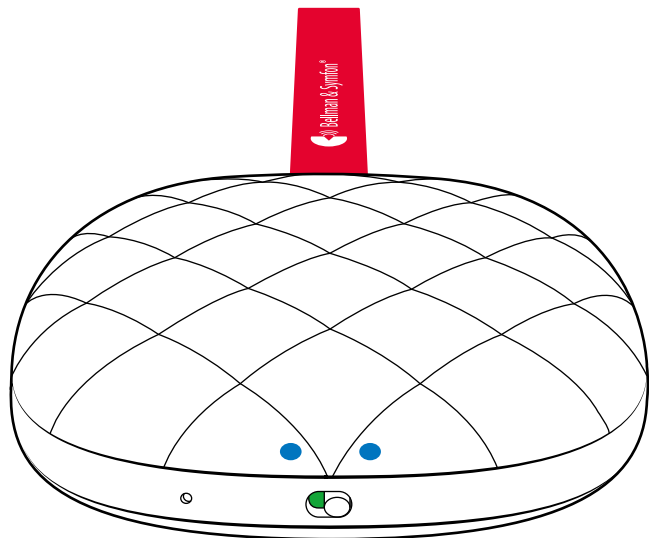

BE1221 Vibio Bed Shaker

-
- | | |
|---|-------------|
| 4 | User manual |
|---|-------------|
-
- | | |
|----|--------------------|
| 12 | Manual del usuario |
|----|--------------------|
-
- | | |
|----|----------------------|
| 20 | Manuel d'utilisation |
|----|----------------------|
-
- | | |
|----|------|
| 28 | 用戶手冊 |
|----|------|
-
- | | |
|----|------|
| 36 | 用戶手冊 |
|----|------|
-
- | | |
|----|-----------|
| 44 | ユーザーマニュアル |
|----|-----------|
-

EN

ES

FR

CN_{SI}

CN_{TR}

JP

请首先阅读以下文字

本手册将指引您如何使用的新的无线振动器。使用本产品前请仔细阅读本册子，包括**重要安全信息**部分，并妥善保管。如果有任何问题，请联系我们的当地的经销商或者 Bellman 当地办事处。

关于 BE1221 无线振动器 Vibio

使用方式

无线振动器 Vibio 通常置于枕头或床垫下，闹铃则在 Vibio 手机应用程序中设置。当闹铃响起时，无线振动器会在枕头或床垫下震动以唤醒用户。设置闹铃后，无线振动器即可独立工作。

目标用户群

目标用户是希望接收增强信号的人群。

目标用户

目标用户群包括各个年龄段的人。



该设备不会恢复正常听力，也不会预防或改善由于器质性病变引起的听力障碍或耳聋。


欢迎使用

您还需要

- iOS15/Android 8 或更高版本的手机
- USB 适配器

包装盒内含有


- 1 充电线
- 2 无线振动器 Vibio

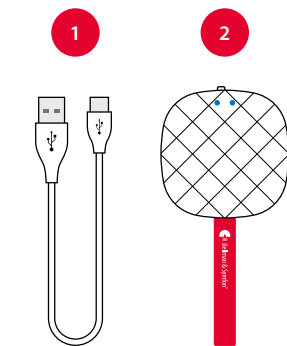

BE1221 无线振动器 Vibio

指示灯闪烁状态

- 白色表示闹铃已激活，或正在与您的手机通信
- 蓝色表示已准备配对
- 绿灯闪烁表示正在充电
- 黄色表示您有来电或信息
- 红色表示电池电量低

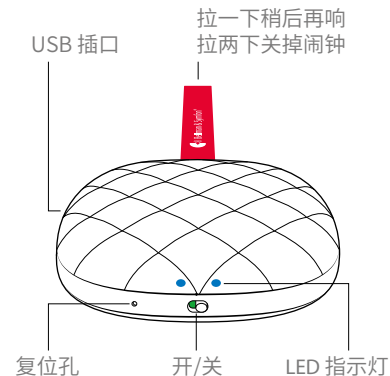


安装 Vibio

1 充电

连接充电线到您的 Vibio, 并将充电线插入 USB 电源适配器或 USB 电源插座。

2 打开开关

将开关滑到右侧开机, 然后将 Vibio 靠近手机。

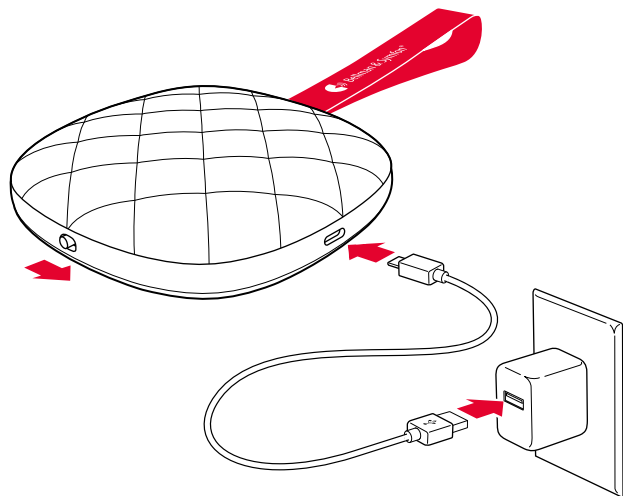

3 安装 Vibio 应用程序



从 App Store® 或从 Google Play™、Bellman 中文官网下载 Vibio 应用程序, 并按指示安装。



使用应用程序

管理闹钟

-  **新增。**点一下加号按钮可新增闹钟
-  **编辑。**按一下铅笔按钮可编辑闹钟
-  **删除。**按一下减号按钮可删除闹钟
-  **开/关。**按一下「开」或「关」按钮可启用或关闭闹钟

监控 Vibio

-  **连接。**Vibio 图标显示连接状态
-  **电池。**电池图标显示目前的电量

了解更多

-  **帮助。**点选「菜单」>「帮助」, 以进一步了解该应用程序



重要安全信息

本节包含有关安全、处理和运行的重要信息。请保留此宣传册以供将来使用。如果您只负责安装设备，则务必将本宣传册交给户主。

⚠ 危险警告

- 不遵守以下安全说明可能会导致火灾、触电或其他伤害，或导致设备或其他财产损失。
- 请将本设备放置在 3 岁以下儿童接触不到的地方。
- 请注意，如果电池耗尽，可能会错过闹钟和通知。
- 请勿在任何热源（如明火、散热片、烤箱或其他产生热量的设备）附近使用或存放本设备。
- 仅使用本说明书中指定的电源适配器和电池类型。
- 保护电线免受任何潜在损坏源的影响。
- 请勿拆卸设备；存在触电危险。篡改或拆卸设备将导致保修失效。
- 本设备仅供室内使用。请勿将设备暴露在潮湿环境中。
- 在存储和运输过程中保护设备免受冲击。

- 请将损坏或有故障的产品交由合格的维修人员。

❗ 产品安全信息

- 不遵守以下说明可能会导致设备损坏并使保修失效。
- 请勿将电池暴露在火源或阳光直射下。
- 小心不要让设备摔落。掉落至坚硬表面上可能会受损。
- 请勿在禁止使用电子设备的区域使用该设备。
- 如果您的设备出现其他问题，请联系购买点、当地的 Bellman & Symfon 办事处或制造商。请访问 bellman.com 获取联系方式。
- 首次使用该设备前，应将可充电电池充满电。仅在 0 至 35 摄氏度的环境温度下内对电池充电。
- 可充电电池只能由 Bellman & Symfon 或授权服务中心更换。如果电池更换不当，则可能存在爆炸危险。
- 除非得到机组人员的特别许可，否则不得在飞机上使用该设备。

配置选项

本款无线振动器可与以下手机型号和操作系统结合使用

- iPhone 6s 及更新版本，或现代 Android 设备
- iOS15 或 Android 8 及更高版本。

工作条件

在本说明书中规定的温度和湿度范围内的干燥环境中运行该设备。如果设备受潮或暴露在潮湿环境中，则不应再视其为可靠设备，应予以更换。

清洁

清洁设备前，请断开所有电缆。使用不起毛的软布。避免开口处受潮。请勿使用家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、酒精、氨水或研磨剂。该设备不需要消毒。

服务和支持

如果设备似乎已损坏或无法正常运行，请按照本手册中的说明进行操作。如果产品仍然无法正常运行，请联系您当地的听力保健专家以获取有关服务和保修的信息。

保修条件

Bellman & Symfon 保证本产品（不包括电池）自购买之日起两（2）年内不会出现因材料或工艺缺陷而导致的任何缺陷。本保证仅适用于正常使用和保养，不包括因事故、疏忽、误用、擅自拆卸或任何原因造成的污染而导致的损坏。
此保证不包括偶然和间接损坏。此外，保修

不涵盖火灾、洪水、飓风和龙卷风等天灾。本保修赋予您特定的法律权利，您可能还享有其他因地区而异的权利。某些国家或司法管辖区不允许限制或排除偶然或间接损坏，也不允许限制默示担保的期限，因此上述限制可能不适用于您。

本保证是对您作为消费者所享有的法定权利的补充。除非经双方书面签字，否则上述保修条款不得更改。

符号解释

	表示制造商的序列号，以便识别特定设备。
	该符号代表产品制造商。
	该符号表示用户需要查阅使用说明。
	该符号表示在操作该符号附近的设备或控制器时要格外小心，或者当前情况需要操作员的注意或需要操作员采取行动，以避免不良后果。
	该符号代表信息的位置，尤其是在紧急情况下。
	该符号代表对于产品安全的环境温度限值。
	该符号代表对于产品安全的环境湿度限值。

疑难排除

问题	解决方法
LED 指示灯闪烁红色	电池电量低。请使用随附的充电线对 Vibio 进行充电。
LED 指示灯不亮	电池已耗尽。对 Vibio 充电约 1.5 小时。
Vibio 未连接到手机	请先检查应用程序主画面上的蓝牙连接状态。如果 Vibio 图标为红色并有删除线, 请尝试以下操作: 1 在蓝牙有效范围内移动。将您的手机移动至更靠近 Vibio 的地方。 2 关闭蓝牙后再开启。滑动以开启手机上的控制中心/快速设定面板, 然后点蓝牙图标。 如果仍然连接不上, 您需要手动重设并重新连接 Vibio 无线振动器和应用程序。请尝试以下步骤: 1 强制退出应用程序。请注意, 仅关闭是不够的。 2 Vibio 断开连接。进入设定>蓝牙。点选 Vibio 并点 ⓘ / ❏, 忽略此设备 / 取消配对。请确认蓝牙已经开启。 3 重设 Vibio。拉住绳子不放, 等蓝色 LED 指示灯开始快速闪烁后, 放开后再次拉住绳子, 直到蓝色指示灯亮起并缓慢闪烁。 4 设定 Vibio。再次启动 Vibio 应用程序并按照指示操作。



网站

技术规格

尺寸	尺寸: 27 x 94 x 94 毫米, 1.1 x 3.7 x 3.7 英寸
重量	重量: 153 克, 5.4 盎司
电源和电池	电池电量: 1x3.7 伏 AA 锂离子电池 功耗: < 1000 毫安, 空闲: < 100 微安 运行时间: 每次充电可使用长达 40 天 充电时间: 500 毫安下最长 1.5 小时 充电电流: 最大 500 毫安、5 伏直流
数据线和连接	数据线长度: 1 米, 39 英寸 联系方式: USB A 至 USB Micro-B
兼容性	iOS15 / Android 8 及更高版本, iPhone 6s 及更新版本/现代 Android 设备
频率和覆盖范围	▪ 蓝牙频率: 2400 – 2483.5 MHz ▪ 输出功率: 最大 2.5 mW (4dBm) ▪ 覆盖范围: 开阔环境下, 最远可达 30 米, 33 码。 ▪ 连接性: 蓝牙® 5
运输和储存期间的温度	-10 至 50 摄氏度
运行温度	0 至 35 摄氏度
运行湿度	15% 至 95%、无冷凝
运行、运输和储存时的气压	700 百帕至1060 百帕
包装清单	▪ BE1221 无线振动器 Vibio ▪ USB 充电线



FCC compliance statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC compliance statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2APAKBE1221 **IC ID:** 6693A-BE1221

Bluetooth® certified

This device includes a Bluetooth module which has passed the BQB certificate. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Bellman & Symfon is under licenses.

Model, type and classification

The information is available at the back of the product.

Product disposal and recycling information

According to local laws and regulations, your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The recycling of your product will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Battery disposal information

The product contains batteries that according to local laws and regulations must be disposed of separately from household waste. Take used batteries to a collection point designated by the authorities.

执行标准

GB4943.1-2022

GB/T 9254.1-2021

GB17625.1-2022

CMIIT ID可在设备标签上找到

CMIIT ID 可在裝置標籤上找到

Bellman & Symfon North America Inc.

PO Box 1388, Morrisville,
North Carolina 27560, USA
Phone: (910) 239-5796
Customer support: (833) BELLMAN
or (833) 235-5626



Bellman & Symfon Asia Ltd.

1401 & 1408, Laifung International Centre
33 Jie Fang Road South
Guangzhou, China
Phone: +86 20 8318 2950



Manufacturer

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30
436 32 Askim Sweden
Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
bellman.com

Revision: BE1221_151MAN3.0

Date of issue: 2025-01-08

TM and © 2025 Bellman & Symfon AB. All rights reserved.