

# Visit bærbar mottaker

BE1450



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

### Kraftig lyd

Kan justeres opp til 93 dB

### Tydelige signaler

Med blits og fargede lysdioder

### Lang batterilevetid

Opp til tre år

### Sengevibrator eller lydutgang

For nattalarm eller forsterket lyd

### Lett å sette opp

Settes opp rett fra esken

## Hold deg oppdatert.

Den bærbare mottakeren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde kontroll på signalene hjemme. Med lyd og blits forteller den om det ringer på døren eller telefonen, når din baby trenger oppmerksomhet eller i et branntilfelle.

Den bærbare mottakeren er meget lett å bruke. Den er helt trådløs, så du kan ta den med ut på verandaen eller balkongen, og har en batterilevetid på opp til tre år.

### Klare og tydelige alarm

Den bærbare mottakeren avgir et lydsignal på opp til 93 dB och har et stort, ergonomisk hjul som gjør det lett å justere styrken akkurat som du vil. Den bruker lysdioder med forskjellige farger og individuelle lyder for å skille mellom signalene.

Du kan også tilkoble en sengevibrator og våkne opp til vibrasjoner om noe skulle skje mens du sover.



# Teknisk informasjon




## Mål og vekt

Høyde	165 mm
Bredde	130 mm
Dybde	36 mm
Vekt	590 g (inkl. batteri)



## Knapper og kontroller

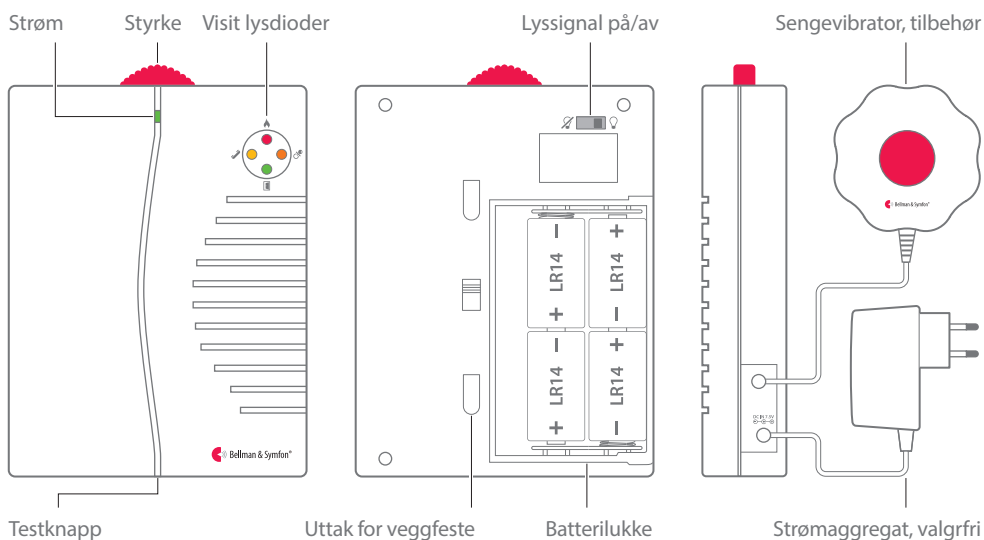

## Egenskaper

- Justerbar lydssignal  
Maks 93 dBA @1 m, frekvensområde: 500-1000 Hz
- Tydelig signalidentifisering  
Fargede lysdioder og individuelle lyssignaler
- Lang batterilevetid  
Opp til 3 års batterilevetid
- Uttak sengevibrator: 2.0 – 4.0 VDC

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

## Strøm og batteri

- Batteritype  
4 x 1.5V LR14 alkaliske batterier
- Strømforsyning  
7.5 V DC / 1500 mA med valgfritt strømaggregat
- Strømforbruk  
Aktiv: 1000 mA, standby: 0.1 mA
- Driftstid  
2 – 3 år med alkaliske batterier

## I esken

- E1450 Visit bærbar mottaker
- 4 x 1.5V LR14 batterier
- Veggfeste med skruer og plugg

## Omgivelser

- For innendørsbruk.
- Driftstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 15% -90% ikke kondenserende

## Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol  
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol  
Visit dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol  
Visit telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol  
Visit Brannvarsling er blitt aktivert

## Tilbehør

- BE1270 sengevibrator
- Bellman & Symfon Strømaggregat

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1450\_001DAS004-NO

[bellman.com](http://bellman.com)