

# Visit telefonsender

## BE1431



## Hold kontakt med dine nære og kjære

Visit telefonsender er en del av Visitsystemet som hjelper mennesker med nedsatt hørsel å oppfatte signaler hjemme. Den kan brukes for å detektere både fast- og mobiltelefon og til og med vise når du får en melding på din tablet (tilbehør kreves).

### Slik fungerer den


Når telefonen ringer sender telefonsenderen et signal til din Visitmottaker som viser med lyd, blitslys eller vibrasjoner at noen prøver å ringe deg.

Visit telefonsender er utstyrt med to ekstra innganger for tilkobling av:

- Matte eller magnetbryter
- Mobilsensor for mobil eller tablet
- Eksisterende dørklokke etc.

Du kan dessuten velge å ha forskjellige signalmønstre for hvert tilbehør så det blir lett å skille mellom dem.

Visit telefonsender er meget lett å installere, praktisk talt vedlikeholdsfri og har en batterilevetid på opp til ti år.

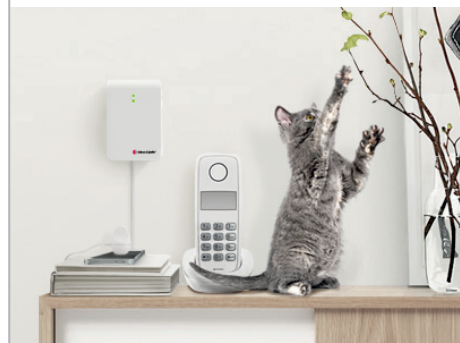

### Egenskaper

**Detekterer de fleste telefoner**  
Både fast- og mobiltelefon\*

**Multiple tilkoblinger**  
Tre separate triggerinn ganger

**Valgbart signal**  
Ulike signaler for ulikt tilbehør

**Lang batterilevetid**  
Opp til 10 års batterilevetid

**Sikker radiotilkobling**  
Opp til 250 m rekkevidde

\* Mobilsensortilbehør kreves




# Teknisk informasjon

## Mål og vekt

- Høyde: **100 mm**  
Bredde: **65 mm**  
Dybde: **27 mm**  
Vekt: **120 g inkl. batterier**



## Knapper og tilkoblinger

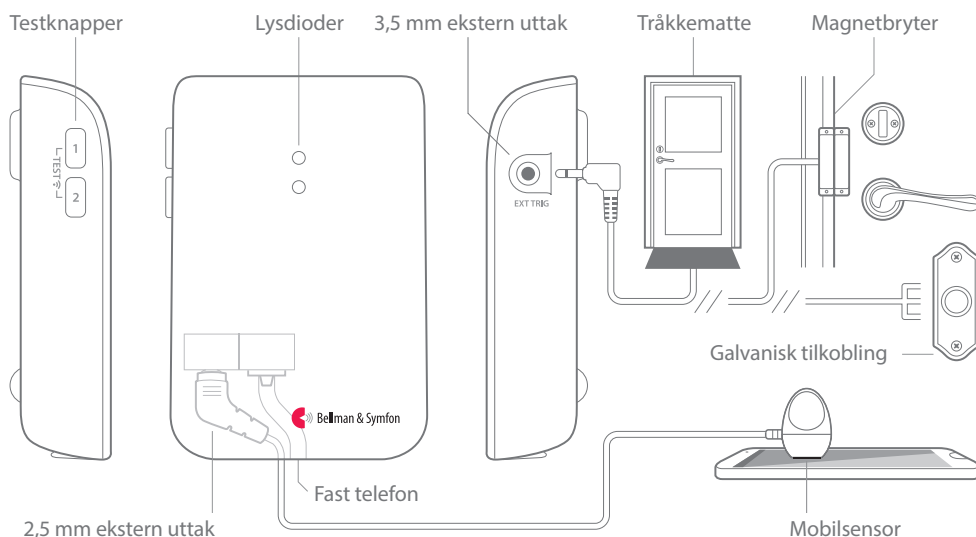

## Tilkoblinger

- Modular RJ11 kontakt for analog telenett
- 2,5 mm ekstern inngang for Mobilsensor
- 3,5 mm ekstern inngang for annet tilbehør

## Aktivering

- Testknapper
- Fast telefon og mobiltelefon via Mobilsensoren
- Tråkkematte eller magnetbryter
- Eksisterende dørklokke kobles til ekstern uttak

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og radiosendere som TV og mobiltelefon.

## Strøm og batteri

- Strømforsyning  
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkalisk
- Strømforkbruk  
Aktiv < 70 mA, Standby < 15 µA
- Driftstid  
Alkalisk batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

## Antall radionøkler

- 64. Kan økes til 256 med egen programvare.

## Vedlikehod og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Ikke for gjenvinning

## Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % til 90 % (ikke kondenserende)

## I esken

- BE1431 Visit telefonsender
- Telefonledning med mellomstykke
- 2 x 1.5 V AA alkaliske batterier
- Borrelås for veggmontering
- Skrue og plugg
- Våtserviett
- Bruksanvisning



## Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9251 Mobilsensor
- BE9023 Magnetbryter
- BE9026 Tråkkematte
- BE9253 Ekstern kabel (3,5 mm kontakt)

© og TM 2021, Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Produktdesignet er patentert. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1431\_001DAS004\_NO

[bellman.com](http://bellman.com)