

Maxi Pro 电视伴侣

BE2022

 Bellman & Symfon®



特点

蓝牙连接

多媒体传输声音
Qualcomm® aptX™ 技术

集成多种接口

可以连接各种类型电视设备



 **Bluetooth™**

Qualcomm® aptX™
low latency 

听你所需

Maxi Pro 电视伴侣可以协助你调节适合你的音量来“收听”电视，而不需要打扰房间里的其他人。通过蓝牙连接到你的Maxi Pro 个人辅听器并将声音转换成高清立体声。

电视伴侣采用最新 Qualcomm® aptX™ 低延迟技术，该技术优化同步性能，在回放音频，传输清脆声音时不会有任何声唇不同步的问题。电视伴侣集成模拟及数字输入，还可以连接多种电视的设备。

电源显示 蓝牙开关 蓝牙显示



电源接口 音频接口 光纤接口 充电接口

技术参数





尺寸与重量

高: 24 mm, 0.9" 宽: 48 mm, 1.9"
长: 88 mm, 3.5" 重量: 70 g



按键与控制

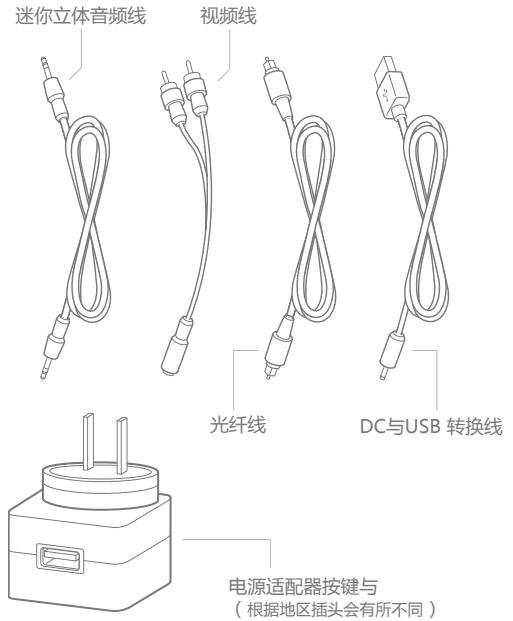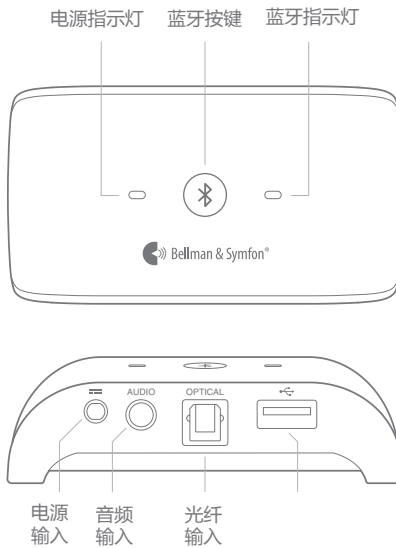

特点

- 采用最新 Qualcomm® aptX™ 低延迟技术, 该技术优化同步性能, 在回放音频, 传输清脆声音时不会有任何声唇不同步的问题。
- 集成多种接口
集成模拟及数字输入, 还可以连接多种电视的设备。

连接

- 音频输入接口: 3.5毫米 迷你立体声
- 音频输入灵敏度@最大2Vrms: +6 dBV
- 光纤输入: 44.1KHz, 48KHz
- 光纤输入灵敏度: 0 dBFS
- 充电接口: 2.5mm 连接口
输出: DC 5V, 1.0A
- 充电输出: USB A 类型

维护与清洁

- 清洗产品, 拔掉所有电源线及电线。使用柔软的无绒布擦拭。避免沾湿插口。
- 避免使用窗户或家用清洁剂, 气溶胶、喷雾剂、溶剂、酒精、氨或磨蚀剂。

电源

- 电量消耗: 31 毫安

频率与覆盖

- 蓝牙频率
2402 – 2480 MHz
- 覆盖
最远25米, 空旷区域
- 连接
Qualcomm® aptX™ LL

环境要求

- 操作温度: 0° – 35 °C
- 相关湿度: 5% – 90% (无凝固)

法规要求

- 产品符合以下法规



FCC ID: 2APAKBE2022 IC: 6693A-BE2022 R 204-720514

产品配套

- BE2022 Maxi Pro 电视伴侣
- 用户手册
- 迷你立体声音频线
- 视频线
- 光纤线
- DC与USB 连接线
- 电源适配器



Accessories

- BE9228 光纤线, 白色
- BE9123 视频线, 白色
- BE9254 单一-DC 与USB转换线, 白色
- BE9148 双头DC 与USB转换线, 黑色
- BE9273 全球通用电源适配器, 白色
- BE9262 全球通用电源适配器, 黑色

© and TM 2018, Bellman & Symfon AB

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. All product designs are patented. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE2022_035DSH001 SICN

bellman.com