

Mino / Maxi  
個人輔聽器



## 發現聽力改善的樂趣

Mino / Maxi 是一款可以說明您與親人或旁人享受交流樂趣的個人輔聽器。即使在環境嘈雜的情況下，它都可以傳遞給您響亮而清晰的聲音。這就是說，您再也無需費盡心思去傾聽。

例如，和家人聚餐、在商店購物，或是聽收音機和看電視時，Mino / Maxi 都會讓您聽到清晰的講話。Mino / Maxi 可以單獨使用，也可以和助聽器配套使用。



“現在，我參加  
家庭聚會再也  
不覺得累了”





“現在，我們再也不會聽錯彼此的講話了”

## 在家裡

就算在安靜的環境下，有時也很難聽清講話內容。

只需把 Mino / Maxi 放到講話者前方的桌子上，它就可以幫您聽清講話的內容了。您可以選擇使用頭戴式耳機、入耳式耳塞或下掛式耳塞來收聽。在嘈雜的環境下，Mino / Maxi 還是助聽器的好幫手，可以進一步過濾背景雜音，傳遞清晰的語音給助聽器。

▼ 頭戴式耳機    ▼ 入耳式耳塞    ▼ 下掛式耳塞



## 在社交場合

聚會場合往往很多人同時講話，比較嘈雜。在這種環境下要聽清談話就更加困難了。厭煩了一次次地讓別人重複講話內容，最後只好保持沉默。

Mino / Maxi 可以幫助您在嘈雜的環境下聽清談話。只需將 Mino / Maxi 指向講話者，您就能聽清您想傾聽的談話。

▼ 環頸圈

Mino / Maxi 可以通過環頸圈連接助聽器或人工耳蝸。





## 看電視

如果您有聽力困難，可能很容易就把電視或收音機的音量調得過大，這樣不經意間就影響了家人。

現在再也無需調大音量，也能聽得清楚。通過音訊轉換線連接 Mino / Maxi 和電視或收音機，您就能立刻享受到清晰的立體聲效，卻不用打擾家人。如果中途要與家人講話，只需一鍵便可在電視與講話間切換。

▼ 音頻轉換線，5米



▼ 領夾麥克風



## 在影劇院

去影劇院欣賞電影或音樂會是一項令人愉悅的休閒活動。但是，如果要很費力才能聽清，那就會錯過這種美妙的體驗。


在公共場所，例如：影劇院、音樂廳、教堂都會安裝電感環路系統。Mino / Maxi 可以通過內置的電感線圈收到管弦樂隊、電影或喇叭的聲音。如果中途要與旁人講話，只需一鍵便可切換。

▼ 電感符號「T」

下次去電影院或音樂廳的時候，可以留意一下看看有沒有這個帶「T」的電感符號。







“現在，我再也不用擔心漏聽別人的講話了”

## 在藥房

在藥房裡，藥劑師的聲音混雜在環境噪音中，對於有聽力困難的人來說，很容易就會漏聽藥劑師的叮囑等重要的資訊。而且，您也不會想大聲交談而讓別人聽到您的隱私資訊。

把 Mino / Maxi 放在櫃檯上，無需藥劑師提高講話的音量，您也可以聽清講話的內容。您還可以帶著 Mino / Maxi 去見醫生。

### ▼ MicroSet™ 耳麥

MicroSet™ 耳麥是專門為 Mino 設計的聽力配件。把耳麥的麥克風夾在衣服上，Mino 放在口袋裡，現在您的雙手就解放了。



## 在車裡

在車裡恐怕是最難以進行交談的聽力環境之一了，除了周圍嘈雜的交通噪音之外，同伴通常都不可能與您面對面地對話。在這種環境下很難聽清他人的談話。

只需把 Mino / Maxi 掛在您同伴的頸上，您可以清晰地聽到講話，而交通噪音卻減弱了。如果您坐得比較遠，您可以把領夾麥克風夾在同伴的衣領上來收聽講話。

### ▼ 領夾麥克風



# 瑞典品質

## 信心保證

Mino / Maxi 是由瑞典 Bellman & Symfon 公司設計，產品時尚實用，主產品有兩年全球品質保修服務。公司從1989年成立至今，一直用心傾聽客戶的需求，持續研發一流的聽力產品，以提高使用者的生活品質。



## 簡單易用

### 幾分鐘就會使用

Mino / Maxi 很直觀易用，幾分鐘就會使用。只需簡單按一個鍵，就可以開啟使用。沒有複雜的操作菜單，只需連接上耳機、耳塞或環頸圈，調到合適音量便可。



## 自然清晰的聲音

### 無需費力傾聽


Mino / Maxi 使用了最新的數位技術，可以傳遞如現代 CD 和 DVD 機般高品質的清晰的聲音。它可以有效地過濾背景雜音，放大言語聲音。這就意味著您不用費勁地傾聽，就可以輕鬆地與別人交談。



## 定向麥克風 Mino 專有

### 指向就能收聽

Mino 配有一個全向麥克風和一個定向麥克風。有了定向麥克風，您可以將 Mino 指向講話者，以降低您不想聽到的周圍的噪音。在餐廳、火車站和咖啡店等嘈雜的地方，定向麥克風就特別有用。

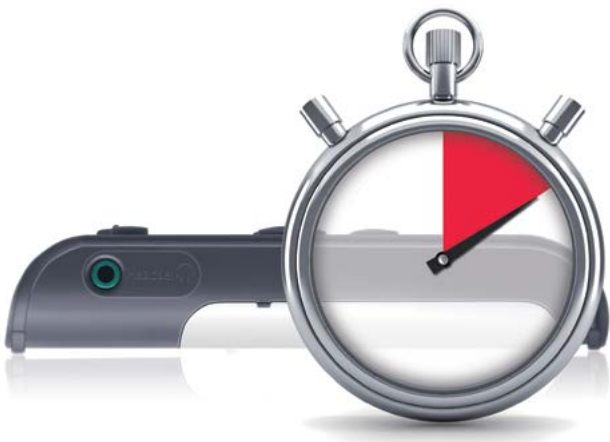

## 配備可充電電池 Mino 專有

### 持久耐用

Mino 精緻小巧，大小猶如一台手機，剛好可以很隱蔽地放進您的口袋裡。

Mino 配備可供長達18小時使用時間的可充電電池，這完全可以滿足全天馬拉松式看電視或自駕車一日游。



## 醒目的大按鈕 Maxi 專有

### 人性化設計

Maxi 非常耐用，而且很人性化。醒目的大按鈕，柔軟易握的橡膠材料，對比分明的指示燈，這都讓 Maxi 非常容易操作。Maxi 尤為適合視力不好或者手腳不太靈敏的人士。



# 與助聽器配套使用

Mino / Maxi 會先過濾煩人的背景雜音，再將清晰的言語聲音傳遞到您的助聽器或人工耳蝸。這就意味著您不用費勁地傾聽，就可以輕鬆地與別人交談。

以下是它的工作原理：



## 1. 把 Mino / Maxi 放在桌上

Mino / Maxi 收到聲音後，會把背景雜音過濾後，傳遞清晰的言語聲。

## 2. 把環頸圈掛在頸上

通過環頸圈，把言語聲線傳輸到助聽器或人工耳蝸中。

## 3. 聽到聲音

助聽器或人工耳蝸進一步優化聲音後，傳輸到耳朵中。

助聽器須帶電感功能



## 性能

全向麥克風	✓	✓
定向麥克風	✓	-
數位信號處理	✓	✓
數位降噪	✓	✓
音調調節	9級	5級
音量大小	9級	5級
左右耳平衡	✓	✓
內置電感線圈	✓	✓
外部聲源接口	✓	✓
電源	可充電電池	兩節 AA 鹼性電池
高級設置	7項	3項

## 包裝

Mino 含有：

Mino 個人輔聽器  
入耳式耳塞  
MicroSet™ 耳麥  
音頻轉換線  
掛繩  
腰夾  
充電器  
說明書

Maxi 含有：

Maxi 個人輔聽器  
頭戴式耳機或入耳式耳塞  
音頻轉換線  
兩節 AA 鹼性電池  
掛繩  
腰夾  
說明書

不同國家或地區的包裝規格或有不同





## 關愛您的聽力

瑞典 Bellman & Symfon

貝爾曼公司一直為提高聽障人士的生活品質而不斷努力。我們的團隊和合作夥伴與聽力學家和頂尖專家緊密合作，致力於保護和改善您的聽力。

### 歐洲總部

Bellman & Symfon Group AB  
Södra Långebergsgatan 30  
436 32 Askim  
Sweden  
Phone +46 31 68 28 20  
Fax +46 31 68 28 90  
E-mail [info@bellman.com](mailto:info@bellman.com)

### 亞太分公司

Bellman & Symfon Asia Ltd.  
廣東省廣州市越秀區環市東路339號  
廣東國際大廈主樓1401-06室  
郵編：510095  
電話：020 8318 2950  
傳真：020 8333 5528  
E-mail [info.cn@bellman.com](mailto:info.cn@bellman.com)