

環頸圈

BE9159



 Bellman & Symfon®



特點

- 1 高輸出功率
雙聲道輸出
- 2 防脫落安全頸繩
避免纏頸風險
- 3 可更換軟質織物導管
提升舒適度與衛生
- 4 噴塗軟膠外殼
增強佩戴舒適感
- 5 矽膠線材
操作更輕鬆
- 6 領夾式固定夾
確保正確定位
- 7 鍍金插頭
防止氧化

提升您的個人交流器使用體驗

Bellman & Symfon 環頸圈可連接配備 3.5 毫米輸出的音源裝置。將其連接至語音放大器、手機、平板電腦或電腦，並將個人交流器切換至「T」模式。頸掛線圈輕巧舒適，可佩戴於襯衫內層。

技術參數

- 頸帶長度 70 cm, 2.3'
- BE9159 線長 90 cm, 3'
- BE9161 線長 15 cm, 6"
- 頸圈直徑 22 cm, 9"

外殼尺寸

- 寬度 3.4 cm, 1.3"
- 高度 3.8 cm, 1.5"
- 厚度 1.4 cm, 0.5"
- BE9159 重量 62 g, 2.2 oz
- BE9161 重量 58 g, 2 oz

輸出參數

- 在 15 cm 距離及 2x50 mW 輸入信號下，輸出為 1500 mA/m。


輸入規格

- 3.5 mm 耳機插頭 (立體聲) 鍍金連接器, 90 度彎角設計。
- 阻抗: 2x5 歐姆





技術參數

頻率響應 (刻度參考: -20 dB ~ 0.1 A/m)

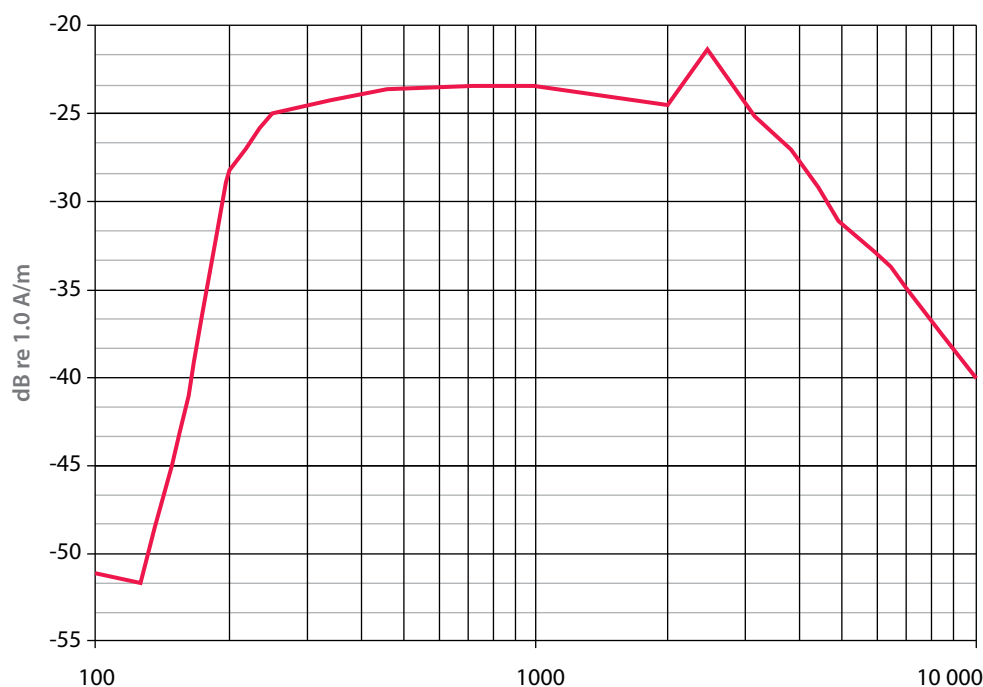

BE9159 与 Domino、Mino 搭配使用方法

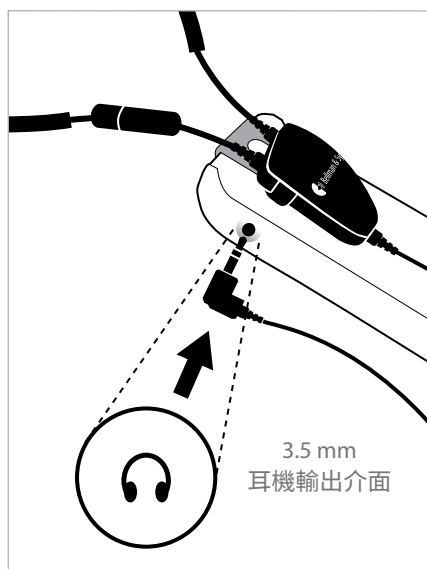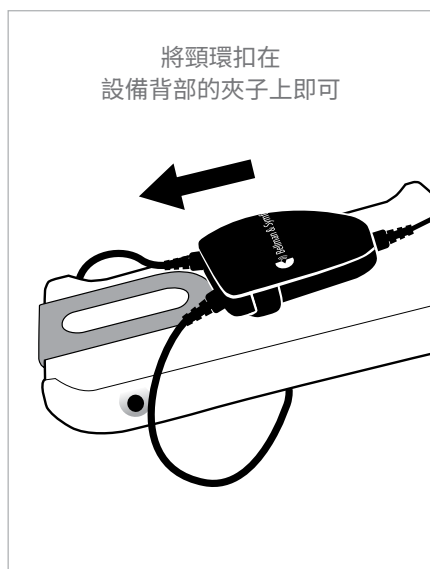

© 2025, Bellman & Symfon AB 保留所有權利

Bellman, Bellman & Symfon 以及 Bellman & Symfon 商標均為 Bellman & Symfon AB 的註冊商標。本說明書內容如有變更，恕不另行通知。

BE9159_BE9161_001DSH1.0_TRCN

bellman.com