

Halsslinga

BE9159/BE9161



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1** **Hög uteffekt**
Ger mycket låg signalförlust
- 2** **Delbart säkerhetslås**
För att undvika olyckor
- 3** **Utbytbart textilöverdrag**
För hygien och komfort
- 4** **Hölje med mjuk skyddslack**
För ökad komfort
- 5** **Kabel i silikonmaterial**
För ökad följsamhet
- 6** **Klämma**
Håller halsslingan i rätt läge
- 7** **Guldpläterade kontakter**
Ingen korrosion

Få ut mer av din hörapparat.

Halsslingan från Bellman & Symfon kan användas med ljudkällor som är utrustade med ett 3,5 mm hörlursuttag. Anslut den till din samtalsförstärkare, mobiltelefon, surfplatta eller dator och ställ hörapparaten i T-läge. Halsslingan är diskret och bekväm och kan bäras under tröjan eller skjortan.

Teknisk data

- Längd, halsslinga 70 cm
- Kabellängd BE9159 90 cm
- Kabellängd BE9161 15 cm
- Diameter, halsslinga 22 cm

Storlek på hölje

- Bredd 3,4 cm
- Höjd 3,8 cm
- Tjocklek 1,4 cm
- Vikt 60 g

Uteffekt

- ≥ 1700 mA/m på 15 cm avstånd och 2×50 mW insignal

Anslutning

- 3,5 mm teleplugg (stereo) guldpläterad kontakt, vinklad 90 grader
- Impedans: $2 \times 5 \Omega$





Teknisk information

Frekvensgång (Referens: -20 dB ~ 0.1 A/m)



Använda BE9161 med Domino och Mino

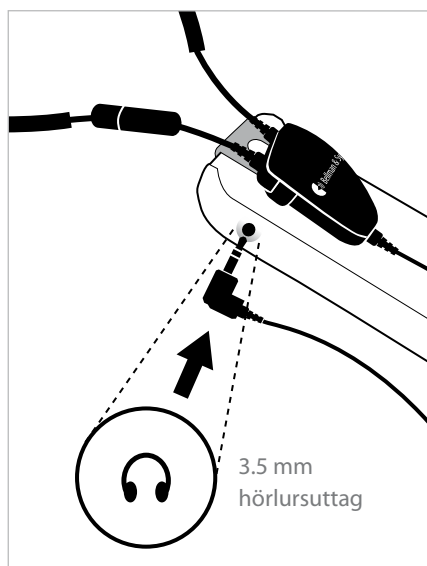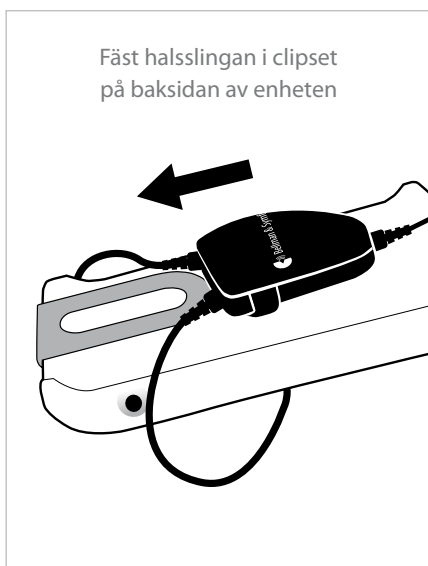

© och TM 2016, Bellman & Symfon AB

Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB, alla rättigheter förbehållna. Innehållet kan komma att ändras utan förvarning.

BE9159_BE9161_001DAS008_SE

bellman.com